

モリトー 介護リフトつるべ 製品仕様

■ つるべ標準仕様

昇降速度 上昇(850mmアーム)	31.7mm/sec
昇降速度 下降(850mmアーム)	37.1mm/sec
耐荷重	100kg
上下ストローク(700/850/950mmアーム)	955/1160/1300mm
ハンガーフック間距離(外寸法)※1	500(560)mm
材 質	スチール・ステンレス(SUS304)

※1 ハンガーフック間距離は、オプション(別売)にて、380と430mm仕様があります

■ つるべY4・Y6セット仕様

昇降速度 上昇	36.3mm/sec
昇降速度 下降	37.2mm/sec
耐荷重	120kg
材 質	スチール

■ オクトバス浴槽仕様

サイズ (外寸法)	1400×700×550mm
(内寸法)	1280×570×470mm
容 量	満水265ℓ
本体重量	110kg

■ つるべ電装品仕様

品目	形式	入力電源	出力電源	重量	コード長さ	防水性能	定格	備考
モーター	LA32	24V	-	3.4kg	0.4mコイル	IPX6	10%	6000N/最大電流値6A
スイッチ	HB31	24V	-	0.26kg	0.6mコイル	IPX6	-	-
コントローラー	CB08	100V	24VDC	1.4kg	5.1mストレート	IPX6	5%	AC電源設定のみ
コントローラー	CB12	100V	24VDC	3.5kg	3.2mストレート	IPX6	10%	バッテリー内蔵型
Y4・Y6専用モーター	LA34	24V	-	4.2kg	0.4(0.2)mコイル	IPX6	10%	10000N
Y4・Y6専用コントローラー	CBJ2	100V	24VDC	0.54kg	-	IPX4	10%	バッテリー残量表示
Y4・Y6専用バッテリーパック	BAJ1	-	24VDC	2.7kg	-	IPX4	-	-
Sセットモーター	LA34	24V	-	3.83kg	0.4mコイル	IPX6	10%	10000N
Sセットスイッチ	HB31	24V	-	0.26kg	0.4mコイル	IPX6	-	-
Sセットコントローラー	CB12	100V	24VDC	2.33kg	3.2m	IPX6	10%	-
リチウムイオン電池	BAL50	29.4V	25.2VDC	0.9kg	-	IPX6	-	-

バッテリータイプ (CB12) 小型シール蓄電池NP1.2-12,12V, 1.2Ahを2台使用
(CBJ2) 小型シール蓄電池ES2.9-12,12V, 2.9Ahを2台使用

■ オクトバス Y4・Y6セットLi-PINK電装品仕様

品目	型 式	入力電源	出力電源	防水性能	備 考
モーター	LA34	24V	-	IPX6	10000N
スイッチ	HB31	24V	-	IPX6	
チャージャー	CHL50	100V	29.4VDC	IPX4	
バッテリー	BAL50	29.4V	25.2VDC	IPX6	2.6Ah
コントローラー	COL50	100V	29.4VDC	IPX6	

■ つるべCセット V-Lift電装品仕様

品目	入力電源	防水性能	定格	備考
モーター	24V	IPV6	10%	10000N/最大電源7.7A
コントローラー	12V	-	10%	アクセサリーソケット給電
ワイヤレススイッチ(2個付属)	-	-	-	ボタン電池 CR2016×2個使用


- コントローラーの全タイプに過負荷保護回路を設定。過負荷でモーター電源を遮断
- コントローラーのバッテリータイプには、バッテリー残量警報を設定。残量50%でアラーム音作動
- コントローラーの全タイプのトランス内にヒューズの設置。1次側電源ヒューズ2A

■ つるべTEN仕様

走行方式	C450 手動走行
本体重量	10kg
積載重量	204kg
昇降ストローク	2030mm
昇降速度	45mm/秒
動力電源	DC24V(バッテリー搭載)
充電器入力	AC100-120V 1.0A
充電器出力	DC24V 1.5A
充電方法	レールの端で自動充電
バッテリー	12V5.0A×2個 密閉型鉛蓄電池
バッテリー残量表示	液晶/LED(赤)警告アラーム
操作方法	上下押し続けボタン方式
ペンダントスイッチ	空気圧式
赤外線リモコン	○
ストラップ緩み検知	○
過速度検知	○
スロースタート・ストップ	○
オートリターン機構	○
節約モード	○
乱巻き防止	○
緊急降下装置	○ (電動と手動があり)
緊急停止装置	○

■ つるべCセット V-Lift仕様

上下ストローク	985mm
耐荷重	100kg
材 質	スチール

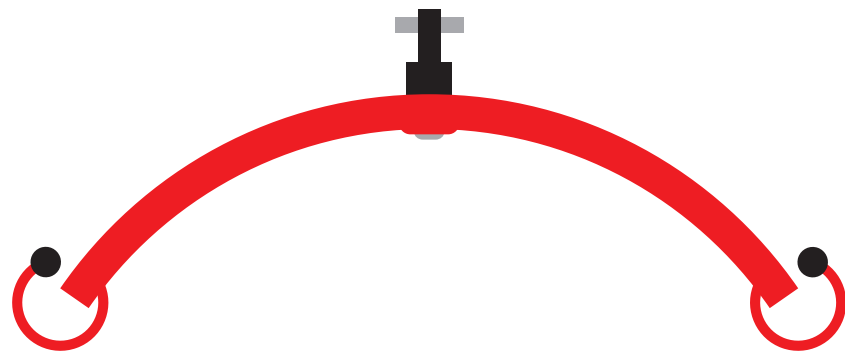

NURSING LIFT

介護リフト

つるべ
TSURUBE
LINEUP

製造発売元



■本 社／〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

- 札幌営業所／〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101
- 仙台営業所／〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22
- 埼玉営業所／〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103
- 東京営業所／〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イースタワー9階2号室
- 中部営業所／〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36
- 大阪営業所／〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンパクトオフィスB号
- 岡山営業所／〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉30-102
- 福岡営業所／〒811-1204 福岡県那珂川市片縄東1-12-1
- 信濃大町 研修センター／〒398-0001 長野県大町市大字平22393

お客様相談室
[24時間受付]
モリトーホームページ
Email
FAX (0586) 72-4555

☎ 0120-65-2525
https://www.moritoh.co.jp
info@moritoh.co.jp



販売店



耐荷重
100kg

ベッドの重さを利用したベッド設置式介護リフト

つるべー B・BBセット

様々な介護ベッドに使用できるよう長さ・幅の調整が可能。

紹介動画



外観寸法



つるべー BBセット

Bセットの特徴

- 支柱の設置位置は環境に合わせて、ベッドの頭側の左右、足側の左右の4カ所から選べます。
- 360度回転。掃き出し窓から外の車椅子へ乗り換えなど、レイアウトで様々な使用ができます。

BBセットの特徴

- キャスター付ベッドへ設置してもベッド移動が可能。頻繁にベッドを動かす方やベッド緊急搬送時にも支障がなく、病院・施設でも導入されています。
- ハーネスを使用することで、背面開放の端座位をとったり、立位姿勢・立位移乗が可能。自立化を大きくサポートします。
- 2関節アームのため、可動範囲が広がり、着座位置などの微調整が可能です。



つるべー Bセット

BWセット・BBWセットは体重計付きです。

360度回転アーム
置き場所で様々な使い方が可能になります。
[Bセット]関節付きアーム
可動範囲が広がります。
[BBセット]

つるべー Bセット



つるべー BBセット



リフト用デジタル体重計 MHS-2600

つるべーに乗ったまま体重測定が可能。

体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。
BMI(体格指数)機能があり、体重管理にも使用されています。
※B・BBセット、Y4・Y6セット、TENIに取付できます。
※レンタル仕様では検定なしになります。

- 最小単位/100g
- 電源/アルカリ単4乾電池6本
- 風袋引き機能付き

検定付

耐荷重
204kg

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト

つるべー TEN

レールの長さで移動範囲のニーズに対応できます。



設置式(XY型)

設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。

据置式の特徴

- 工事の必要がない仕様や壁面固定の後施工も可能。据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がごございます。



スプリングハンガーを使用したSSシリーズも設置可能です。



据置式(2ポスト)



C-450(手動走行)

コンパクトな高性能レール走行リフト

- 操作性の良い防滴ハンドスイッチ。
- バッテリー残量やリフトの状態を見やすい液晶ディスプレイ。
- 安全・安心設計

オープン価格 無線リモコンタイプもごございます。

耐荷重
100kg

楽しいカーライフを満喫できる車搭載型介護リフト

つるべー Cセット V-Lift

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。

紹介動画



つるべー Cセット V-Lift

Cセットの特徴

- クルマのシートに座れるため安全で、介助者の目も行き届きます。
- 助手席、後部2列目席のどこのシートにも移乗可能で、座る場所が限定されません。
- 女性でも簡単に着脱可能で、コンパクトに収納できます。
- 走行時は取り外しておくことで邪魔になりません。



後部座席移乗イメージ



V-Lift 取付イメージ



V-Lift カバー


足元の開放と、旋回性の向上を追求した床走行式リフト

つるべー Y4・Y6 Safety Roboセット

小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます。
床からの移乗にも適しています。



ハーネスライトを使った端座位姿勢からの立ち上がりと歩行支援

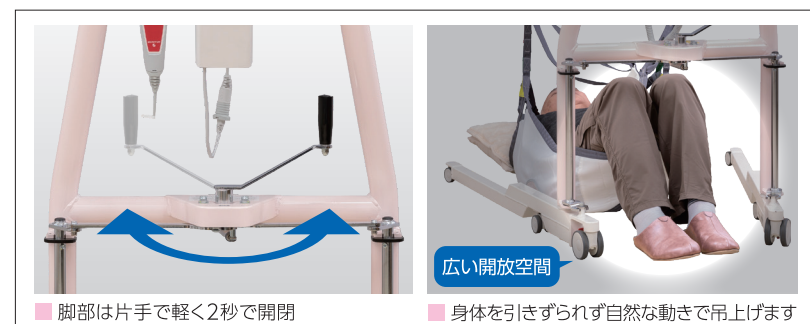

脚部は片手で軽く2秒で開閉

身体を引きずらず自然な動きで吊上げます


つるべー Y4・Y6 Safety Roboセット 専用手すり

- 手すりの高さの位置は4段階で調整可能です。
- 動き始め等のご本人の揺れを、手すりを握ることで軽減します。




Y6セット(6輪)の特徴

- 脚部前方の高さ63mmで低床ベッドに対応。6輪自在キャスターによりその場での旋回が可能。狭いお部屋での取り回しが楽です。

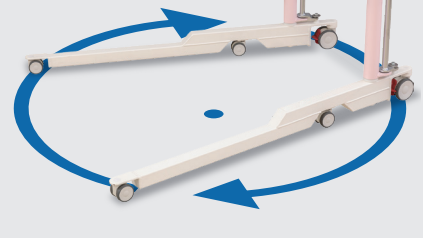


Y4セット(4輪)の特徴

- 床材の影響を受けにくい大きい(75φ)前輪キャスターを採用しているため、前進・後進がとてスムーズ。軽く移動が行えます。

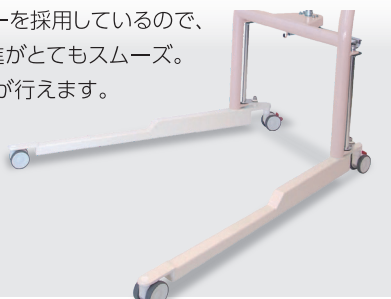

Y4、Y6セット Li-PINKの特徴

- リチウムイオンバッテリーを搭載することにより
 - バッテリー軽量化
 - 寿命UP
 - 充電忘れによる劣化が少ない
 - 充電時間が大幅短縮
 - 充電コードなしなど性能が大幅にアップしました。

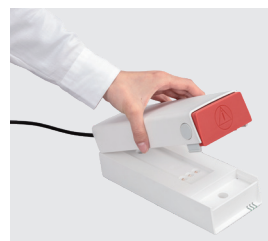

※地域により条件が異なります。
市町村窓口でご相談ください。

つるべーシリーズで最もコンパクトなリフト

つるべー G2Rセット U1・U2Rセット

自宅の玄関が階段でも楽に外へ出ることが可能です。



G2Rセットの特徴

- 玄関、お風呂、トイレ、居室など様々な場所の壁に設置できます。
- 200mmの関節で可動範囲が増え、曲がり階段の段差解消にも使用できます。



U1セットの特徴

- 床面で固定するリフト。壁に固定できない環境にお勧めです。支柱高1100、1350、1600mmの3種から最適な高さで設置できます。



U2Rセットの特徴

- U1セットに関節(300mm・400mm)を追加したリフト。



車椅子用ツルベルトセットの特徴

- 車椅子に専用金具を付けて、車椅子に乗ったまま移動します。



車椅子用ツルベルトセット
使用可能車椅子の条件

紹介動画
▶▶▶



外観寸法
▶▶▶



耐荷重
120kg

Y6セット Li-PINK Safety Robo

- 床走行式リフトがロボット化。吊り具の掛け忘れ確認装置(音声ガイド)搭載で安全・安心に。
- 吊り上げ時、約20kgの重さを感じるとリフトが一旦止まり、音声ガイド(「吊り具の安全を確認してください。」)が流れます。安全確認後上昇ボタンを押すことで再度上昇を開始します。

※Y6セット Li-PINK Safety Roboは介護保険レンタル対象ではありません

Y6セット Li-PINK Safety Robo

吊り具の掛け忘れ確認装置

紹介動画
▶▶▶



外観寸法
▶▶▶



耐荷重
100kg

耐荷重
100kg

自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト

つるべー F1・F2Rセット

ユニットバスにも設置できます。

紹介動画



外観寸法



つるべー F2Rセット



つるべー F1セット



つるべー F2Rセット

F1セットとF2Rセットの違い



つるべー F1セット



つるべー F2Rセット


壁固定と突っ張り棒接着固定式等、様々な設置方法があり、お風呂・トイレ以外への設置も可能なリフトです。

F1セット、F1SKKセットの特徴

- コンパクトで収納性もよく、1関節アーム式なので着座位置が固定され、操作が簡単です。

F2Rセット、F2RSKKセットの特徴

- 2関節アーム式なので、関節を曲げたり、伸ばしたりすることで可動範囲が広がります。脱衣場からの移乗も可能です。

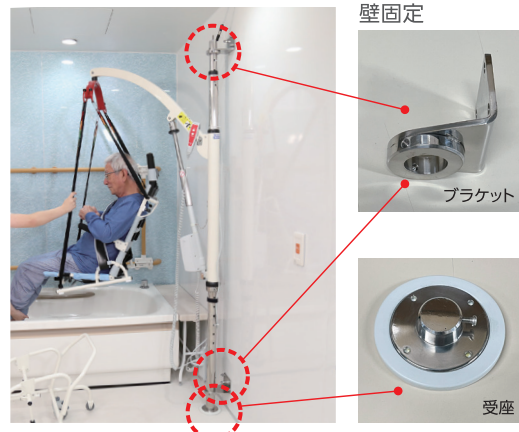


壁固定

ブラケット

受座

脱衣場から、洗い場・浴槽まで

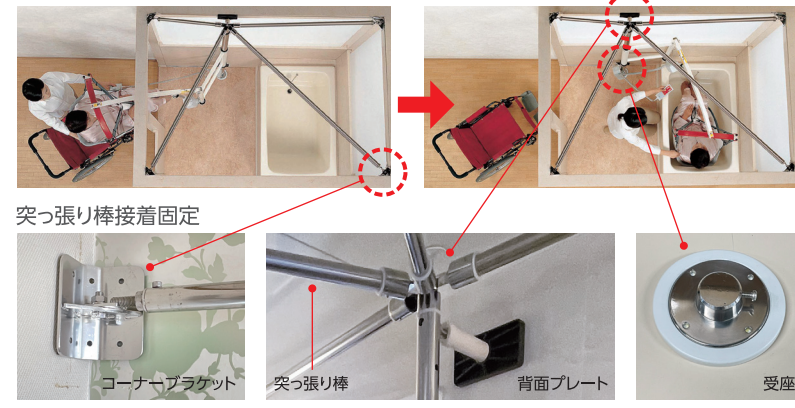

突っ張り棒接着固定

コーナブラケット

突っ張り棒

背面プレート

受座

耐荷重
120kg
※2

介護リフト付きホーロー浴槽

OCTBATH

置くだけのオクトバス／給排水工事不要※1／電源工事不要

紹介動画




外観寸法



※1 給湯、排水設備は必要です。 ※2 お湯を張った状態での耐荷重です。

OCTBATHの特徴

- お風呂でゆったり入浴を楽しみたい。介助者は一人でもOK。目線を合わせた優しい介助で会話が弾みます。
- 優れた熱伝導により浴槽全体で体を温められる心地よさは抜群です。表面はコインで削っても傷が付かず湯垢やカビもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。
- ゆったり入浴できる1400×700mmの浴槽サイズにもかかわらず、内寸法1600×1600mmの浴室スペースでゆとりの入浴介助ができます。

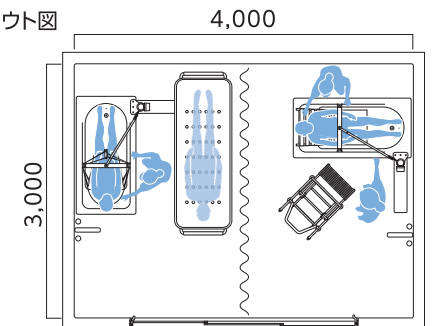レイアウト図
一例

リチウムイオンバッテリー搭載

IPX6の防水リチウムイオンバッテリー搭載で煩わしい充電コードはありません。管理が簡単で、充電を忘れてもバッテリー寿命は変わりません。鉛バッテリーと比較すると、軽量で長寿命。性能は当社製品比較で2倍です。



チャージャー

コントローラー

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【一式】	無料点検付き	¥2,310,000(税込)
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Aセット】	無料点検付き 安楽キャリーAAタイプ+スリング2枚セット	¥2,475,000(税込)
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Bセット】	無料点検付き 安楽キャリーBタイプ+スリング2枚セット	¥2,530,000(税込)

※無料点検付き:リフト動作、吊り具、浴槽設置状況のチェック、使用方法の確認(研修) 6年(1回/年)

つるべーSセット
Swing Lift CoCoRo

壁に収納することでリフトの置き場の問題を解消し、お部屋の雰囲気やを和らげます。

介護リフト つるべーSセット Swing Lift CoCoRo	¥487,000(非課税)
支柱のみ	¥113,700(税込)


※価格には家具類、吊り具、取付工事費は含まれておりません。

本品は株式会社モリトとグッドタイムリビング株式会社の共同開発製品です。

耐荷重
100kg

乗りごこち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

安楽キャリー

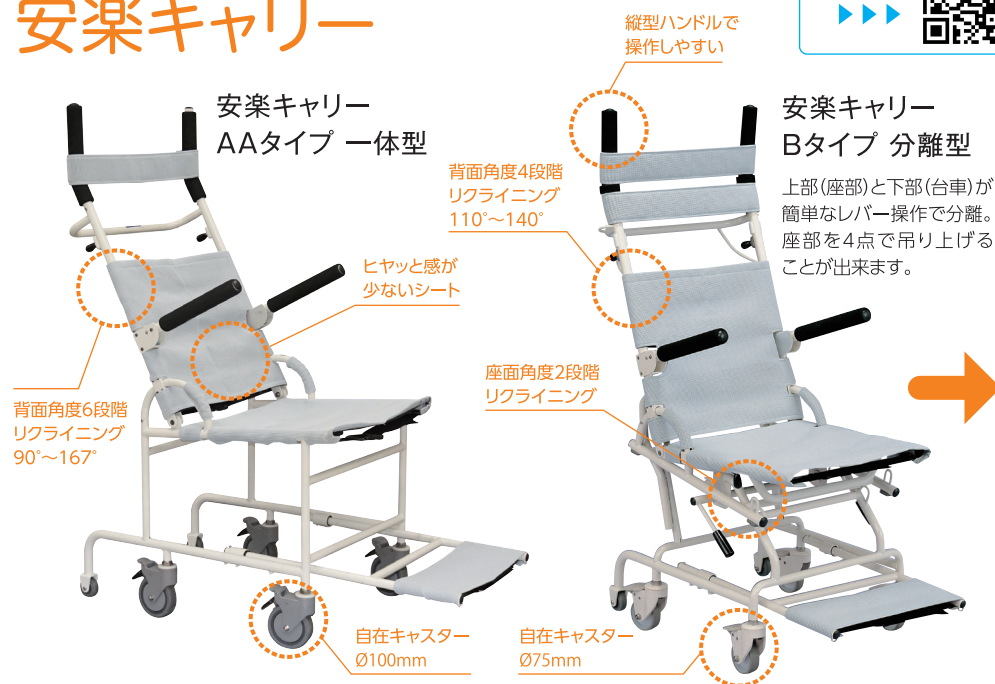


上部座部と下部台車が分離。リフトの吊り具として使用可能。※ツルベルトは同梱されます。

安楽キャリーの特徴

- シートの張りを変えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能のため小スペースでの使用も難なく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー(オプション)を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。




安心のフラット姿勢(AAタイプ)

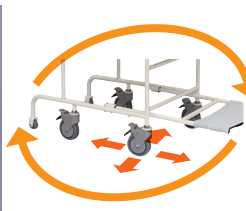補助ベルトの調整で
洗髪姿勢が容易にとれます

自由に動けます

安楽キャリーBタイプ
穴あき座面付※穴あき座面付には、オプション
延長バー(150mm/200mm)は
使用できません。

延長バー使用時

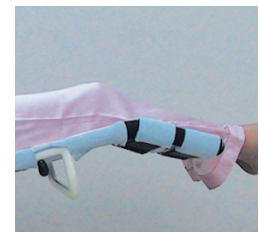

安楽キャリー専用オプション・買い替え可能消耗品

安全ベルト(大:1100mm/小:960mm) ¥4,620(税込)

左右の体幹バランスの不安定な方は、安全ベルトを必ずご使用ください。

背面シート(AA/B用) ¥8,250(税込)

座面シート(AA/B用) ¥8,250(税込)

補助ベルト(1本 AA/B用) ¥2,640(税込)

延長バー(2本組 150mm/200mm) ¥7,150(税込)

※穴あき座面付は使用不可

フットレストシート ¥6,600(税込)

ネックサポート(AA/B用) ¥6,820(税込)

安楽キャリーBタイプ用ツルベルト(ラダータイプ) 4本組 ¥10,560(税込)

シートカバー(AA/B用) ¥3,850(税込)

フレームRカバー ¥3,850(税込)

穴あき座面用背面シート(B用)
¥10,780(税込)

穴あき座面(AA/B用) ¥21,120(税込)



※キャスターとアームレスト黒スポンジの買い替えにつきましては、お問合せください。

装着のしやすさと快適な乗り心地を追求した

スリング エヴァ／パオ



エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままで着脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水抜きが容易にできます。



エヴァ ハーフ

首や体幹の支持力が比較的高い
方に使用します。

エヴァ フル

首や体幹の支持力が比較的低い
方に使用します。頸部保持機能に
よって過屈曲を抑制。

エヴァ ネックサポート

エヴァハーフを使用されていて、
首や体幹の支持力が比較的低く
なってきた場合に使用します。


※写真はエヴァ ハーフ、エヴァ フル中でカラーはホワイト、小はライトグレーとなります。

エヴァハーフ 小 (EVE220)	目安身長:135~150cmくらい	¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税)
エヴァハーフ 中 (EVE210)	目安身長:150~190cmくらい	¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税)
エヴァフル 小 (EVE250)	目安身長:135~150cmくらい	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)
エヴァフル 中 (EVE240)	目安身長:150~190cmくらい	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)
エヴァネックサポート (EVE260)	30×19.5cm	¥14,300(税込) / ¥13,000(非課税)




パオの特徴

- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能で床ずれ予防効果があります。
- ツルベルトが外せるため移乗後邪魔になりにくいです。

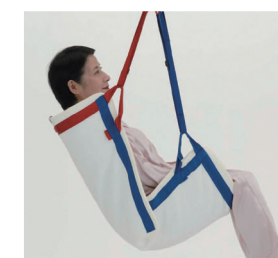

パオ ハーフ

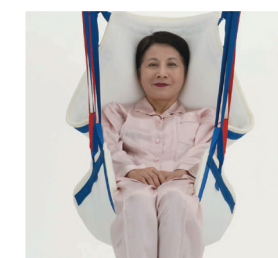首や体幹の支持力が
比較的高い方に
使用します。

パオ フル

比較的低首の据わりの
悪い方に使用します。

パオ ハーフ (PAO100) 70×100cm	目安身長:~180cmくらい	¥51,700(税込) / ¥47,000(非課税)
パオ フル (PAO120) 70×130cm	目安身長:~175cmくらい	¥63,800(税込) / ¥58,000(非課税)
パオ ロング (PAO130) 70×150cm	目安身長:~190cmくらい	¥67,100(税込) / ¥61,000(非課税)

パオメッシュの特徴

- 編み目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも適用可能です。



パオメッシュブルー ハーフ



パオメッシュブルー フル



パオメッシュグレー フル

パオメッシュブルー ハーフ (PAO140) 70×100cm	目安身長: ~180cmくらい	¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税)
パオメッシュブルー フル (PAO150) 70×140cm	目安身長: ~175cmくらい	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)
パオメッシュグレー フル 小 (PAO350)	目安身長:135~150cmくらい	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)
パオメッシュグレー フル 中 (PAO340)	目安身長:150~190cmくらい	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)

休足スリング

- 水平状態でも楽に移乗できます。
- 尖足(せんそく)の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。

※スリングパオと併用して
使用ください。

休足スリング (PAO160) 40×30cm	¥20,900(税込) / ¥19,000(非課税)
-------------------------	----------------------------



※スリングはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1枚が非課税になります。

耐荷重
100kg

自立化支援と重度化防止を目的とした

スリング ハーネス



ハーネスハイブリッド 対象者:軽度～重度者向け

大腿部を覆うタイプで多くの免荷重を必要とする方にも使用できます。座骨支持ベルトの採用で足の振出しをサポートします。そけい部への圧迫がなく快適な装着感が得られます。

HV-100(SS)	ウエストサイズ: 約55～65cm	¥63,800(税込) ／¥58,000(非課税)
HV-110(S)	ウエストサイズ: 約65～75cm	
HV-120(M)	ウエストサイズ: 約75～90cm	
HV-130(L)	ウエストサイズ: 約90～100cm	
HV-140(LL)	ウエストサイズ: 約100～110cm	



ハーネスライト 対象者:軽度～中度者向け

クロッチベルトをそけい部に通すタイプで装着はとても簡単です。車いすに座った状態でも着脱が容易に行えます。クロッチベルトは脱着性と装着感の良い材質を採用しています。

L-110(S)	腸骨周りサイズ: 約72～86cm	¥50,600(税込) ／¥46,000(非課税)
L-120(M)	腸骨周りサイズ: 約86～100cm	
L-130(L)	腸骨周りサイズ: 約100～114cm	



ハーネススーパーライト 対象者:軽度者向け

※POPOでは使用できません。

懸架専用となり、転倒時のサポートとして使用します。ウエストに巻くだけのシンプル装着、後方2本ベルトは歩行の視界を妨げません。免荷機能としてはご使用頂けません。

SL-110(S)	ウエストサイズ: 約53～65cm	¥38,500(税込) ／¥35,000(非課税)
SL-120(M)	ウエストサイズ: 約68～88cm	
SL-130(L)	ウエストサイズ: 約88～105cm	



ハーネスベスト(TSV)

※ハーネスベスト(TSV)は刈谷豊田総合病院・東分院(リハビリテーション科)との共同開発製品です。

体幹部分は、肩甲骨内転、胸椎伸展、腹圧補助機能を有し、ハーネスハイブリッドとの組合せでのBWSTTでは、安定した歩行と体幹伸展・動揺軽減効果が得られます。単独歩行での使用も可能です。

V-120(M)	¥63,800(税込)
V-130(L)	

耐荷重
120kg

歩けるスリング

ぶらん歩 四角／ぶらん歩 三角




ぶらん歩でゆらゆら揺れて気分転換

ぶらん歩の特徴

- ベッド周りをアクティブな生活空間に変える!
- 1日中ベッドと車椅子で長時間過ごされている方にとっても安全な座位移動が可能で、重度者の自立化支援の第一歩となります。

ぶらん歩 四角	¥47,300(税込)／¥43,000(非課税)
ぶらん歩 三角 S/M/L	¥47,300(税込)／¥43,000(非課税)


※ぶらん歩はリフトとセットで購入する場合はリフト1台に付き1枚が非課税になります。

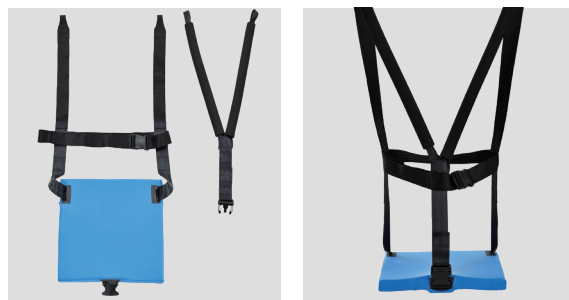

ぶらん歩 四角



ぶらん歩 三角

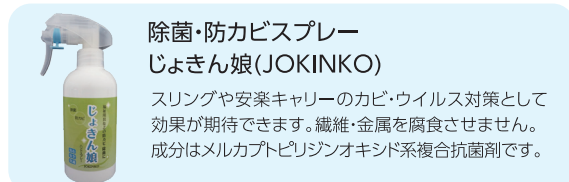除菌・防カビスプレー
じょきん娘(JOKINKO)

スリングや安楽キャリーのカビ・ウイルス対策として効果が期待できます。繊維・金属を腐食させません。成分はメルカプトピリジノキシド系複合抗菌剤です。

耐荷重
100kg

シートとボードとグローブで移動・移乗

移座えもん


紹介動画




移座えもんシートBLACK

介護保険レンタル対象

- 筒状に縫製され、キャタピラーのようにローリングしながら、少しの力だけでスライドし、移動・移乗を容易にします。
- ナイロンに特殊コーティングを施し、低コスト化を実現しました。
- 折りたためばポケットやハンドバックに入ります。

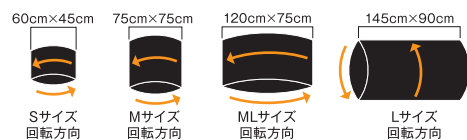

移座えもんシート S	45×60cm	¥2,750(税込)
移座えもんシート M	75×75cm	¥3,300(税込)
移座えもんシート ML	75×120cm	¥6,050(税込)
移座えもんシート L	145×90cm	¥8,250(税込)

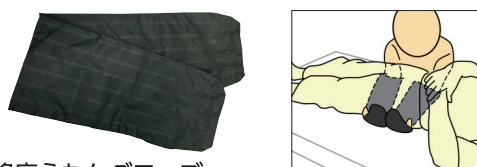


移座えもんグローブ

介護保険レンタル対象

- 手袋状に縫製され体の下に差し込むことで、ベッド上での左右の移動が簡単に出来ます。ナイロン製

移座えもんグローブの中では、手のひらを広げて使用してください。つかむ介助を防ぐことができ、またグローブが抜けにくくなります。

移座えもんグローブ(2枚入)	19×50cm	¥2,200(税込)
----------------	---------	------------

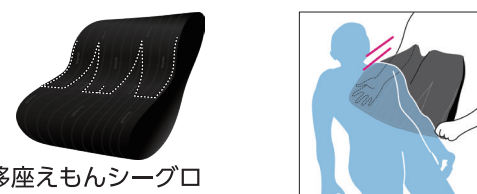

移座えもんシーグロ

介護保険レンタル対象

- 移座えもん「シート」と「グローブ」が一体化しました。手を入れるポケットが3ヶ所付いて使いやすくて便利です。

移座えもんシーグロ	75×70cm	¥4,400(税込)
-----------	---------	------------



移座えもんヒップベルト

- 移座えもんシートを使って、ベッド上の上方向移動をするときに、臀部に掛け、肘を伸ばして引くように使用します。
- 少ない力で腰を伸ばして使用できます。

移座えもんヒップベルト	¥13,200(税込)
-------------	-------------



移座えもんボードブルー


介護保険レンタル対象

- ヒップラインカットにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできるので、収納時コンパクトになります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗助に使用下さい。

移座えもんボードブルー	61.8×29cm	¥17,600(税込)
-------------	-----------	-------------

QRコードは胸デンソーウェーブの登録商標です。

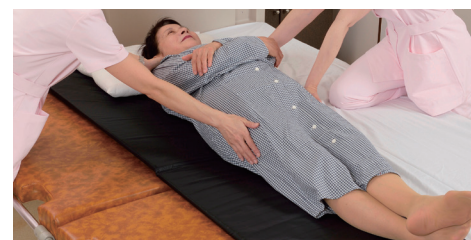

移座えもんローラ

介護保険レンタル対象

- ベッドからストレッチャー、リクライニング車いすへの移乗ができます。
- 2つ折りができるので持ち運びに便利です。

※隙間が15cm以下の移乗助に使用下さい。

移座えもんローラ1800	180×50×1.6cm 折畳み寸法 90cm	¥87,450(税込)
--------------	-------------------------	-------------

移座えもんローラ1000	100×50×1.6cm 折畳み寸法 50cm	¥55,000(税込)
--------------	-------------------------	-------------

移座えもんボードホワイト

介護保険レンタル対象

移座えもんシートと
移座えもんパッドを併用

- 1700gと超軽量。取り回し易く片手で操作できます。
- しなやかで、曲げにも強い性質を持っています。
- 洗浄消毒は、消毒用エタノール等をご使用下さい。
- 材質は硬質塩化ビニール低発泡板で、食品衛生法「器具」として適合。
- 防災2級に適合しています。熱変形温度63度。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗助に使用下さい。

移座えもんボードホワイト1000	45×100cm	¥19,800(税込)
------------------	----------	-------------

移座えもんボードホワイト800(脚部用ボード)	30×80cm	¥9,900(税込)
-------------------------	---------	------------

移座えもんパッド

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。



移座えもんパッド(延長ストラップ2本付)	50×100cm	¥19,800(税込)
----------------------	----------	-------------

介護リフト つるべー 価格一覧

2024年5月現在

商品名		旧小売価格	希望小売価格	税込価格	税
介護リフト つるべー F1セット	ステンレスアーム付	¥558,000	¥611,000		非課税
介護リフト つるべー F1セット(SKK)	ステンレスアーム付	¥624,000	¥684,000		非課税
介護リフト つるべー F2Rセット	ステンレスアーム付	¥619,000	¥678,000		非課税
介護リフト つるべー F2Rセット(SKK)	ステンレスアーム付	¥685,000	¥742,000		非課税
介護リフト つるべー Bセット	ステンレスアーム付	¥547,000	¥599,000		非課税
介護リフト つるべー BWセット(検定付) ステンレスアーム	ステンレスアーム付	¥747,000	¥819,000		非課税
介護リフト つるべー BBセット	ステンレスアーム付	¥580,000	¥580,000		非課税
介護リフト つるべー BBWセット(検定付) ステンレスアーム	ステンレスアーム付	¥780,000	¥800,000		非課税
介護リフト つるべー G2Rセット	ステンレスアーム付	¥469,000	¥513,000		非課税
介護リフト つるべー U1セット	ステンレスアーム付	¥546,000	¥598,000		非課税
介護リフト つるべー U2Rセット	ステンレスアーム付	¥603,000	¥661,000		非課税
介護リフト つるべー Y6セット		¥517,000	¥568,000		非課税
介護リフト つるべー Y6Wセット(検定付)		¥717,000	¥788,000		非課税
介護リフト つるべー Y6Tセット	手すり付	¥615,000	¥666,000		非課税
介護リフト つるべー Y6TWセット(検定付)	手すり付	¥815,000	¥886,000		非課税
介護リフト つるべー Y4セット		¥480,000	¥528,000		非課税
介護リフト つるべー Y4Wセット(検定付)		¥680,000	¥748,000		非課税
介護リフト つるべー Y4Tセット	手すり付	¥578,000	¥626,000		非課税
介護リフト つるべー Y4TWセット(検定付)	手すり付	¥778,000	¥846,000		非課税
介護リフト つるべー Y6セット Li-PINK		¥598,000	¥657,000		非課税
介護リフト つるべー Y6Wセット(検定付) Li-PINK		¥798,000	¥877,000		非課税
介護リフト つるべー Y6Tセット Li-PINK	手すり付	¥696,000	¥755,000		非課税
介護リフト つるべー Y6TWセット Li-PINK (検定付)	手すり付	¥896,000	¥975,000		非課税
介護リフト つるべー Y6 Li-PINK safety robo		¥748,000	¥748,000		非課税
介護リフト つるべー Y4セット Li-PINK		¥565,000	¥621,000		非課税
介護リフト つるべー Y4Wセット(検定付) Li-PINK		¥765,000	¥841,000		非課税
介護リフト つるべー Y4Tセット Li-PINK	手すり付	¥663,000	¥719,000		非課税
介護リフト つるべー Y4TWセット Li-PINK (検定付)	手すり付	¥863,000	¥939,000		非課税
介護リフトつるべー Y4・Y6セット 専用手すり		¥98,000	¥98,000	¥107,800	税込
車椅子用つるべーベルト(黒輪・金具付セット)		¥21,000	¥22,500	¥24,750	税込
Cセット用スリングシート ハーフ	PAO170	¥28,000	¥30,000	¥33,000	税込
Cセット用スリングシート フル	PAO180	¥28,000	¥30,000	¥33,000	税込
車搭載型介護リフト V-LIFT		¥620,000	¥680,000		非課税
リフト用デジタル体重計(検定付)	MHS2600	¥200,000	¥220,000	¥242,000	税込
リチウムイオン電池	バッテリー BAL50D D	¥38,000	¥41,000	¥45,100	税込
じょきん娘 トリガータイプ300mℓ		¥2,400	¥2,600	¥2,860	税込

製造発売元



MORITOH CORPORATION

株式会社 モリトー

■本

社/〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

お客様相談室
[24時間受付]
モリトーホームページ
Email
FAX (0586) 72-4555



0120-65-2525

<http://www.moritoh.co.jp>
info@moritoh.co.jp

