

# PP-Tread sw-1200

病院・施設

## リハビリテーション対応トレッドミル



- 0.2 km/h からの滑らかな初動
- 使いやすさを追求したデザイン
- 簡単な操作パネル
- 操作パネルは着脱可能で、首振り角度は 360 度自在
- DC3.0HP のハイパワーモーター採用
- 業務用で連続使用時間 2 時間、1 日 10 時間使用可能
- USB ポート付 (モバイル充電用)



手すりは着脱可能、高さ調整 3 段階 (900, 990, 1080mm) ▶  
※手すりは別途購入品となります。

専用ハーネス



ハーネスハイブリッド (HV) ¥58,000 (税別)  
■サイズ/SS・S・M・L

型番	サイズ	メッシュ素材を使用しているため、通気性が良くムシにくくなっています。また、過度な伸縮素材により身体にフィットしやすくなっています。坐骨支持機構の採用により脚の振り出しをアシストし歩行しやすくなっています。装着はウエスト部、大腿部に巻き付ける方式のため、免荷時のそけい部への違和感はありません。
HV-100	SS	
HV-110	S	
HV-120	M	
HV-130	L	
HV-140	LL	



ハーネススーパーライト ¥35,000 (税別)  
■サイズ/S・M・L

型番	サイズ	とても簡便なハーネスです。免荷機能は無く、転倒予防として装着します。免荷時のベルトは後方装着のため、歩行の妨げにもなりません。
SL-100	S	
SL-120	M	
SL-130	L	



ハーネスライト ¥46,000 (税別)  
■サイズ/S・M・L

型番	サイズ	ハーネスライトは、車いすに座った状態で着脱が容易にできます。クロッチベルト (股ベルト) は伸縮素材で且つ、滑りやすい材質となっていますので免荷時でも違和感が少なく歩行できます。
L-110	S	
L-110	M	
L-120	L	

オプション



ハーネスベスト (TSV) ¥58,000 (税別)  
■サイズ/M・L

型番	サイズ	専用ハーネスと組み合わせて使用することにより、体幹支持機能を補助し歩行時の動揺を軽減することが可能です。また、平地歩行訓練をはじめ様々な訓練時に単体で使用可能であり、背部の転倒予防ストラップが安全な歩行訓練をサポートします。
V-120	M	
V-130	L	


TSV (Trunk Support Vest)  
ハーネスベスト (TSV) は刈谷豊田総合病院・東分院 (リハビリテーション科) との共同開発商品です。

### 製品仕様 PP-Tread SW1200

AC100V 15A 50/60Hz  
※常時 1500W 供給可能な単独アース付きコンセント  
速度 : 0.2~6.4km/h  
計器表示 : 速度 / 距離 / 消費カロリー / ステップ数  
最大使用体重 : 182kg  
本体サイズ : 約幅 740×長さ 1600×歩行面高 120mm  
本体重量 : 約 60kg 手すり重量約 16.5kg  
非常停止 : 安全キー搭載

希望小売価格  
本体 PP-Tread (手すり無し) ¥650,000 (税別)  
手すり ¥150,000 (税別)

### 製品寸法 (mm) 手すり高さ 900・990・1080

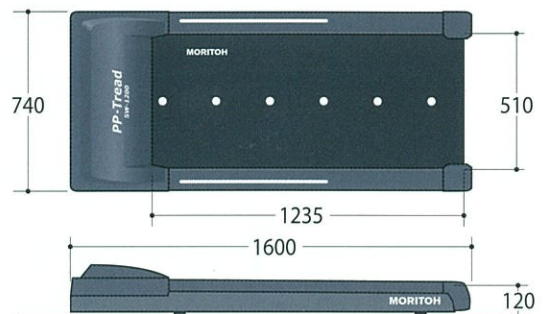

MORITOH CORPORATION 株式会社 **モリト** お客様相談室 0120-65-2525

[ホームページ] <http://www.moritoh.co.jp> [Eメール] [info@moritoh.co.jp](mailto:info@moritoh.co.jp)

■本社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町 3-36 TEL: 0586-71-6151 FAX: 0586-72-4555

■営業所 / 札幌 / 仙台 / 東京 / 埼玉 / 中部 / 大阪 / 岡山 / 福岡

お求めは