



モリトー 介護リフトつるべー 製品仕様

■ つるべー標準仕様

昇降速度 上昇(850mmアーム)	31.7mm/sec
昇降速度 下降(850mmアーム)	37.1mm/sec
耐荷重	100kg
上下ストローク(700/850/950mmアーム)	955/1160/1300mm
ハンガーフック間距離(外寸法)*1	500(560)mm
材質	スチール・ステンレス(SUS304)

*1 ハンガーフック間距離は、オプション(別売)にて、380と430mm仕様があります

■ つるべーY4・Y6セット仕様

昇降速度 上昇	36.3mm/sec
昇降速度 下降	37.2mm/sec
耐荷重	120kg
材質	スチール

■ オクトバス浴槽仕様

サイズ	(外寸法)	1400×700×550mm
	(内寸法)	1280×570×470mm
容量	満水265ℓ	
本体重量	110kg	

■ つるべー電装品仕様

品目	形式	入力電源	出力電源	重量	コード長さ	防水性能	定格	備考
モーター	LA32	24V	-	3.4kg	0.4mコイル	IPX6	10%	6000N/最大電流値6A
スイッチ	HB31	24V	-	0.26kg	0.6mコイル	IPX6	-	-
コントローラー	CB08	100V	24VDC	1.4kg	5.1mストレート	IPX6	5%	AC電源設定のみ
コントローラー	CB12	100V	24VDC	3.5kg	3.2mストレート	IPX6	10%	バッテリー内蔵型
Y4・Y6専用モーター	LA34	24V	-	4.2kg	0.4(0.2)mコイル	IPX6	10%	10000N
Y4・Y6専用コントローラー	CBJ2	100V	24VDC	0.54kg	-	IPX4	10%	バッテリー残量表示
Y4・Y6専用バッテリーパック	BAJ1	-	24VDC	2.7kg	-	IPX4	-	-
Sセットモーター	LA34	24V	-	3.83kg	0.4mコイル	IPX6	10%	10000N
Sセットスイッチ	HB31	24V	-	0.26kg	0.4mコイル	IPX6	-	-
Sセットコントローラー	CB12	100V	24VDC	2.33kg	3.2m	IPX6	10%	-
リチウムイオン電池	BAL50	29.4V	25.2VDC	0.9kg	-	IPX6	-	-

■ オクトバス電装品仕様

品目	型式	出力電源	入力電源	防水性能	備考
モーター	LA34	-	24V	IPX6	10000N
スイッチ	HB31	-	24V	IPX6	
チャージャー	CHL50	29.4VDC	100V	IPX4	
バッテリー	BAL50	25.2VDC	29.4V	IPX6	
コントローラー	COL50	24VDC	25.2VDC	IPX6	

■ つるべーCセット Nリフト電装品仕様

品目	入力電源	重量	防水性能	定格	備考	バッテリータイプ	
						(CB12)小型シール蓄電池 NP1.2-12,12V, 1.2Ahを2台使用	(CBJ2)小型シール蓄電池 ES2.9-12,12V, 2.9Ahを2台使用
モーター	24V	3.4kg	IPX1	10%	6000N/最大電流値6A		
コントローラー	100V	3.5kg	IPX6	10%	バッテリー内蔵型		
スイッチ	24V	-	-	-	-		

■ つるべーCセット Nリフト仕様

上下ストローク	525mm
耐荷重	100kg
モーターアームセット重さ	5.4kg
ボックスアーム重さ	4.5kg
材質	アルミ


■ つるべーTEN仕様

走行方式	C450 手動走行 C625 電動走行
本体重量	10kg
積載重量	204kg
昇降ストローク	2030mm
走行速度	2・4・6・8m/分(電動走行)
昇降速度	45mm/秒
動力電源	DC24V(バッテリー搭載)
充電器入力	AC100-120V 1.0A
充電器出力	DC24V 1.5A
充電方法	レールの端で自動充電
バッテリー	12V5.0A×2個 密閉型鉛蓄電池
バッテリー残量表示	液晶/LED(赤)警告アラーム
操作方法	上下押し続けボタン方式
ペンダントスイッチ	空気圧式
赤外線リモコン	○
ストラップ緩み検知	○
過速度検知	○
スロースタート・ストップ	○
オートリターン機構	○
節約モード	○
乱巻き防止	○
緊急降下装置	○ (電動と手動があり)
緊急停止装置	○

●コントローラーの全タイプに過負荷保護回路を設定。過負荷でモーター電源を遮断

●コントローラーのバッテリータイプには、バッテリー残量警報を設定。残量50%でアラーム音作動

●コントローラーの全タイプのトランス内にヒューズの設置。1次側電源ヒューズ 2A

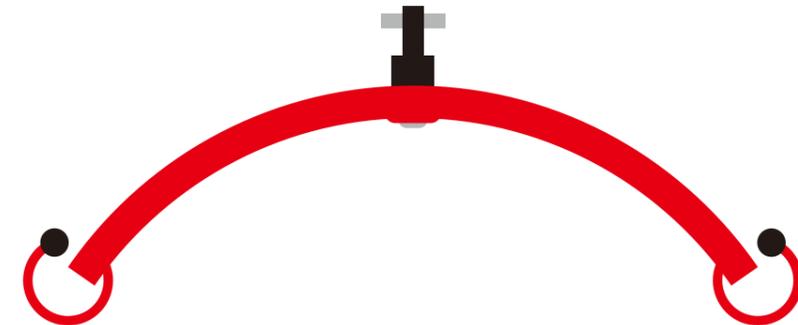

NURSING LIFT

介護リフト

つるべー
TSURUBE
LINEUP

製造発売元



■本社 社/〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

- | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ■札幌営業所/〒063-0870 | 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101 | TEL(011)708-5200 FAX(011)708-5201 |
| ■仙台営業所/〒981-1102 | 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22 | TEL(022)302-7914 FAX(0586)72-4555 |
| ■埼玉営業所/〒336-0025 | 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103 | TEL(048)753-9393 FAX(03)3777-1649 |
| ■東京営業所/〒143-0025 | 東京都大田区南馬込4-16-3 | TEL(03)3777-1648 FAX(03)3777-1649 |
| ■中部営業所/〒491-0074 | 愛知県一宮市東島町3-36 | TEL(0586)71-6151 FAX(0586)72-4555 |
| ■大阪営業所/〒577-0016 | 大阪府東大阪市長西2-6-2 寺西コンパクトオフィスB号 | TEL(06)6785-7202 FAX(06)6785-7203 |
| ■岡山営業所/〒700-0954 | 岡山県岡山市南区米倉30-102 | TEL(086)259-2910 FAX(0586)72-4555 |
| ■福岡営業所/〒811-1204 | 福岡県那珂川市片縄東1-12-1 | TEL(092)953-1892 FAX(092)953-1973 |
| ■信濃大町
研修センター | 長野県大町市大字平22393 | TEL(0261)23-1678 |

※取付け工費が別途必要です。機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承願います。

お客様相談室

[24時間受付]

モリトーホームページ

Email

FAX(0586)72-4555

☎ 0120-65-2525

http://www.moritoh.co.jp

info@moritoh.co.jp



販売店



ベッドの重さを利用したベッド設置式介護リフト

つるべー B・BBセット

様々な介護ベッドに使用できるよう長さ・幅の調整が可能。



Bセット、BWセットの特徴

■ Wは体重計付きです

- 支柱の設置位置は環境に合わせて、ベッドの頭側の左右、足側の左右の4か所から選べます。
- 360度回転。掃き出し窓から外の車椅子へ乗り換えなど、レイアウトで様々な使用ができます。

BBセット、BBWセットの特徴

■ Wは体重計付きです

- キャスター付ベッドへ設置してもベッド移動が可能。頻りにベッドを動かす方やベッド緊急搬送時にも支障がなく、病院・施設でも導入されています。
- ハーネスを使用することで、背面開放の端座位をとったり、立位姿勢・立位移乗が可能。自立化を大きくサポートします。
- 関節付アームのため、可動範囲が広がり、着座位置などの微調整が可能です。



360度回転アーム
置き場所で様々な使い方が可能になります。
[Bセット]



関節付きアーム
可動域が広がります。
[BBセット]



つるべー Bセット



つるべー BBセット

吊具

ハーネス

- ハーネスハイブリッド
- ハーネスライト

▶詳しくはP8をご覧ください



スリング パオ

- ベッド専用シートフル
- ベッド専用シートハーフ

▶詳しくはP7をご覧ください

※ご入浴にはパオフル、パオハーフはご使用いただけません。



スリング エヴァ

- 脚分離タイプフル
- 脚分離タイプハーフ

▶詳しくはP8をご覧ください



介護保険購入対象品


足元の開放と、旋回性の向上を追求した床走行式リフト

つるべー Y4・Y6セット


小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます。



つるべー Y6セット Li-PINK

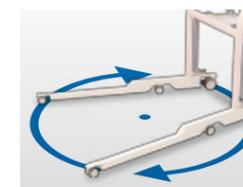

6輪キャスターで
軽々自在に小回り回転

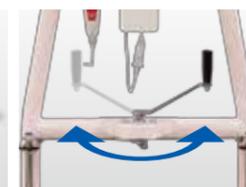

脚部は片手で軽く
2秒で開閉



広い
開放空間
身体を引きずらず
自然な動きで吊上げます



脚部の開放により、リクライニング車椅子でも正面からアプローチできます。また、床からの移乗にも適しています。

Y6セット、Y6Wセット Li-PINKの特徴

■ Wは体重計付きです

- 低床ベッドに対応した床走行式リフト。リチウムイオン電池を搭載することにより

- バッテリー軽量化
- 寿命UP
- 充電忘れによる劣化がしにくい
- 充電時間が大幅短縮 など

性能が大幅にアップしました。

新商品



Y6セット、Y6Wセットの特徴

■ Wは体重計付きです

- 低床ベッドに対応した床走行式リフト。6輪自在キャスターによりその場での旋回が可能。狭いお部屋での取り回しが楽です。



つるべー Y6セット

リフト用デジタル体重計 MHS-2600

検定付



つるべーに乗ったまま体重測定が可能。体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。BMI(体格指数)機能があり、栄養管理にも使用されています。

- 最小単位/100g
- 電源/アルカリ単4乾電池6本
- 風袋除去機能付き


※B・BBセット、Y4・Y6セット、TENIにお付けできます。

リフト用デジタル体重計 MHS-2600 (検定付) ¥198,000 (税込) 2022年9月~ ¥220,000 (税込)

Y4セット、Y4Wセットの特徴

■ Wは体重計付きです

- 床材の影響を受けにくい大きい(75φ)前輪キャスターを採用しているため、前進・後進がとてもスムーズ。軽く移動が行えます。

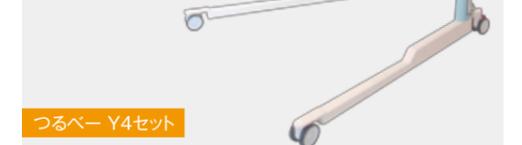

つるべー Y4セット

自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト

つるべー F1・F2Rセット

ユニットバスにも設置できます。

F1セットとF2Rセットの違い

紹介動画



外観寸法



つるべー F1セット

つるべー F2Rセット



壁固定

脱衣場から、洗い場・浴槽まで



壁固定と工事いらずの突っ張り棒固定式、様々な設置方法があり、お風呂・トイレ以外への設置も可能なリフトです。

F1セット、F1SKKセットの特徴

- コンパクトで収納性もよく、1関節アーム式なので着座位置が固定され、操作が簡単です。

F2Rセット、F2RSKKセットの特徴

- 2関節アーム式なので、関節を曲げたり、伸ばしたりすることで可動範囲が広がります。脱衣場からの移乗も可能です。



つるべー F2Rセット



突っ張り棒固定

安楽キャリー

乗りごこち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

耐荷重
100kg



AAタイプ
一体型

Bタイプ
分離型

▶詳しくはP9をご覧ください

吊具

介護保険購入対象品

スリング パオ

- ベッド専用シート フル
- ベッド専用シート ハーフ
- メッシュブルー フル
- メッシュブルー ハーフ
- メッシュグレー フル

※ご入浴にはパオフル、パオハーフはご使用いただけません。



スリング エヴァ

- 脚分離タイプ フル
- 脚分離タイプ ハーフ

▶詳しくはP8をご覧ください



介護リフト付きホーロー浴槽

OCTBATH

置くだけのアウトバス／給排水工事不要*1／電源工事不要

外観寸法




*1 給湯、排水設備は必要です。 *2 お湯を張った状態での耐荷重です。



OCTBATHの特徴

- お風呂でゆったり入浴を楽しみたい。介助者は一人でもOK。目線を合わせた優しい介助で会話も弾みます。
- 優れた熱伝導により浴槽全体で体を温められる心地よさは抜群です。表面はコインで削っても傷が付き、湯垢やカビもさっと拭きただけでお手入れが簡単です。
- ゆったり入浴できる1400×700mmの浴槽サイズにもかかわらず、内寸法1600×1600mmの浴室スペースでゆとりの入浴介助ができます。

レイアウト図一例 4,000

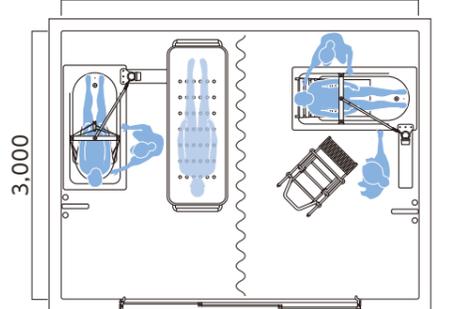

バッテリー

チャージャー

リチウムイオンバッテリー搭載

IPX6の防水リチウムイオンバッテリー搭載で煩わしい充電コードはありません。管理が簡単で、充電を忘れてもバッテリー寿命は変わりません。鉛バッテリーと比較すると、軽量で、長寿命。性能は当社製品比較で2倍です。

コントローラー

つるべーSセット Swing Lift CoCoRo

壁に収納することでリフトの置き場の問題を解消し、

お部屋の雰囲気やを和らげます。



耐荷重
100kg

介護リフト つるべーSセット Swing Lift CoCoRo	¥487,000 (非課税)
支柱のみ	¥113,700 (税込)

※価格には家具類、吊り具、取付工事費は含まれておりません。

本品は株式会社モリトーとグッドタイムリビング株式会社の共同開発製品です。

つるべシリーズで最もコンパクトなリフト

つるべー G1・G2Rセット U1・U2Rセット

自宅の玄関が階段でも楽に外へ出ることが可能です。



つるべー G2Rセット



G1セットの特徴

- 玄関、お風呂、トイレ、居室など様々な場所の壁に設置できます。

G2Rセットの特徴

- G1セットに200mmの関節を追加したリフト。可動範囲が増え、曲がり階段の段差解消にも使用しています。

U1セットの特徴

- 床面で固定するリフト。壁に固定できない環境にお勧めです。支柱高1100、1350、1600mmの3種から最適な高さで設置できます。

U2Rセットの特徴

- U1セットに関節(300mm・400mm)を追加したリフト。

車椅子用ツルベルトセットの特徴

- 車椅子に専用金具を付けて、車椅子に乗ったまま、リフトアップします。



つるべー G1セット



つるべー U1セット



車椅子用ツルベルトセット



▲車椅子用ツルベルトセット使用可能車椅子の条件

吊具

ハーネス

- ハーネスハイブリッド
- ハーネスライト

▶詳しくはP8をご覧ください



スリング パオ

- ベッド専用シートフル
- ベッド専用シートハーフ

▶詳しくはP7をご覧ください

※ご入浴にはパオフル、パオハーフはご使用いただけません。



スリング エヴァ

- 脚分離タイプフル
- 脚分離タイプハーフ

▶詳しくはP8をご覧ください



介護保険購入対象品

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト

つるべー TEN

レールの長さで移動範囲のニーズに対応できます。



設置式(XY型)

設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。

据置式の特徴

- 工事のない仕様や壁面固定の後施工も可能。据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がございます。



スプリングハンガーを使用したSSシリーズも設置可能です。



据置式(2ポスト)



C-450(手動走行) / C-625(電動走行)

コンパクトな高性能レール走行リフト

- 操作性の良い防滴ハンドスイッチ。
- バッテリー残量やリフトの状態を見やすい液晶ディスプレイ。
- 安全・安心設計

オープン価格 無線リモコンタイプもございます。

楽しいカーライフを満喫できる車搭載型介護リフト

つるべー Cセット N-Lift / V-Lift

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。



つるべー Cセット V-Lift



Cセットの特徴

- クルマのシートに座れるため安全で、介助者の目も行き届きます。
- 助手席、後部2列目席のどのシートにも移乗可能で、座る場所が限定されません。
- 女性でも簡単に着脱可能で、コンパクトに収納できます。
- 走行時は取り外しておくことで邪魔になりません。



後部座席移乗イメージ



V-Lift 取付イメージ

V-Lift カバー



つるべー Cセット N-Lift



N-Lift 着脱イメージ



N-Lift 収納イメージ

N-LiftはHONDAとの共同開発製品です。

着脱の手間をなくした画期的なスリングシート

スリングシート パオ

紹介動画



ベッド専用シート パオ ハーフ
首や体幹の支持力が比較的しっかりした方に使用します。

ベッド専用シート パオ フル
比較的首の据わりの悪い方に使用します。

ベッド専用シートパオの特徴

- 通気性と体圧分散機能により、床ずれ予防効果があります。耐熱性にすぐれ、オートクレーブ滅菌が可能です。
- 着脱が簡単なので、どなたでもすぐに扱えます。
- 吊り紐が外せるので車いす、またはベッドに移乗後、そのまま敷きっぱなしでご使用頂けます。


パオ ハーフ (PAO100) 70×100cm	目安身長: ~180cmくらい	¥47,300(税込) / ¥43,000(非課税)
パオ フル (PAO120) 70×130cm	目安身長: ~175cmくらい	¥58,300(税込) / ¥53,000(非課税)
パオ ロング (PAO130) 70×150cm	目安身長: ~190cmくらい	¥61,600(税込) / ¥56,000(非課税)

パオメッシュの特徴

- 入浴用としてのほか、ベッド・車いすでも使用できます。
- シートタイプのため、浮力によるお尻のずり落ちの危険がありません。
- 水はけがよく乗り心地が快適です。
- グレーは、吊り上げと同時に着座姿勢に変換。頸部枕は身長に合わせて調整が可能で、頸部保持機能により過屈曲を抑制。



パオメッシュブルー ハーフ (PAO140) 70×100cm	目安身長: ~180cmくらい	¥42,900(税込) / ¥39,000(非課税)
パオメッシュブルー フル (PAO150) 70×140cm	目安身長: ~175cmくらい	¥52,800(税込) / ¥48,000(非課税)
パオメッシュグレー フル 小 (PAO350)	目安身長: 135~150cmくらい	¥52,800(税込) / ¥48,000(非課税)
パオメッシュグレー フル 中 (PAO340)	目安身長: 150~190cmくらい	¥52,800(税込) / ¥48,000(非課税)

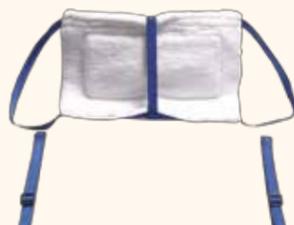

休足スリング

- 水平状態でも楽に吊り上げられます。
- 尖足(せんそく)の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。

※スリングパオと併用してご使用ください。

休足スリング (PAO160) 40×30cm	¥19,800(税込) / ¥18,000(非課税)
-------------------------	----------------------------

※スリングはリフトとセットで購入する場合は非課税になります。

角度調整自在のスリングシート。これからのスタンダード!

スリングシート エヴァ

紹介動画



エヴァ ハーフ

最もスタンダードなタイプで、首や体幹の支持力が比較的高い方に使用します。車椅子に座ったままでセットすることが出来ます。ストラップ長さ調整により、多様な角度設定が可能。サイドメッシュで入浴も快適。

エヴァ フル

首や体幹の支持力が比較的弱い方に使用します。車椅子に座ったままでセットすることが出来ます。吊り上げと同時に自動的に着座姿勢へと変換できます。頸部保持機能により過屈曲を抑制する構造です。

エヴァ ネックサポート

首や体幹の支持力が比較的弱い方に使用します。身長や吊り角度に応じてストラップの長さが調整出来ます。ストラップ止めの上下移動で頸部の角度をコントロール出来ます。

エヴァの特徴

- サイドメッシュの採用により、入浴時に吊具内にたまりやすい水のほけをよくしました。
- 脚部のストラップは無段階に調整可能で、細かな姿勢調整ができます。
- 生地の編み方により、柔らかく、肌触りをよくしています。

エヴァハーフ 小 (EVE220)	目安身長: 135~150cmくらい	¥42,900(税込) / ¥39,000(非課税)
エヴァハーフ 中 (EVE210)	目安身長: 150~190cmくらい	¥42,900(税込) / ¥39,000(非課税)
エヴァフル 小 (EVE250)	目安身長: 135~150cmくらい	¥52,800(税込) / ¥48,000(非課税)
エヴァフル 中 (EVE240)	目安身長: 150~190cmくらい	¥52,800(税込) / ¥48,000(非課税)
エヴァネックサポート (EVE260)	30×19.5cm	¥13,200(税込) / ¥12,000(非課税)

BBセットと使用して座位、立位の保持とその練習に

ハーネス



ハーネスハイブリッド

型番	サイズ	価格
HV-100	SS	¥63,800(税込) / ¥58,000円(非課税)
HV-110	S	
HV-120	M	
HV-130	L	
HV-140	LL	



ハーネスライト

ハーネスライトは車いすに座った状態で着脱が可能です。

型番	サイズ	価格
L-110	S	¥50,600(税込) / ¥46,000(非課税)
L-120	M	
L-130	L	

ハーネス適合サイズ一覧

サイズ	ハーネスハイブリッド
SS	ウエスト 約55~65cm
S	ウエスト 約65~75cm
M	ウエスト 約75~90cm
L	ウエスト 約90~100cm
LL	ウエスト 約100~110cm

サイズ	ハーネスライト
S	腸骨周り 約72~86cm
M	腸骨周り 約86~100cm
L	腸骨周り 約100~114cm

※サイズ表記目安数字となります。

歩けるスリング

ぶらん歩

ぶらん歩でゆらゆら揺れて気分転換

ぶらん歩の特徴

- ベッド周りをアクティブな生活空間に変える!
- 1日中ベッドと車椅子で長時間過ごされている方にとっても安全な座位移動が可能で、重度者の自立化支援の第一歩となります。

ぶらん歩 S/M/L	¥47,300(税込) / ¥43,000(非課税)
------------	----------------------------

紹介動画



※ぶらん歩はリフトとセットで購入する場合は非課税になります。

乗りごち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

安楽キャリー



上部座部と下部台車が分離。リフトの吊り具として使用可能。※ツルベルトは同梱されます。

安楽キャリーの特徴

- シートの張りを換えられるので体にフィットし、圧迫が軽減。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能のため小スペースでの使用も難しくなく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー(オプション)を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。



安楽キャリーAAタイプ(一体型)	¥148,500(税込)
安楽キャリーBタイプ(分離型)	¥221,100(税込) / ¥201,000(非課税)
安楽キャリーBタイプ(分離型)穴あき座面付	¥233,750(税込) / ¥212,500(非課税)

※Bタイプはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1台が非課税となります。(オプションは課税です)

安楽キャリーBタイプ 穴あき座面付


※穴あき座面付には、オプション延長バー(150mm/200mm)は使用できません。



延長バー使用時



安楽キャリー共通専用オプション

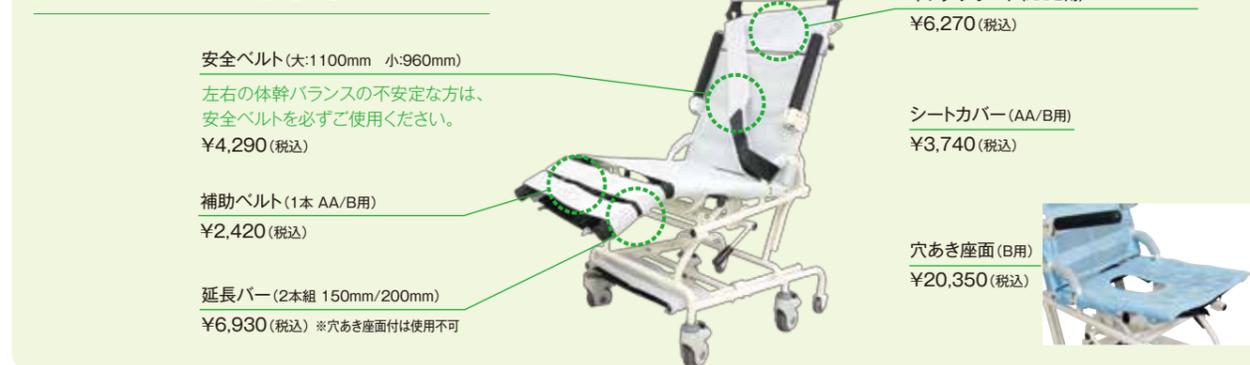


シートとボードとグローブで移動・移乗

移座えもん



移座えもんシートBLACK 介護保険レンタル対象

- 筒状に縫製され、キャタピラーのようにローリングしながら、少しの力でスライドし、移動・移乗を容易にします。
- ナイロンに特殊コーティングを施し、低コスト化を実現しました。
- 折りたたみばポケットやハンドバックに入ります。

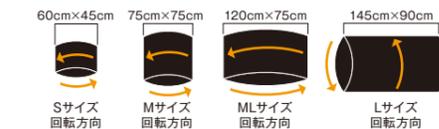

移座えもんシート S	45×60cm	¥2,750(税込)
移座えもんシート M	75×75cm	¥3,300(税込)
移座えもんシート ML	75×120cm	¥6,050(税込)
移座えもんシート L	145×90cm	¥8,250(税込)




移座えもんローラ 介護保険レンタル対象

- ベッドからストレッチャー、リクライニング車いすへの移乗ができます。
- 2つ折りができるので持ち運びに便利です。

※隙間が15cm以下の移乗介助にご使用下さい。

移座えもんローラ1800	180×50×1.6cm 折畳み寸法 90cm	¥87,450(税込)
移座えもんローラ1000	100×50×1.6cm 折畳み寸法 50cm	¥55,000(税込)

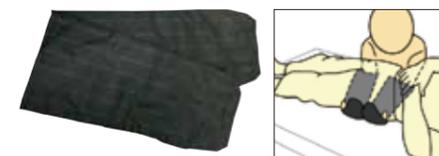

移座えもんグローブ 介護保険レンタル対象

- 手袋状に縫製され体の下に差し込むことで、ベッド上での左右の移動が簡単に出来ます。ナイロン製

移座えもんグローブ(2枚入)	19×50cm	¥2,200(税込)
----------------	---------	------------



移座えもんボードブルー 介護保険レンタル対象

- ヒップラインカットにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできるので、収納時コンパクトになります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助にご使用下さい。

移座えもんボードブルー 61.8×29cm 介護の技術を変えよう! DVD付き	¥17,600(税込)
--	-------------

移座えもんボードホワイト 介護保険レンタル対象

- 移座えもんシートと移座えもんパッドを併用
- 1700gと超軽量。取り回し易く片手で操作できます。
- しなやかで、曲げにも強い性質を持っています。
- 洗浄消毒は、消毒用エタノール等をご使用下さい。
- 材質は硬質塩化ビニール低発泡板で、食品衛生法「器具」として適合。
- 防災2級に適合しています。熱変形温度63度。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助にご使用下さい。

移座えもんボードホワイト1000 45×100cm	¥19,800(税込)
移座えもんボードホワイト800(脚部用ボード) 30×80cm	¥9,900(税込)

移座えもんパッド

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。

移座えもんパッド(延長ストラップ2本付) 50×100cm	¥19,800(税込)
-------------------------------	-------------

移座えもんヒップベルト

- 移座えもんシートを使って、ベッド上の上方向移動をするときに、臀部に掛け、肘を伸ばして引くように使用します。
- 少ない力で腰を伸ばして使用できます。

移座えもんヒップベルト	¥13,200(税込)
-------------	-------------

除菌・防カビスプレー じょきん娘(JOKINKO)

スリングや安楽キャリーのカビ・ウイルス対策として効果が期待できます。繊維・金属を腐食させません。成分はメルカプトピリジジオキソド系複合抗菌剤です。

じょきん娘 ¥2,640(税込)

DVD 介護の技術を変えよう!

市川、古田、松本の介護の技術を変えよう! 持ち上げない! 滑らせる!

介護の技術を変えよう! ¥5,500(税込)




介護リフト つるべー B・BB セット

介護リフト つるべー Bセット	¥547,000(非課税)	2022年9月価格改定
介護リフト つるべー 体重計付きBWセット	¥727,000(非課税)	¥747,000(非課税)
介護リフト つるべー BBセット	¥580,000(非課税)	
介護リフト つるべー 体重計付きBBWセット	¥760,000(非課税)	¥780,000(非課税)



介護リフト つるべー Y4・Y6 セット

介護リフト つるべー Y4セット	¥437,000(非課税)	¥480,000(非課税)
介護リフト つるべー 体重計付Y4Wセット	¥617,000(非課税)	¥680,000(非課税)
介護リフト つるべー Y6セット	¥470,000(非課税)	¥517,000(非課税)
介護リフト つるべー 体重計付Y6Wセット	¥650,000(非課税)	¥717,000(非課税)
介護リフト つるべー Y6セット Li-PINK	¥598,000(非課税)	
介護リフト つるべー 体重計付Y6Wセット Li-PINK	¥778,000(非課税)	¥798,000(非課税)
リチウムイオン電池	¥41,800(税込)	

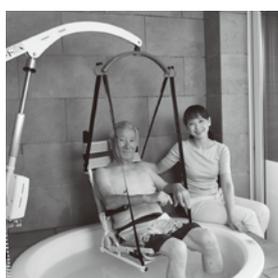

介護リフト つるべー F1・F2R セット

介護リフト つるべー F1セット	¥558,000～(非課税)
介護リフト つるべー F1SKKセット	¥624,000～(非課税)
介護リフト つるべー F2Rセット	¥619,000～(非課税)
介護リフト つるべー F2RSKKセット	¥685,000～(非課税)



介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【一式】 無料点検付き	¥2,310,000(税込)
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Aセット】 無料点検付き 安楽キャリーAAタイプ+スリング2枚セット	¥2,475,000(税込)
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Bセット】 無料点検付き 安楽キャリーBタイプ+スリング2枚セット	¥2,530,000(税込)

※無料点検付き:リフト動作、吊り具、浴槽設置状況のチェック、使用方法の確認(研修) 6年(1回/年)



介護リフト つるべー G1・G2R セット U1・U2R セット

介護リフト つるべー G1セット	¥418,000(非課税)
介護リフト つるべー G2Rセット	¥469,000(非課税)
介護リフト つるべー U1セット	¥546,000(非課税)
介護リフト つるべー U2Rセット	¥603,000(非課税)
車椅子用ツルベルトセット	¥23,100(税込)



介護リフト つるべー C セット N-Lift / V-Lift

介護リフト つるべー Cセット V-Lift (汎用車種対応タイプ) (取付費用別途) 専用スリングシート ハーフもしくはフルサイズ 1枚付属	¥620,000(非課税)
介護リフト つるべー Cセット N-Lift (車種限定タイプ) (取付費用別途) ※適応車種 HONDA N-BOX / N-BOX+(JF1/2/3/4) HONDA ステップワゴン (RP型-RK型) / ダイハツ TANTO (LA60) ※仕様によっては取付られないタイプがありますので、その都度お問い合わせください。	¥530,000(非課税)
専用スリングシート ハーフもしくはフルサイズ ※Cセットにはバオ・エヴァ・ハーネスはご使用いただけません。	¥30,800(税込)

