日常生活用具の給付とは？

障がいのある方や難病患者の方が、日常生活をより円滑に、自立して過ごせるよう、自治体が用具の購入費用を補助（給付）する制度です。

- 対象者： 重度の身体障がい・知的障がいのある方、または難病患者の方。
- 自己負担： 原則として費用の1割負担（所得に応じて上限額が設定されていたり、全額公費負担となる場合もあります）。
- 窓口： お住まいの市区町村の福祉事務所または障がい福祉課。

⚠️注意点 必ず「購入前」に申請が必要です。購入後の申請は認められないためご注意ください。

☆主な対象品（株式会社モリトー）

移動用リフト（介護リフトつるべーBB1セット、Yセット、Fセット）

入浴補助用具（安楽キャリーBタイプ・安楽キャリーAAタイプ）

MORITOH CORPORATION 株式会社モリトー

お客様相談室（24時間受付）0120-65-2525
モリトーHP https://www.moritoh.co.jp
email info@moritoh.co.jp

MORITOH_FINEKAIGO

本　　社	〒491-0074	愛知県一宮市東島町3-36	TEL(0586)71-6151 FAX(0586)72-4555
札幌営業所	〒063-0870	北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101	TEL(011)708-5200 FAX(011)708-5201
仙台営業所	〒981-1102	宮城県仙台市太白区袋原6-9-22	TEL(022)302-7914 FAX(0586)72-4555
埼玉営業所	〒336-0025	埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103	TEL(048)753-9393 FAX(03)5531-5550
中部営業所	〒491-0074	愛知県一宮市東島町3-36	TEL(0586)71-6151 FAX(0586)72-4555
大阪営業所	〒577-0016	大阪府東大阪市長田西2-6-2寺西ｺﾝﾊﾟｸﾄｵﾌｨｽB号	TEL(06)6785-7202 FAX(06)6785-7203
岡山営業所	〒700-0954	岡山県岡山市南区米倉30-102	TEL(086)259-2910 FAX(0586)72-4555
福岡営業所	〒811-1204	福岡県那珂川市片縄東1-12-1	TEL(092)953-1892 FAX(092)953-1973
東京有明ショールーム	〒135-0063	東京都江東区有明3-5-7有明ｲｰｽﾄﾀﾜｰ9階2号室	TEL(03)5531-5555 FAX(03)5531-5550
信濃大町研修センター	〒398-0001	長野県大町市大字22393	TEL(0261)23-1678

NURSING LIFT

介護リフトつるべー





MORITOH

「がんばりすぎない」という、深い愛情のかたち。

毎日のお着替えや、
今はまだ、その温かな重み
できているか

けれど、お子さまの
体重が15kg、20kg
パパやママ
少しずつ「がんばり」

私たちが〝リフト〟という選択肢
あなたが笑顔でお子さん
リフトは、あなたの代わりではなく

かけがえのないあなた
今から一緒に

大好きな入浴の時間。
を腕の中に抱きしめることが
もしれません。

健やかな成長とともに、
と増えていくにつれ、
の肩や腰には、
が積み重なっていきます。

を提案するのは、10年後、20年後も、
と向き合ってほしいから。
あなたの手を支えるパートナーです。

の体を守る準備を
考えてみませんか。



子どもの
リフト・吊り具
考え方と選び方



「抱っこ」も大切だけど、
「ママの笑顔」はもっと大切。

1.はじめに

お子さんが小さいうちは、愛情たっぷりの「抱っこ」で乗り越えてきましたね。でも、子どもは日々成長し、どんどん重くなっていきます。それはとても嬉しいことですが、同時にパパとママの腰や肩への負担も限界に近づいていませんか？
福祉用具（リフト）を使うことは、決して愛情不足や手抜きではありません。パパ、ママが元気で長く在宅ケアを続けるため、そして、お子さんが将来いろんな人の手を借りて生きていくための「自立への準備」なのです。
無理な姿勢での介助は、お子さんにとっても実は不安定で怖いもの。リフトを使って、お互いに安心して過ごせる方法を一緒に考えてみませんか？




2.リフトを導入する「2つの大切な目的」

【目的その1】パパ・ママの身体的負担を減らすため

毎日の移乗（ベッドから車椅子、お風呂など）は、たとえ短時間でも、積み重なるとパパ・ママの腰や肩に大きなダメージを与えます。パパとママが体を壊してしまっては、在宅生活を続けることが難しくなってしまいます。 リフトに重さをあずけることで、余裕を持って笑顔でお子さんと向き合えるようになります。

【目的その2】将来の子どもの「自立」に向けて

これはとても重要な視点です。将来、お子さんが学校やグループホームなどで生活する時、親以外の支援者（ヘルパーさんや職員さん）から介助を受けることになります。 支援者は、安全のためにリフトを使う場面もあります。小さいうちから「リフトで吊られる感覚」に慣れておくことは、将来、誰からでも安全にケアを受けられる「生きる力」を身につける準備になるのです。

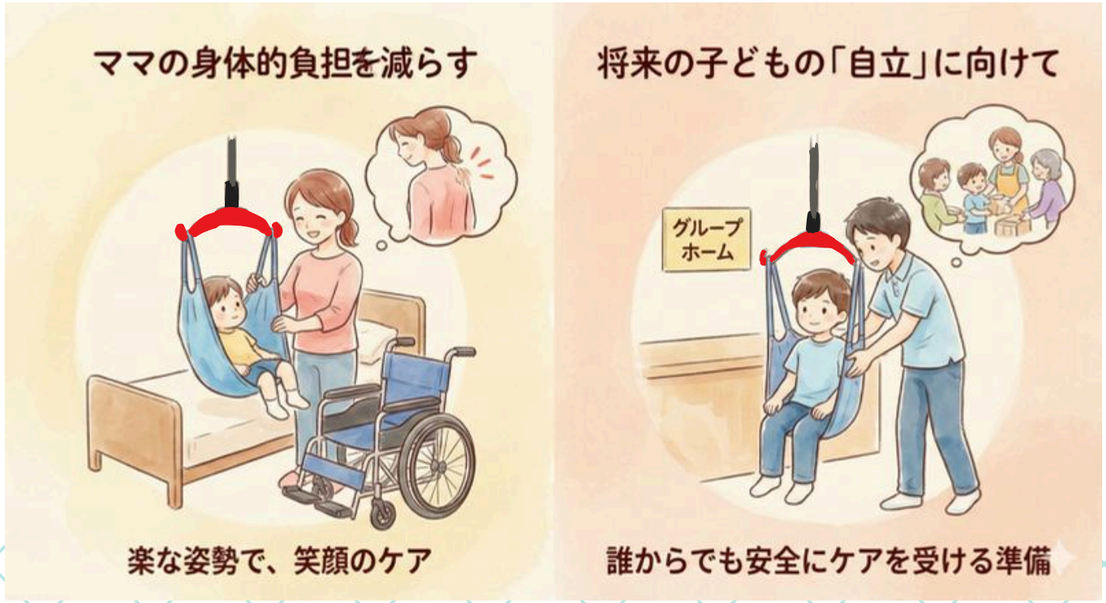

3. リフトはどんな種類があるの？


【リフト本体の選び方（お部屋に合わせて）】

① 床走行式（キャスター移動タイプ）
- 特徴: キャスターで複数の部屋を移動できます。
- 注意点: 操作して回転させるための広いスペースが必要です。毛足の長い絨毯や敷居の段差は苦手です。

② 天井走行式（レール設置タイプ）
- 特徴: 天井のレールに沿って移動します。床のスペースを全く取らず、操作も軽い力で済みます。

③ 設置式（固定タイプ）
- 特徴: お風呂場やベッドサイドなど、「決まった場所」で使うのに便利です。床と天井で突っ張るポール型が多く、大掛かりな工事が不要な場合もあります。比較的コンパクトで安価な製品が多いです。
- 注意点: アームが届く範囲（回転する範囲）でしか使えません。

ポイント: 賃貸住宅でも設置できるリフトあります。耐用年数は約10年、家電と同じように考えましょう。

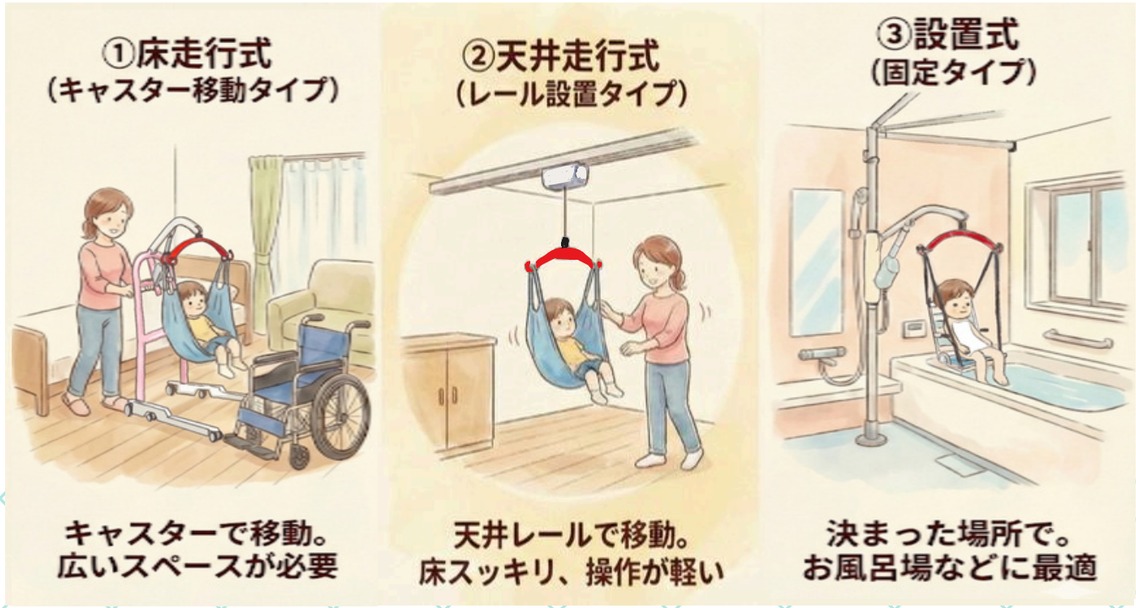


4.吊り具はどんな種類があるの？

【吊り具（スリング）の選び方（お子さんの体に合わせて）】

① ハイバック・脚分離型
- 車いすやバギーに乗った状態でも着脱がしやすいのでオススメです。また、首が座っていなかったり不安定だったりする場合は、頭部までサポートできるハイバック型の吊り具が安定してよいでしょう。脚部のストラップは股の部分でクロスすることで姿勢が安定します。

② 分離型シャワーキャリー
- 身体の変形が著しかったり、突発的に動いてしまったりして、落下の危険性がある場合は、分離型シャワーキャリーを使って入浴をする方が安全です。保管場所等の課題はあります。

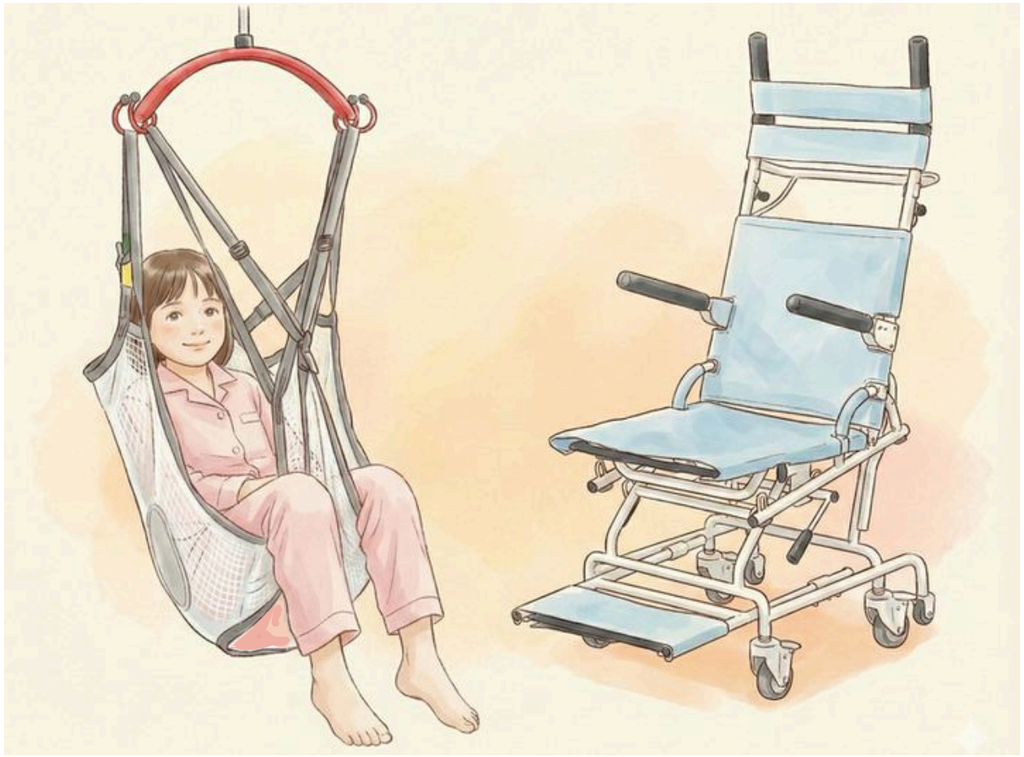


① ハイバック・脚分離型　　② 分離型シャワーキャリー

5. 吊り具の導入までのステップ＆チェックシート

【導入までのステップ】

メーカーのウェブサイトやカタログだけで吊り具を選択するのは控えるようにしましょう。特にお子さんの身体に密着して使う吊り具は理学療法士(PT)等の医療専門職に相談し、試しながら選択することをオススメします。

ポイント
- 現状の身体に合った吊り具を選択すること
- 吊った姿勢でベッドや浴槽、車いすなどを乗り越えられるか

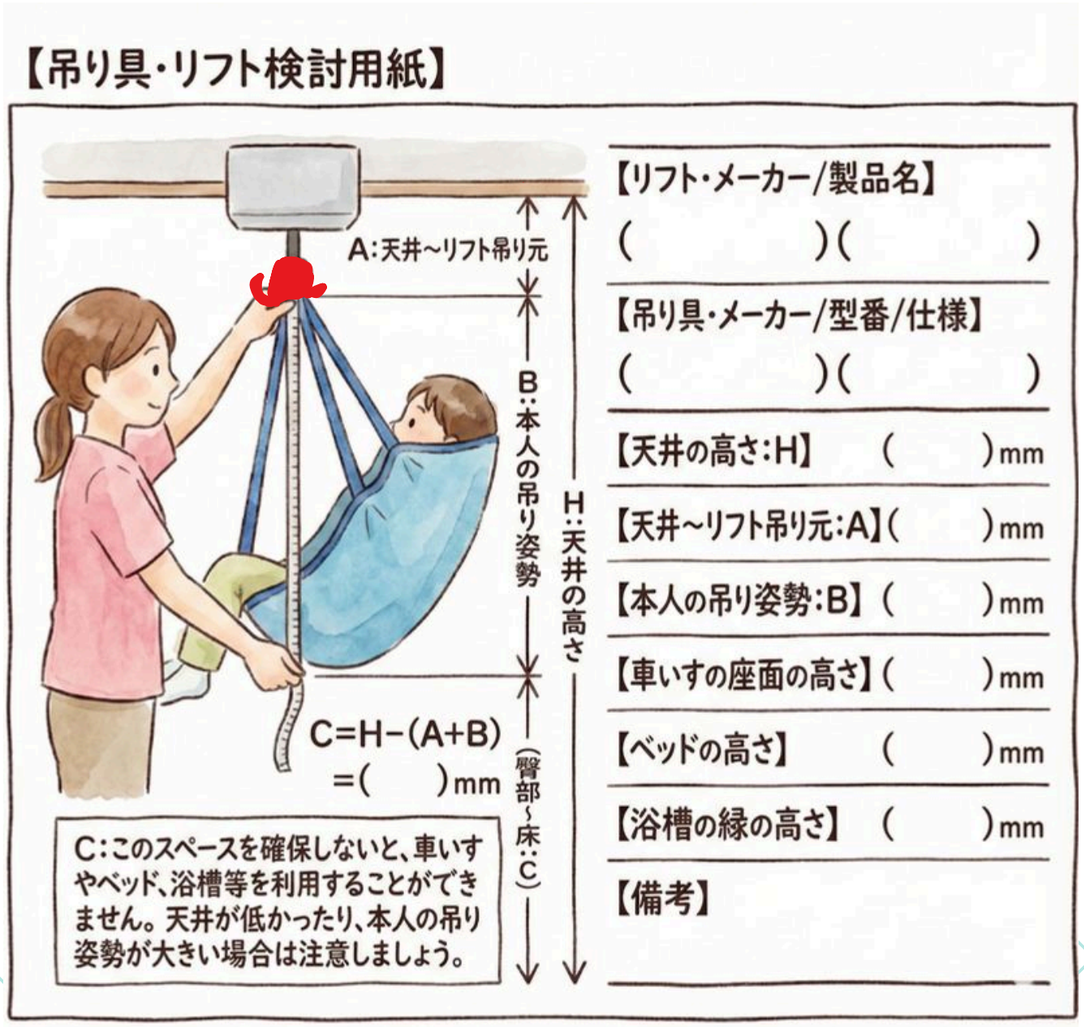

自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト

つるべーF1・F2Rセット

ユニットバスにも設置できます。

耐荷重
100kg



つるべーF2Rセット

壁固定と突っ張り棒接着固定式等、様々な設置方法があり、お風呂・トイレ以外への設置も可能なリフトです。

紹介動画

F1セット、F1SKKセットの特徴

コンパクトで収納性もよく1関節アーム式
なので着座位置が固定され、操作が簡単です。

F2Rセット、F2RSKKセットの特徴

2関節アーム式なので、関節を曲げたり伸ば
したりすることで可動範囲が広がります。
脱衣場からの移乗も可能です。


F1セットとF2Rセットの違い



つるべーF1セット




つるべーF2Rセット

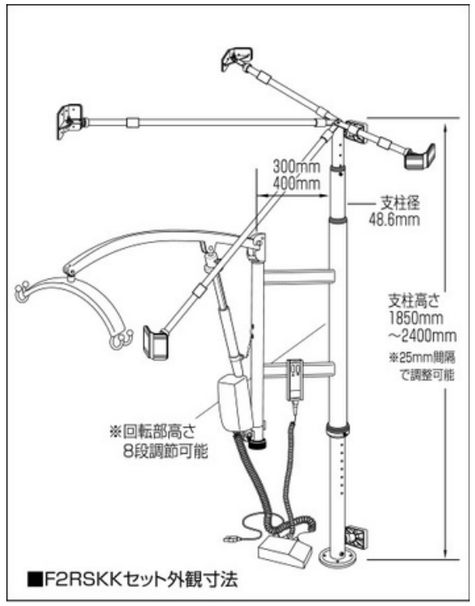

■F2RSKKセット外観寸法



脱衣場から、洗い場・浴槽まで

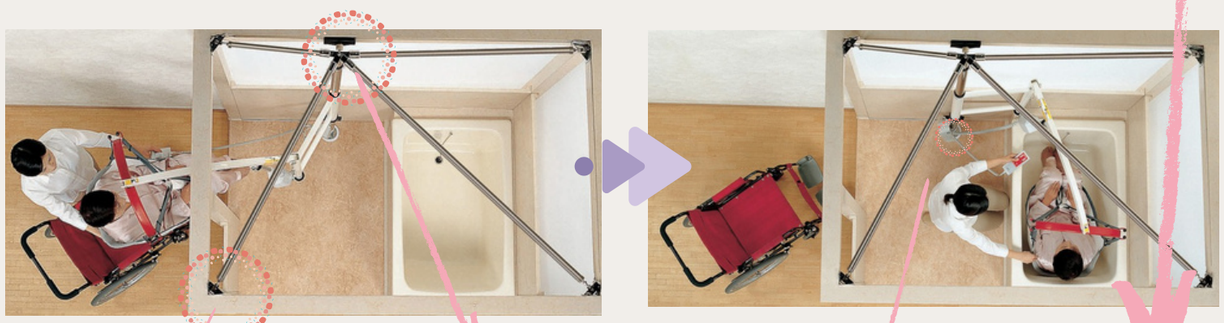

突っ張り棒接着固定



コーナーブラケット



突っ張り棒

背面プレート



受座



ブラケット

足元の開放と旋回性の向上を追求した床走行式リフト


つるべーY4・Y6 Safety Roboセット

小柄な介助者でも使用しやすく車椅子でも正面からアプローチできます。床からの移乗に適しています。

耐荷重
120kg



つるべーY6TセットLi-PINK 手すり付

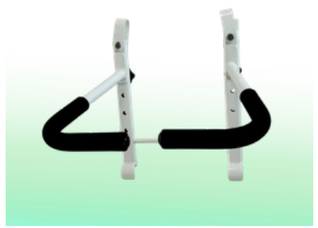


Y4・Y6 Safety Roboセット専用手すり

・手すりの高さの位置は4段階で調整可能です。
・動き始め等のご本人の揺れを、
手すりを握ることで軽減します。





- リチウムバッテリー搭載
  - ・バッテリー軽量化
  - ・寿命UP
  - ・充電時間が大幅削減
  - ・充電忘れによる劣化が少ない

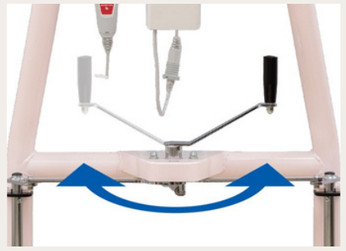


- 脚部は片手で軽く
2秒で開閉



- 身体を引きずられず
自然な動きで
吊上げます

Y6セット（6輪）の特徴

脚部前方の高さ63mmで低床ベッドに対応。6輪自在キャスターによりその場での旋回が可能。狭いお部屋での取り回しが楽です。

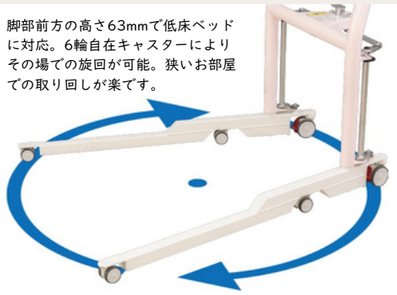


Y4セット（4輪）の特徴


床材の影響を受けにくい大きい（75φ）前輪キャスターを採用しているので前進・後進がとてもスムーズ。軽く移動が行えます。



Y6セット外観寸法

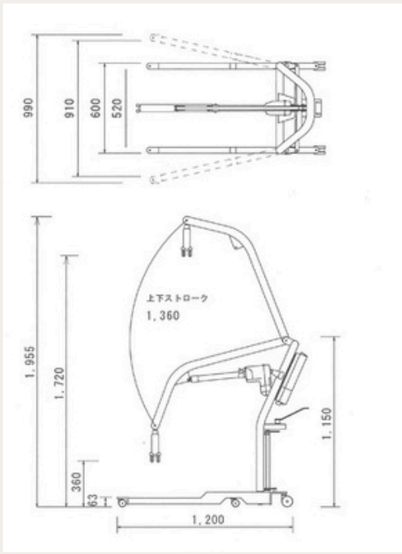


Y4セット外観寸法

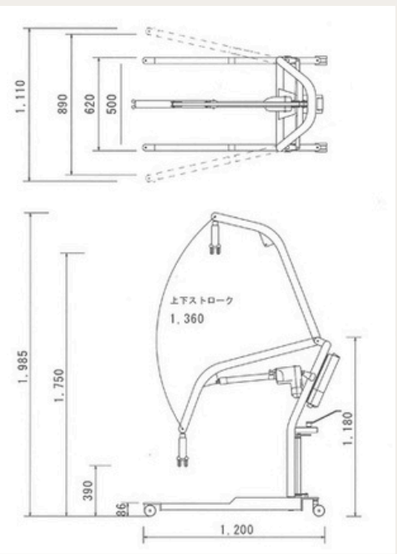

ボリューム
スイッチ

スピーカー

紹介動画

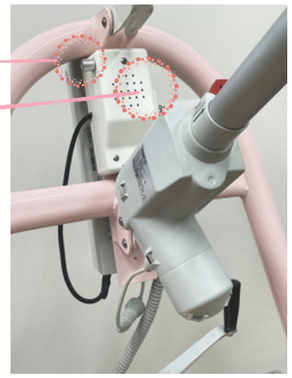

Y6セットLi-PINK　Safety　Robo

- 床走行式リフトがロボット化。吊り具の掛け忘れ確認装置（音声ガイド）搭載で安全・安心に。
- 吊り上げ時、約20kgの重さを感知するとリフトが一旦止まり、音声ガイド「吊り具の安全を確認してください。」が流れます。
安全確認後上昇ボタンを押すことで再度上昇を開始します。

ベッドの重さを利用したベッド設置式介護リフト

つるべーBB1セット

耐荷重120kg。超薄型ベースでスムーズ移乗。

耐荷重
120kg




BB1セットの特徴

・最大使用体重は120ｋｇ、360度回転。
・ベッドを乗せるベースの高さはわずか3ｍｍで、ベッドの高さには影響はありません。病院や施設のキャスター付きベッドの場合は、ベッドを押すだけで簡単にリフトとドッキングすることができます。
・アームの長さは950ｍｍで、支柱（回転ポスト）は、介助の邪魔にならないようベッド四隅の端に設置できます。
・踏込部分を奥に配置することで足先が当たりにくく設計。病院、施設、在宅介護に最適な設置型介護リフトです。



● **最大使用体重は120ｋｇ**

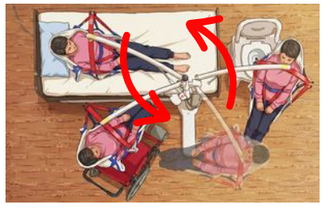

● **誰でも容易にベストポイントへ移乗可能！**

アームの長さは中心から1050mm
※ベッドでの着地は誰でも容易にベストポイントへ移乗可能！



● 踏込部分を奥に配置することで
足先が当たりにくい設計！




● **ベッドをのせるベースの高さは**
わずか3ｍｍ

病院や施設のキャスター付きベッドの場合は、バッドを押すだけでベースに乗り簡単にリフトとドッキングが可能！



● **ベッドの四隅のいずれかに**
設置可能！

支柱（回転ポスト）が邪魔にならない

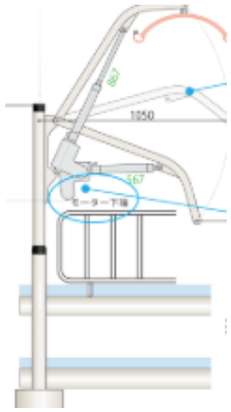

●
モーター位置が
高いので
ベッドの
サイドレールに
干渉しない！

紹介動画



BB1セット外観寸法

