



モリトー 介護リフトつるべー 製品仕様

■ つるべー標準仕様

昇降速度 上昇 (850mmアーム)	31.7mm/sec
昇降速度 下降 (850mmアーム)	37.1mm/sec
耐荷重	100kg
上下ストローク (700/850/950mmアーム)	955/1160/1300mm
ハンガーフック間距離 (外寸法)※1	500 (560) mm
材 質	スチール・ステンレス (SUS304)

※1 ハンガーフック間距離は、オプション (別売) にて、380と430mm仕様があります

■ つるべーY4・Y6セット仕様

昇降速度 上昇	36.3mm/sec
昇降速度 下降	37.2mm/sec
耐荷重	120kg
材 質	スチール

■ オクトバス浴槽仕様

サイズ (外寸法)	1400×700×550mm
(内寸法)	1280×570×470mm
容 量	湯水265ℓ
本体重量	110kg

■ つるべー電装品仕様

品目	形式	入力電圧	出力電圧	重量	コード長さ	防水性能	定格	備考
モーター	LA32	24V	-	3.4kg	0.4mコイル	IPX6	10%	6000N最大電流値6A
スイッチ	HB31	24V	-	0.26kg	0.6mコイル	IPX6	-	-
コントローラー	CB08	100V	24VDC	1.4kg	5.1mストレート	IPX6	5%	AC電源設定のみ
コントローラー	CB12	100V	24VDC	3.5kg	3.2mストレート	IPX6	10%	バッテリー内蔵型
Y4・Y6専用モーター	LA34	24V	-	4.2kg	0.4 (0.2)mコイル	IPX6	10%	10000N
Y4・Y6専用コントローラー	CBJ2	100V	24VDC	0.54kg	-	IPX4	10%	バッテリー残量表示
Y4・Y6専用コントローラー	BAJ1	-	24VDC	2.7kg	-	IPX4	-	-
Sセットモーター	LA34	24V	-	3.83kg	0.4mコイル	IPX6	10%	10000N
Sセットスイッチ	HB31	24V	-	0.26kg	0.4mコイル	IPX6	-	-
Sセットコントローラー	CB12	100V	24VDC	2.33kg	3.2m	IPX6	10%	-
リチウムイオン電池	BAL50	29.4V	25.2VDC	0.9kg	-	IPX6	-	-

バッテリータイプ

(CB12) 小型シール蓄電池NP1.2-1.12V. 1.2Ahを2台使用

(CBJ2) 小型シール蓄電池52.9-1.2, 1.2V. 2.9Ahを2台使用

■ オクトバス Y4・Y6セットLi-PINK電装品仕様

品目	型 式	入力電圧	出力電圧	防水性能	備 考
モーター	LA34	24V	-	IPX6	10000N
スイッチ	HB31	24V	-	IPX6	-
チャージャー	CHL50	100V	29.4VDC	IPX4	-
バッテリー	BAL50	29.4V	25.2VDC	IPX6	2.6Ah
コントローラー	COL50	100V	29.4VDC	IPX6	-

■ つるべーCセット V-Lift電装品仕様

品目	入力電圧	防水性能	定格	備考
モーター	24V	IPV6	10%	10000N/最大電流7.7A
コントローラー	12V	-	10%	アクセレーションカット機能
ワイヤレススイッチ (2個付)	-	-	-	ボタン電池 CR2016x2個使用

●コントローラーの全タイプに過負荷保護回路を配定。過負荷でモーター電源を遮断

●コントローラーのバッテリータイプには、バッテリー残量警報を設定。残量50%でアラーム音作動


●コントローラーの全タイプのトランス内にヒューズの設置。1次保護電圧ヒューズA

■ つるべーTEN仕様

走行方式	C450 手動走行
本体重量	10kg
焼酎重量	204kg
昇降ストローク	2030mm
昇降速度	45mm/秒
動力電源	DC24V (バッテリー駆動)
充電器入力	AC100-120V 1.0A
充電器出力	DC24V 1.5A
充電方法	レールの端で自動充電
バッテリー	12V5.0Ahx2個 密閉形鉛蓄電池
バッテリー残量表示	液晶LED表示 (各アラーム)
操作方法	上下押しボタン方式
ペンダントスイッチ	空気圧式
赤外線リモコン	○
ストラップ残量検知	○
過速度検知	○
スロースタートストップ	○
オートリターン機構	○
静電モード	○
乱巻防止	○
緊急停止装置	(電動と手動があり)
緊急停止装置	○

■ つるべーCセット V-Lift仕様

上下ストローク	985mm
耐荷重	100kg
材 質	スチール

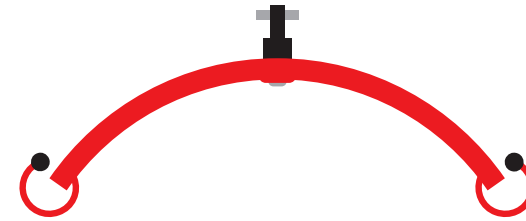

NURSING LIFT

介護リフト

つるべー
TSURUBE
LINEUP

製造発売元



株式会社 モリトー

■本 社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

■札幌営業所 / 〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101

■仙台営業所 / 〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22

■埼玉営業所 / 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103

■中部営業所 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

■大阪営業所 / 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンバトオフィスB号

■岡山営業所 / 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉30-102

■福岡営業所 / 〒811-1204 福岡県那珂川市片縄東1-12-1

■東京有明ショールーム / 〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー8階2号室

■福岡大野 / 〒398-0001 長野県大町市大字平22393

お客様相談室

(24時間受付)

モリトーホームページ

Email

0120-65-2525

http://www.moritoh.co.jp

info@moritoh.co.jp

TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555

TEL (011) 708-5200 FAX (011) 708-5201

TEL (022) 302-7914 FAX (0586) 72-4555

TEL (048) 753-9393 FAX (03) 5531-5550

TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555

TEL (06) 6785-7202 FAX (06) 6785-7203

TEL (086) 259-2910 FAX (0586) 72-4555

TEL (092) 953-1892 FAX (092) 953-1973

TEL (03) 5531-5555 FAX (03) 5531-5550

TEL (0261) 23-1678



製品価格表



販売店

※取付け工事費が別途必要です。機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 O/F/T/3



耐荷重
100kg

ベッドの重さを利用したベッド設置式介護リフト

つるべー B・BBセット

様々な介護ベッドに使用できるよう長さ・幅の調整が可能。

紹介動画



外観寸法



つるべー BBセット

Bセットの特徴

- 支柱の設置位置は環境に合わせて、ベッドの頭側の左右、足側の左右の4か所から選べます。
- 360度回転。押さ出し窓から外の車椅子へ乗り換えなど、レイアウトで様々な使用ができます。

BBセットの特徴

- キャスター付ベッドへ設置してもベッド移動が可能。頻繁にベッドを動かす方やベッド緊急搬送時にも支障がなく、病院・施設でも導入されています。
- ハーネスを使用することで、背面開放の端座位をつくり、立位姿勢・立位移乗が可能。自立化を大きくサポートします。
- 2関節アームのため、可動範囲が広がり、着座位置などの微調整が可能です。



つるべー Bセット

BWセット・BBWセットは体重計付きです。

360度回転アーム
置き場所が様々な使い方が可能になります。
[Bセット]関節付きアーム
可動範囲が広がります。
[BBセット]

つるべー Bセット



つるべー BBセット



リフト用デジタル体重計 MHS-2600

つるべーに乗ったまま体重測定が可能。

体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。
BMI(体格指数)機能があり、体重管理にも使用されています。
※B・BBセット、Y4・Y6セット、TENIに取付できます。
※レンタル仕様では検定なしになります。

- 最小単位/100g
- 電源/アルカリ単4乾電池6本
- 風袋引き機能付き

検定付

耐荷重
204kg

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト

つるべー TEN

レールの長さで移動範囲のニーズに対応できます。



設置式(XY型)

設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。

据置式の特徴

- 工場の必要がない仕様や壁面固定の後施工も可能。据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がございます。

スプリングハンガーを使用した
SSシリーズも設置可能です。

据置式(2ポスト)



C-450(手動走行)

コンパクトな高性能レール走行リフト

- 操作性の良い防滴ハンドスイッチ。
- バッテリー残量やリフトの状態を見やすい液晶ディスプレイ。
- 安全・安心設計

オープン価格 無線リモコンタイプもございます。

耐荷重
100kg

楽しいカーライフを満喫できる車搭載型介護リフト

つるべー Cセット V-Lift

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。

紹介動画



つるべー Cセット V-Lift

Cセットの特徴

- フルマのシートに座れるため安全で、介助者の目も行き届きます。
- 助手席、後部2列目席のどこでも移乗可能で、座る場所が限定されません。
- 女性でも簡単に着脱可能で、コンパクトに収納できます。
- 走行時は取り外しておくことで邪魔になりません。



後部座席移乗イメージ



V-Lift 取付イメージ



V-Lift カバー

つるべー Y4・Y6 Safety Robotセット

つるべー Y4・Y6 Safety Roboセット
専用手すり

- 手すりの高さの目安は、4段階で調整可能です。
- 動き始め等のご本人の足元を、手すりを押ることで調整します。



● 脚部前方の厚は63mmで低床ベッドに対応。
右輪直下キャストによりその場
での旋回が可能。狭いお部屋での
取り回しが楽です。



- 素材の影響を受けにくい大きい(75φ)前輪
キャストを採用しているので、
前進・後進がとてりスムーズ。
軽く移動が出来ます。



- リチウムイオンバッテリーを搭載することにより
 - バッテリー軽量化
 - 寿命UP
 - 急激な劣化による劣化が少ない
 - 充電時間が大幅に短縮
 - 充電ケーブルなど
種類が大幅にアップ
しました。



Y6セットLI-PINK

YBTセット L-PINK 手すり付



YGT セントL-PINK 手すり付

■ 糸を片手で軽くひきつけて閉鎖

■ 糸を片手で押さえずに自然弛緩させ、両上肢を離す

(H) 1. 800-678-2277

● 転居するときは、住所変更の手続きを忘れずに済ませる。



Y6 651 L-PINK Safety Robo



吊り具の掛け忘れ確認装置

- 床昇方式リフトがロボット化。吊り具の上げ下げが
確認装置（音声ガイド）搭載で安全・安心に。
- 吊り上げ時、約20kgの重さを感知するとリフトが
一旦止まり、高層ガイド（吊り具の安全を確認し
てください。）が働きます。
安全確認後上昇ボタンを押すことで再度上昇を
開始します。

©YGグループ LIPINK Safety Policy についてお知らせいたします。PDF形式でご覧いただけます。



耐荷重
120kg

※市地により条件が異なります。
市町村商社でご相談ください。

耐荷重
100kg

つるべー G2Rセット
U1・U2Rセット

自らの玄関が階段でも卒に外へ出ることが可能です。

- 玄間、お風呂、トイレ、洗面など様々な場所の壁に設置できます。
- 200mmの厚手で可動式扉が舞入、曲がり階段の段差解消にも使えます。



うるべー G2Rセット

●床高で指定するリフト。壁に固定できない環境にお勧めです。又柱高1100、1350、1600mmの3種から最適な高さで設置できます。



つるべ-U1セット

- U1セットに両面(300mm・400mm)を追加したノフト。



●女子用フルベロセット

- 車椅子に専用金具を付けて、車椅子に乗ったまま移動します。



つるペー G2Rセント



車椅子用フルベクトルセット
低圧空気主椅子の条件

耐荷重
100kg

自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト

つるべー F1・F2Rセット

ユニットバスにも設置できます。

紹介動画



外観寸法



つるべー F2Rセット



つるべー F1セット



つるべー F2Rセット

F1セットとF2Rセットの違い



つるべー F1セット



つるべー F2Rセット

壁固定と突っ張り棒接着固定式等、様々な設置方法があり、お風呂・トイレ以外への設置も可能なリフトです。

F1セット、F1SKKセットの特徴

- コンパクトで収容性が高く、1人用ベッド式なので重症位置が固定され、操作が簡単です。

F2Rセット、F2RSKKセットの特徴

- 2段階アーム式なので、腰高を上げたり、伸ばしたりすることで介護体位が広がります。転倒場からの移動も可能です。



壁固定

ブラケット

安全

更衣室から、洗い場・浴槽まで



突っ張り棒接着固定

ローラーブラケット

突っ張り棒

安全プレート

安全

耐荷重
120kg

介護リフト付きホーロー浴槽

OCTBATH

置くだけのアウトバス／給排水工事不要※1／電源工事不要

紹介動画




外観寸法



OCTBATHの特徴

- お風呂でゆっくり入浴を楽しみたい。介護者が一人でいおく、自衛安全をわが身で保ちたい。これが実現します。
- 優れた熱伝導により浴槽全体で体を温められる心地よさは格別です。暖かいお湯でゆっくり入浴が出来ます。湯船やカビもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。
- ゆったり入浴できる1400×720mmの浴槽サイズにこだわらず、内寸法1600×1600mmの浴槽スペースでのゆとり入浴介護ができます。

レイアウト図一例

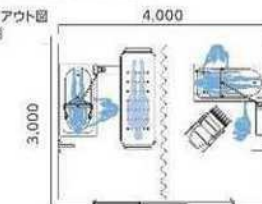

リチウムイオンバッテリー搭載

IPX6の防水リチウムイオンバッテリー浴槽で運用し、充電コードは取り外し可能。管理が簡単で、充電を忘れてもバッテリーが充電は完了します。鉛バッテリーと比較すると、軽量の良方。性能は当然、製品比較で2倍です。



介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【一式】 無料点検付き ¥2,310,000(税込)

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Aセット】 無料点検付き 豪華キャリーAタイプ+スリング2枚セット ¥2,475,000(税込)

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Bセット】 無料点検付き 豪華キャリーBタイプ+スリング2枚セット ¥2,530,000(税込)

※無料点検付きリフト専用、早見見、送付設置状況のチェック、使用方法的確認(研修) 6年(1回/年)

乗りごち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

安楽キャリー



安楽キャリーの特徴

- シートの張りを換えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能。ため小スペースでの使用も難しくなく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー(オプション)を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。



安楽キャリーAAタイプ(一体型)

安楽キャリーBタイプ(分離型)

安楽キャリーBタイプ(分離型)穴あき座面付


※Bタイプはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1台が非課税となります。(オプションは課税です)



延長バー使用時



安楽キャリー専用オプション・買い替え可能消耗品

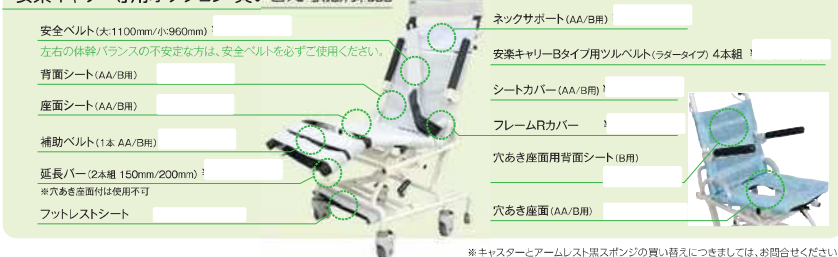

装着のしやすさと快適な乗り心地を追求した

スリング エヴァ／パオ



エヴァ ハーフ

首や体幹の支持力が比較的に強い方に使用します。

エヴァ フル

首や体幹の支持力が比較的に強い方に使用します。頸部保持機能により過屈曲を抑制。

エヴァ ネックサポート

エヴァハーフを使用されていて、首や体幹の支持力が比較的に弱くなってきた場合に使用します。

※写真はエヴァ ハーフ、エヴァ フル中でカラーはホワイト、小はライトグレーとなります。

エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままで滑脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水抜きが容易にできます。

エヴァハーフ 小 (EVE220)	目安身長: 135~150cmくらい	¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税)
エヴァハーフ 中 (EVE210)	目安身長: 150~190cmくらい	¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税)
エヴァフル 小 (EVE250)	目安身長: 135~150cmくらい	¥67,200(税込) / ¥52,000(非課税)
エヴァフル 中 (EVE240)	目安身長: 150~190cmくらい	¥67,200(税込) / ¥52,000(非課税)
エヴァネックサポート (EVE260)	30×19.5cm	¥14,300(税込) / ¥13,000(非課税)



パオ ハーフ

首や体幹の支持力が比較的に強い方に使用します。

パオ フル

比較的首の握り方の悪い方に使用します。


パオ ハーフ (PAO100) 70×100cm	目安身長: 1~180cmくらい	¥51,700(税込) / ¥47,000(非課税)
パオ フル (PAO120) 70×130cm	目安身長: 1~175cmくらい	¥63,800(税込) / ¥58,000(非課税)
パオ ロング (PAO130) 70×150cm	目安身長: 1~190cmくらい	¥67,100(税込) / ¥61,000(非課税)

パオの特徴

- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能で床ずれ予防効果があります。
- ツルベルトが外せるため移乗後邪魔になりにくいです。

パオメッシュの特徴


- 編み目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも適用可能です。

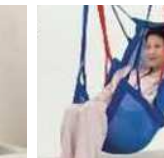

パオメッシュブルー ハーフ (PAO140) 70×100cm	目安身長: 1~180cmくらい	¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税)
パオメッシュブルー フル (PAO150) 70×140cm	目安身長: 1~175cmくらい	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)
パオメッシュグレー フル 小 (PAO350)	目安身長: 135~150cmくらい	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)
パオメッシュグレー フル 中 (PAO340)	目安身長: 150~190cmくらい	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)

休足スリング

- 水平状態でも楽に移乗できます。
- 尖足(せんそく)の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。

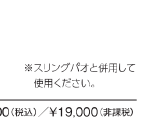

休足スリング (PAO160) 40×30cm	¥20,900(税込) / ¥19,000(非課税)
-------------------------	----------------------------

※スリング/パオと併用して使用ください。

※スリングはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1台が非課税になります。

介護リフト つるべー・安全懸架 T A N - P O P O 価格一覧

商品名1	商品名2	希望小売価格	税込価格	税
介護リフトつるべーF1セット	ステンレスアーム付	662,600		非課税
介護リフトつるべーF1セット(SK K)	ステンレスアーム付	742,900		非課税
介護リフトつるべーF2Rセット	ステンレスアーム付	736,300		非課税
介護リフトつるべーF2Rセット(SK K)	ステンレスアーム付	806,700		非課税
介護リフトつるべーBセット	ステンレスアーム付	649,400		非課税
介護リフトつるべーBWセット(検定付)ステンレスアーム	ステンレスアーム付	869,400		非課税
介護リフトつるべーBBセット	ステンレスアーム付	580,000		
介護リフトつるべーBBWセット(検定付)ステンレスアーム	ステンレスアーム付	800,000		
介護リフトつるべーG2Rセット	ステンレスアーム付	554,800		非課税
介護リフトつるべーU1セット	ステンレスアーム付	648,300		非課税
介護リフトつるべーU2Rセット	ステンレスアーム付	717,600		非課税
介護リフトつるべー Y6セット		596,400		非課税
介護リフトつるべー Y6Wセット(検定付)		816,400		非課税
介護リフトつるべー Y6Tセット	手すり付	694,400		非課税
介護リフトつるべー Y6TWセット(検定付)	手すり付	914,400		非課税
介護リフトつるべー Y4セット		554,400		非課税
介護リフトつるべー Y4Wセット(検定付)		774,400		非課税
介護リフトつるべー Y4Tセット	手すり付	652,400		非課税
介護リフトつるべー Y4TWセット(検定付)	手すり付	872,400		非課税
介護リフトつるべー Y6セット Li-PINK		689,800		非課税
介護リフトつるべー Y6Wセット(検定付) Li-PINK		909,800		非課税
介護リフトつるべー Y6Tセット Li-PINK	手すり付	787,800		非課税
介護リフトつるべー Y6TWセットLi-PINK (検定付)	手すり付	1,007,800		非課税
介護リフトつるべー Y6 Li-PINK safety robo		785,400		非課税
介護リフトつるべー Y4セット Li-PINK		652,000		非課税
介護リフトつるべー Y4Wセット(検定付) Li-PINK		872,000		非課税
介護リフトつるべー Y4Tセット Li-PINK	手すり付	750,000		非課税
介護リフトつるべー Y4TWセットLi-PINK (検定付)	手すり付	970,000		非課税
介護リフトつるべー Y4 Li-PINK safety robo		747,600		非課税
介護リフトつるべー Y4W Li-PINK safety robo (検定付)		967,600		非課税
介護リフトつるべー Y4・Y6セット専用手すり		98,000	107,800	税込
車搭載型介護リフト V-LIFT		680,000		非課税
リフト用デジタル体重計 検定付	MHS2600	220,000	242,000	税込
リフト用デジタル体重計 検定無し	MHS2600	180,000	198,000	税込
車椅子用つるべルト(黒輪・金具付セット)		22,500	24,750	税込
Cセット用スリングシート ハーフ	PAO170	30,000	33,000	税込

介護リフト つるべ・安全懸架 T A N - P O P O 価格一覧

商品名1	商品名2	希望小売価格	税込価格	税
Cセット用スリングシート フル	PAO180	30,000	33,000	税込
スリング ハーフ	PAO100	47,000	51,700	税込
スリング ハーフ	PAO120	58,000	63,800	税込
スリング ハーフロング	PAO130	61,000	67,100	税込
スリング ハーフメッシュブルー ハーフ	PAO140	42,000	46,200	税込
スリング ハーフメッシュブルー フル	PAO150	52,000	57,200	税込
休足スリング	PAO160	19,000	20,900	税込
スリング エヴァーフ中	EVE210	42,000	46,200	税込
スリング エヴァーフ小	EVE220	42,000	46,200	税込
スリング エヴァフル中	EVE240	52,000	57,200	税込
スリング エヴァフル小	EVE250	52,000	57,200	税込
スリング エヴァネックサポート	EVE260	13,000	14,300	税込
スリング ハーフメッシュグレー フル 中	PAO340	52,000	57,200	税込
スリング ハーフメッシュグレー フル 小	PAO350	52,000	57,200	税込
ぶらん歩 S		43,000	47,300	税込
ぶらん歩 M		43,000	47,300	税込
ぶらん歩 L		43,000	47,300	税込
移座えもんボードブルー	「介護の技術を変えよう！」QR付	16,000	17,600	税込
移座えもんボード ホワイト1000	45*100	18,000	19,800	税込
移座えもんボード ホワイト800 30*80		9,000	9,900	税込
移座えもんグローブ		2,000	2,200	税込
移座えもんシート BLACK M		3,000	3,300	税込
移座えもんシート BLACK ML		5,500	6,050	税込
移座えもんシート BLACK L		7,500	8,250	税込
移座えもんシート BLACK S		2,500	2,750	税込
移座えもんシーグロ		4,000	4,400	税込
移座えもんローラ ROLA-1000	1000*500	50,000	55,000	税込
移座えもんローラ ROLA-1800	1800*500	79,500	87,450	税込
移座えもんパッド	50*100(延長ストラップ2本付)	18,000	19,800	税込
移座えもんヒップベルト		12,000	13,200	税込
安楽キャリー AAタイプ 一体型	アームレスト付	156,200	171,820	税込
安楽キャリー Bタイプ 分離型	アームレスト付	239,800	263,780	税込
安楽キャリーBタイプ 穴あき座面付		255,200	280,720	税込
安楽キャリー用アームレスト	2本組A・B兼用	21,400	23,540	税込
安楽キャリーA・AAタイプ用補助ベルト		2,600	2,860	税込
安楽キャリーBタイプ用補助ベルト		2,600	2,860	税込
安楽キャリーBタイプ用ツルベルト(ラダータイプ)	4本組	10,500	11,550	税込

介護リフト つるべ・安全懸架 T A N - P O P O 価格一覧

商品名1	商品名2	希望小売価格	税込価格	税
安楽キャリーA・AAタイプ用ネックサポート		6,800	7,480	税込
安楽キャリーBタイプ用ネックサポート		6,800	7,480	税込
安楽キャリー座面シート交換用 B用		8,200	9,020	税込
安楽キャリー背面シート交換用 B用		8,200	9,020	税込
安楽キャリー座面シート交換用 AA用		8,200	9,020	税込
安楽キャリー背面シート交換用 AA用		8,200	9,020	税込
安楽キャリーB用穴あき座面シート		21,100	23,210	税込
安楽キャリーB用穴あき座面用背面シート		10,700	11,770	税込
安楽キャリー用安全ベルト大		4,600	5,060	税込
安楽キャリー用安全ベルト小		4,600	5,060	税込
延長バー200mm	2本組	7,100	7,810	税込
延長バー150mm	2本組	7,100	7,810	税込
安楽キャリーA・AAタイプ用シートカバー	A30	3,800	4,180	税込
安楽キャリーBタイプ用シートカバー	B70	3,800	4,180	税込
安楽キャリーホアシート	A・B兼用	12,000	13,200	税込
安楽キャリー用 フレームRカバー B用	2枚1組	3,800	4,180	税込
安楽キャリー用 フレームRカバー A用	2枚1組	3,800	4,180	税込
安楽キャリーフットレストシート		6,600	7,260	税込
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH		2,100,000	2,310,000	税込
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH[Aセット]		2,250,000	2,475,000	税込
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH[Bセット]		2,300,000	2,530,000	税込
免荷式歩行リフト POPO Li REH-100		942,000		非課税
免荷式歩行リフト POPO Li LIV-100		915,000		非課税
免荷式歩行リフト POPO Li REH-200	サイド手すり付	1,047,000		非課税
免荷式歩行リフト POPO Li LIV-200	サイド手すり付	1,020,000		非課税
POPO LIV脚部		75,000	82,500	税込
POPO REH脚部		102,000	112,200	税込
POPO サイド手すり		105,000	115,500	税込
POPO ハイアーム		69,000	75,900	税込
ワイヤレススイッチ HB200	※TG,POPO Li ,OCTBATH,Y6 Li-PINK使用可	25,000	27,500	税込
免荷式リハビリテーションリフトTG-1000		1,628,000	1,790,800	税込
免荷式リハビリテーションリフトTG-800		1,490,000	1,639,000	税込
免荷式リハビリテーションリフトSP-2000		都度見積り	-	税込
TG用サイドグリップ		195,000	214,500	税込
MORITOH PP-Tread SW-1200(※1)	(パネル支柱含む)	700,000	770,000	税込
MORITOH PP-Tread 専用シリコンスプレー	OIL-900	900	990	税込
MORITOH PP-Tread 専用シリコンオイル	1Kg	6,000	6,600	税込
ハーネススーパースライド S	SL-110	36,750	40,425	税込
ハーネススーパースライド M	SL-120	36,750	40,425	税込

[illegible]

商品名1	商品名2	希望小売価格	税込価格	税
ハーネススーパーライト L	SL-130	36,750	40,425	税込
ハーネス ライト S POPO用 OR SP用	L-110	48,300	53,130	税込
ハーネス ライト M POPO用 OR SP用	L-120	48,300	53,130	税込
ハーネス ライト L POPO用 OR SP用	L-130	48,300	53,130	税込
ハーネス ハイブリット SS POPO用 OR SP用	HV-100	60,900	66,990	税込
ハーネス ハイブリット S POPO用 OR SP用	HV-110	60,900	66,990	税込
ハーネス ハイブリット M POPO用 OR SP用	HV-120	60,900	66,990	税込
ハーネス ハイブリット L POPO用 OR SP用	HV-130	60,900	66,990	税込
ハーネス ハイブリット LL POPO用 OR SP用	HV-140	60,900	66,990	税込
ハーネスベスト(TSV) M	V-120	60,900	66,990	税込
ハーネスベスト(TSV) L	V-130	60,900	66,990	税込