




SAFETY SUSPENSION SYSTEM
安全懸架装置
TAN・POPO LINEUP
単歩歩

SS series

患者様の症状に合わせてリハビリテーションを可能にするラインナップをご用意しております。


耐荷重 100kg

レール走行式 追従型免荷リフト
SS-1000

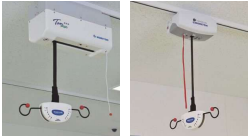

レール走行式 免荷リフト(電動)
SS-450

レール走行式 免荷リフト(手動)
SS-300

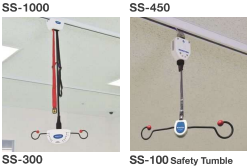

レール走行式 セーフティタンブル(安全な転倒)
SS-100 Safety Tumble

SS-100 Safety Tumble

(いずれもオープン価格)



※設置場所によっては消防法によりスプリンクラーの移設が必要になる場合もございます。

TPP

TPPはフルオーダーの据置型免荷リフトです。(工事不要*)
オーダー製作ですので、5m・10m・15mなどリハビリ室に合わせて最適な長さで製作可能です。また、1本走行と2本走行、XYレール(パラレル)も選択可能です。4機種(SS-100・SS-300・SS-450・SS-1000)全てのレール走行式リフトに対応しております。
価格は都度見積



パラレル事例動画



SS/SPシリーズ スプリングハンガー

歩行リハビリ専用に開発されたスプリングハンガーは歩行時の動作に合わせてスプリングが作用する事で、より自然な歩行練習を実現します。また、転倒時の衝撃を吸収します。
※免荷量計はオプションです。



SS/SPシリーズ 免荷量計 MHS-2600 検定無し

※SS-100には使用できません。

リフト用デジタル体重計	検定無し
¥180,000	¥198,000(税込)

安全懸架式リハビリテーションリフト
TG-800 内寸 800mm
TG-1000 内寸 1,000mm

歩行リハビリ専用に開発されたスプリングハンガー採用で自然な歩行が可能。125φのキャスター採用で滑らかな歩行が可能。高機能4輪キャスターの採用で直進・自在回転・停止の切替が可能。スイッチ操作で容易に免荷量操作が可能。
※トレッドミルは別売です。



免荷式リハビリテーションリフト
SP-2000
サスペンションリフト

オーバーハンクの機構採用により、車いすから垂直に立ち上がることができます。2,800mmレール採用で、最上位位置への移動が容易に行え、使用中の固定もできます。動作解析装置との併用に最適です。
※トレッドミルは別売です。



安全懸架式リハビリテーションリフト TG-800	¥1,490,000	¥1,639,000(税込)
安全懸架式リハビリテーションリフト TG-1000	¥1,628,000	¥1,790,800(税込)
免荷式リハビリテーションリフト SP-2000	都度見積り	

SS/SPシリーズ 免荷量計 MHS-2600 検定無し

※SS-100には使用できません。

リフト用デジタル体重計	検定無し
¥180,000	¥198,000(税込)

POPO series

体重を免荷しながら使用できるコンパクトなリフトです。

耐荷重 100kg

免荷式リフト
ポポ Li
REH-100
LIV-100


介助者用手元スイッチ



OPTION

免荷式歩行リフト POPO Li REH-100	¥942,000(非課税)
免荷式歩行リフト POPO Li LIV-100	¥915,000(非課税)
POPO LIV 脚部	¥75,000 ¥82,500(税込)
POPO サイド手すり	¥105,000 ¥115,500(税込)
POPO ハイアーム	¥69,000 ¥75,900(税込)
ワイヤレススイッチ HB200	¥25,000 ¥27,500(税込)

原産導入事例動画
※免荷式歩行リフトPOPOは独立行政法人福祉医療機構 社会福祉院助成事業の取組により開発されました。

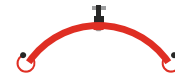

NURSING LIFT
介護リフト
つるべ TSURUBE LINEUP

つるべ BB1セット

耐荷重 120kg

耐荷重 120kg
超薄型ベースでスムーズ移乗

介護保険レンタル対象



介護リフト つるべ BB1セット ¥649,400 (非課税)

つるべ F1・F2Rセット

耐荷重 100kg

ユニットバスにも設置できます。

介護保険レンタル対象




介護リフト つるべ F1セット ¥662,600 (非課税)
介護リフト つるべ F2Rセット ¥736,300 (非課税)

OCTBATH

耐荷重 120kg

置くだけのオクトバス
給排水工事不要*

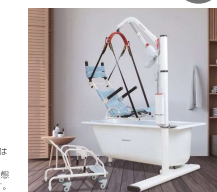

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH ¥2,100,000~ ¥2,310,000 (税込)

つるべ TEN

耐荷重 204kg

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト

設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。

据置式の特徴

- 工場の必要がない仕様や壁面固定の後施工も可能。据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がございます。



つるべ Y4・Y6 Safety Robotセット

耐荷重 120kg

小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます。床からの移乗にも適しています。

介護保険レンタル対象



介護リフト つるべ Y6 Li-PINK Safety Robot ¥785,400 (非課税)

つるべ U1・U2Rセット G2Rセット

耐荷重 100kg

アンカーボルトの固定もありますが、基礎を埋め込む方法もあります。取り付け方法は別途ご相談下さい。

介護保険レンタル対象



介護リフト つるべ U1セット ¥648,300 (非課税)
介護リフト つるべ U2Rセット ¥717,600 (非課税)
介護リフト つるべ G2Rセット ¥554,800 (非課税)

楽しいカーライフを満喫できる
車搭載型介護リフト

つるべ Cセット V-Lift


耐荷重 100kg

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。



車搭載型介護リフト V-Lift ¥680,000 (非課税)

ワイヤレススイッチ HB200

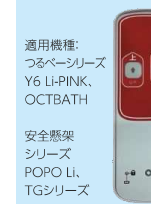

ワイヤレススイッチ HB200 ¥25,000 ¥27,500(税込)

リフト用デジタル体重計 MHS-2600

つるべに乗ったまま体重測定が可能。体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。BMI(体格指数)機能があり、体重管理にも使用されています。

リフト用デジタル体重計 検定付	¥220,000	¥242,000(税込)
リフト用デジタル体重計 検定無し	¥180,000	¥198,000(税込)

乗りごこち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

安楽キャリー

安楽キャリーの特徴

- シートの張りを換えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能。そのため狭いスペースでの使用も難しくありません。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー(オプション)を装着することで、臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。

シャワーキャリー対応吊り具

シャワーキャリー-Bタイプ穴あき座面付
※穴あき座面付には、オプション延長バー(150mm/200mm)は装着できません。



上層部と下部部が分離。リフトの取外し易くして使用可能。※リフトの取外しは説明書をご覧ください。

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)

シャワーキャリー対応吊り具



シャワーキャリー-Aタイプ一体型

シャワーキャリー-Aタイプ一体型



安楽キャリー-Aタイプ一体型	¥156,200	¥171,820(税込)
安楽キャリー-Bタイプ分離型	¥239,800	¥263,780(税込)
安楽キャリー-Bタイプ穴あき座面付	¥255,200	¥280,720(税込)

耐荷重
100kg



スリング エヴァ/パオ

エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままで着脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整が可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水拭きが容易にできます。

パオの特徴

- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能が充実し予防効果があります。
- ツルベルトが外せるため移乗後邪魔になりにくいです。

パオメッシュの特徴

- 編み目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも適用可能です。



スリング パオハーフ	PAO100	¥47,000	¥51,700(税込)
スリング パオフル	PAO120	¥58,000	¥63,800(税込)
スリング パオロング	PAO130	¥61,000	¥67,100(税込)
スリング パオメッシュブルーハーフ	PAO140	¥42,000	¥46,200(税込)
スリング パオメッシュブルーフル	PAO150	¥52,000	¥57,200(税込)
スリング エヴァハーフ中	EVE210	¥42,000	¥46,200(税込)
スリング エヴァハーフ小	EVE220	¥42,000	¥46,200(税込)
スリング エヴァフル中	EVE240	¥52,000	¥57,200(税込)
スリング エヴァフル小	EVE250	¥52,000	¥57,200(税込)
スリング エヴァネックサポート	EVE260	¥13,000	¥14,300(税込)
スリング パオメッシュグレーフル 中	PAO340	¥52,000	¥57,200(税込)
スリング パオメッシュグレーフル 小	PAO350	¥52,000	¥57,200(税込)
じよきん娘 トリガータイプ 300ml		¥2,850	¥3,135(税込)

歩けるスリング

ぶらん歩 四角/ぶらん歩 三角

ぶらん歩でゆらゆら揺れて気分転換

ぶらん歩の特徴

- ベッド周りをアクティブな生活空間に変える!
- 1日中ベッドと車椅子で長時間過ごされている方にとっても安全な座位移動が可能で、重度者の自立化支援の第一歩となります。

※ぶらん歩はリフトにセットで購入する場合はリフト1台に付き1枚が非課税になります。

紹介動画	ぶらん歩 四角	¥43,000	¥47,300(税込)
	ぶらん歩 三角(M)	¥43,000	¥47,300(税込)
	ぶらん歩 三角(L)	¥43,000	¥47,300(税込)



休足スリング

- 水平状態でも楽に移乗できます。
- 尖足(せんそく)の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。

除菌・防カビスプレー じよきん娘(JOKINKO)

スリングや安楽キャリーのカビ・ウイルス対策として効果が期待できます。繊維・金属を腐食させません。成分はメルカプトピリンジオンキンド茶葉抽出液です。




シートとボードとグローブで移乗・移動

移座えもん



移座えもんシートBLACK

- 筒状に縫製され、キャピラーのようにローリングしながら、少しの力でスライドし、移動・移乗を容易にします。
- ナイロンに特殊コーティングを施し、低コスト化を実現しました。
- 折りたためばポケットやハンドバッグに入ります。

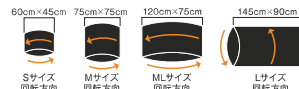

移座えもんシートBLACK S	¥2,500	¥2,750(税込)
移座えもんシートBLACK M	¥3,000	¥3,300(税込)
移座えもんシートBLACK ML	¥5,500	¥6,050(税込)
移座えもんシートBLACK L	¥7,500	¥8,250(税込)

移座えもんグローブ

- 手袋状に縫製された体の下に差し込むことで、ベッド上の左右の移動が簡単に出ます。ナイロン製



移座えもんグローブ	¥2,000	¥2,200(税込)
-----------	--------	------------

サスペンションリフト/免荷式POPO 専用共通ハーネス

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)



POPO用
ハーネスライต์
対象者:軽度~中度者向け


SP用
ハーネス/ハイブリッド
対象者:軽度~重度者向け

ハーネス
スーパーライต์
対象者:軽度者向け
※POPOでは使用できません。

ハーネスベスト(TSV)
※ハーネスベスト(TSV)は対応色(白・黒・赤)の共同開発製品です。
※介護保険購入対象外です。

ハーネスハイブリッドSS POPO用 OR SP用	HV-100	¥60,900	¥66,990(税込)
ハーネスハイブリッドS POPO用 OR SP用	HV-110	¥60,900	¥66,990(税込)
ハーネスハイブリッドM POPO用 OR SP用	HV-120	¥60,900	¥66,990(税込)
ハーネスハイブリッドL POPO用 OR SP用	HV-130	¥60,900	¥66,990(税込)
ハーネスハイブリッドLL POPO用 OR SP用	HV-140	¥60,900	¥66,990(税込)
ハーネスライム POPO用 OR SP用	L-110	¥48,300	¥53,130(税込)
ハーネスライムM POPO用 OR SP用	L-120	¥48,300	¥53,130(税込)
ハーネスライムL POPO用 OR SP用	L-130	¥48,300	¥53,130(税込)
ハーネススーパーライツ	SL-110	¥36,750	¥40,425(税込)
ハーネススーパーライツM	SL-120	¥36,750	¥40,425(税込)
ハーネススーパーライツL	SL-130	¥36,750	¥40,425(税込)
ハーネスベスト(TSV)M	V-120	¥60,900	¥66,990(税込)
ハーネスベスト(TSV)L	V-130	¥60,900	¥66,990(税込)

耐荷重
100kg

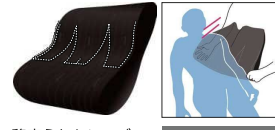

移座えもんシートBLACK

- 移座えもん[シート]と[グローブ]が一体化しました。手を入れるポケットが3ヶ所付いて使いやすいです。


移座えもんシートBLACK	¥4,000	¥4,400(税込)
---------------	--------	------------



移座えもんボードブルー

- ヒップライントックにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできることで、収納時コンパクトになります。
※期間・高さともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんボードブルー	¥16,000	¥17,600(税込)
-------------	---------	-------------

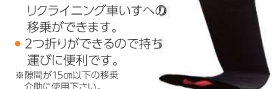


移座えもんボードホワイト

- 160gと超軽量。取り回し易く片手で操作できます。
- しなやかに、曲がりにも強い性質を持っています。
- 洗浄消毒は、消毒用エタノール等をご使用下さい。
- 材質は、PVC低発泡板です。
- 難燃性素材仕様です。

移座えもんボードホワイト1000ES	¥36,800	¥40,480(税込)
移座えもんボードホワイト800	¥9,000	¥9,900(税込)

※期間・高さともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

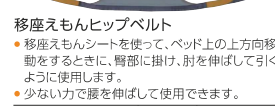

移座えもんヒップベルト

- 移座えもんシートを使って、ベッド上の上下方移動をするときに、臀部に掛け、肘を伸ばして引くように使用します。
- 少ない力で腰を伸ばして使用できます。

移座えもんヒップベルト	¥12,000	¥13,200(税込)
-------------	---------	-------------



移座えもんボードブルー

- ヒップライントックにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできることで、収納時コンパクトになります。
※期間・高さともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんボードブルー	¥16,000	¥17,600(税込)
-------------	---------	-------------




移座えもんボードホワイト

- 160gと超軽量。取り回し易く片手で操作できます。
- しなやかに、曲がりにも強い性質を持っています。
- 洗浄消毒は、消毒用エタノール等をご使用下さい。
- 材質は、PVC低発泡板です。
- 難燃性素材仕様です。

移座えもんボードホワイト1000ES	¥36,800	¥40,480(税込)
移座えもんボードホワイト800	¥9,000	¥9,900(税込)

※期間・高さともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

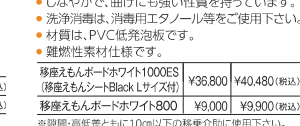

移座えもんパッド

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。

移座えもんパッド	¥18,000	¥19,800(税込)
----------	---------	-------------

製造発売元
MORITOH CORPORATION
株式会社 モリト
「安・楽・満」
安心と楽と満足を提供し、安らぎと楽しみが満ち溢れた社会を創造します。

■ 本社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36 FAX (0586) 72-4555

■ 営業所 / 札幌・仙台・埼玉・中部・大阪・岡山・福岡

東京有明ショールーム
研修センター/信濃大町研修センター

お客様相談室
[24時間受付]
モリトホームページ
Email

0120-65-2525

https://www.morito.co.jp

info@morito.co.jp

ホームページ

