



SAFETY SUSPENSION SYSTEM

安全懸架装置

TAN・POPO LINEUP

単 歩 歩



NURSING LIFT

介護リフト

つるべ TSURUBE LINEUP



SS series

患者様の症状に合わせたリハビリテーションを可能にするラインナップをご用意しております。

レール走行式 追従型免荷リフト

SS-1000




レール走行式 免荷リフト(電動)

SS-450




レール走行式 免荷リフト(手動)

SS-300

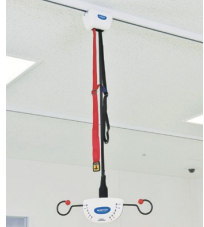

レール走行式 セーフティタンブル(安全な転倒)

SS-100 Safety Tumble

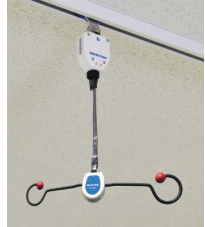

耐荷重
100kg



スプリングハンガー

歩行リハビリ専用開発されたスプリングハンガーは歩行時の動作に合わせスプリングが作用する事で、より自然な歩行練習を実現します。
また、転倒時の衝撃を吸収します。
※免荷量計はオプションです。

SS/SPシリーズ 免荷量計 MHS-2600

※SS-100には使用できません。



検定無



パラレル事例動画



※設置場所によっては消防法によりスプリングラーの移設工事が必要になる場合もございます。

TPP

TPPはフルオーダーの据置型免荷リフトです。(工事不要*)
オーダー製作ですので、5m・10m・15mなどリハビリ室に合わせて最適な長さで製作可能です。また、1本走行と2本走行、XYレール(パラレル)も選択可能です。4機種(SS-100・SS-300・SS-450・SS-1000)全てのレール走行式リフトに対応しております。

SP series

体重を免荷することで、楽に快適な歩行を実現します。TGは用途に合わせたサイズをご用意しております。

耐荷重
100kg



安全懸架式リハビリテーションリフト

TG-800 寸内 800mm

TG-1000 寸内 1,000mm

歩行リハビリ専用開発されたスプリングハンガー採用で自然な歩行が可能。
125φのキャスター採用で滑らかな歩行が可能。
高機能4輪キャスターの採用で直進・自在回転・停止の切替が可能。
スイッチ操作で容易に免荷量操作が可能。
※レッドミルは別売です。



免荷式リハビリテーションリフト

SP-2000

サスペンションリフト

オーバーハングの機構採用により、車いすから垂直に立ち上がることができます。
2,800mmレール採用で、最適位置への移動が容易に行え、使用中の固定もできます。動作解析装置との併用に最適です。
※レッドミルは別売です。



POPO series

体重を免荷しながら使用できるコンパクトなリフトです。

耐荷重
100kg



免荷式リフト

ポポ
popo Li
REH-100
LIV-100

介助者用手元スイッチ



免荷量表示パネル

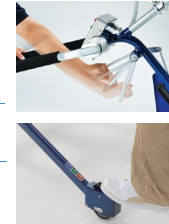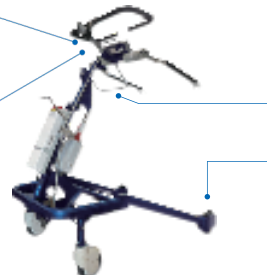

後輪キャスター(REH)3段切替式
①フリー(前進・後進)
②逆転防止(前進のみ)
③前進免荷付(前進のみ)



後輪自在キャスター(LIV)
○3インチキャスター採用
○小回り可能
○ベッドサイドでの使用が容易

OPTION



施設導入事例動画

※免荷式歩行リフトPOPOは独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業の助成により開発されました。

新商品 つるべ BB1セット

耐荷重 120kg
超薄型ベースでスムーズ移乗

介護保険レンタル対象



自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト

つるべ F1・F2Rセット

ユニットバスにも設置できます。

介護保険レンタル対象




介護リフト付きホーロー浴槽

OCTBATH

置くだけのオクトバス
給排水工事不要*1 / 電源工事不要



※1 給湯、排水設備は必要です。
※2 お湯を張った状態での耐荷重です。

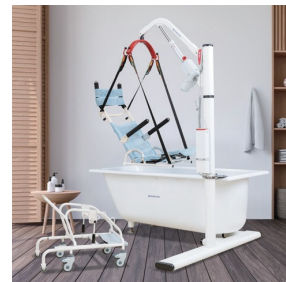

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト

つるべ TEN

レールの長さで移動範囲のニーズに対応できます。

設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。

据置式の特徴

- 工場の必要がない仕様や壁面固定の後施工も可能。
据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がございます。



足元の開放と、旋回性の向上を追求した床走行式リフト

つるべ Y4・Y6 Safety Robotセット

耐荷重 120kg
小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます。床からの移乗にも適しています。

介護保険レンタル対象



縁側、テラス、玄関などで使用できるリフト

つるべ U1・U2Rセット G2Rセット

アンカーボルトの固定もありますが、基礎を埋め込む方法もあります。取り付け方法は別途ご相談下さい。
※地域により条件が異なります。市町村窓口でご確認ください。

介護保険レンタル対象



楽しいカーライフを満喫できる車搭載型介護リフト

つるべ Cセット V-Lift

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。



ワイヤレススイッチ HB200

適用機種:

つるべシリーズ
Y6 Li-PINK、
OCTBATH

安全懸架シリーズ
POPO Li、TGシリーズ

リフト用デジタル体重計 MHS-2600

つるべに乗ったまま体重測定が可能。体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。BMI(体格指数)機能があり、体重管理にも使用されています。

- 最小単位 / 100g
- 電源 / アルカリ単4乾電池6本
- 風袋引き機能付き

※B・BBセット、Y4・Y6セット、TENに取付できます。
※レンタル仕様では検定なしになります。

乗りごこち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

安楽キャリー

安楽キャリーの特徴

- シートの張りを変えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能なため小スペースでの使用も難なく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー（オプション）を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。

シャワーキャリーリフト対応吊り具
安楽キャリー-Bタイプ穴あき座面付



※穴あき座面付には、オプション延長バー（150mm/200mm）は使用できません。

シャワーキャリーリフト対応吊り具
安楽キャリー-Bタイプ 分離型



シャワーキャリー
安楽キャリー-AAタイプ 一体型



※ソルベルトは同梱されます。

自在キャスター 75mm

自在キャスター 100mm

※ソルベルトは同梱されます。

装着のしやすさと快適な乗り心地を追求した

スリング エヴァ／パオ

エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままでも着脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整が可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水抜きが容易にできます。

パオの特徴

- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能で床ずれ予防効果があります。
- ツルベルトが外せるため移乗後邪魔になりにくいです。



エヴァ ハーフ
首や体幹の支持力が比較的にある方に使用します。



エヴァ フル
首や体幹の支持力が比較的に弱い方に使用します。頸部保持機能により過屈曲を抑制。



エヴァ ネックサポート
エヴァハーフを使用されていて、首や体幹の支持力が比較的に弱くなってきた場合に使用します。

※写真のエヴァフル中ではなく次第従来のライトグレーから、アッシュグレー（少し濃いグレー）に色調を変更いたします。エヴァハーフ中、小はアッシュグレー（少し濃いグレー）に変更しております。

パオメッシュの特徴

- 編み目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも適用可能です。



パオ ハーフ
首や体幹の支持力が比較的にある方に使用します。



パオ フル
比較的に首の据わりの悪い方に使用します。



パオメッシュブルー ハーフ

パオメッシュブルー フル

パオメッシュグレー フル

休足スリング

- 水平状態でも楽に移乗できます。
- 尖足（せんそく）の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。

※スリングパオと併用して使用ください。
※スリングはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1枚が非課税になります。

歩行リハビリ
専用に開発
された



除菌・防カビスプレー じょきん娘（JOKINKO）

スリングや安楽キャリーのカビ・ウイルス対策として効果が期待できます。繊維・金属を腐食させません。成分はメルカプトピリジンオキンド系複合抗菌剤です。



歩けるスリング

ぶらん歩 四角／ぶらん歩 三角

介護テクノロジー
移乗支援（非装着）

介護保険購入対象品

耐荷重
120kg

ぶらん歩でゆらゆら揺れて気分転換

ぶらん歩の特徴

- ベッド周りをアクティブな生活空間に変える！
- 1日中ベッドと車椅子で長時間過ごされている方にとっても安全な座位移動が可能で、重度者の自立化支援の第一歩となります。

※ぶらん歩はリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1枚が非課税になります。



ぶらん歩 四角



ぶらん歩 三角



シートとボードとグローブで移動・移乗


移座えもん

耐荷重
100kg



移座えもんシートBLACK 介護保険レンタル対象

- 筒状に縫製され、キャタピラーのようにローリングしながら、少しの力だけでスライドし、移動・移乗を容易にします。
- ナイロンに特殊コーティングを施し、低コスト化を実現しました。
- 折りたためばポケットやハンドバックに入ります。

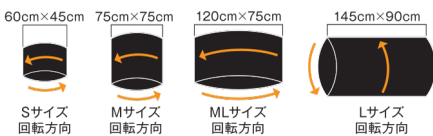

移座えもんローラ 介護保険レンタル対象

移座えもんローラ1800 180×50×1.6cm折畳み寸法 90cm

移座えもんローラ1000 100×50×1.6cm折畳み寸法 50cm

- ベッドからストレッチャー、リクライニング車いすへの移乗ができます。
- 2つ折りができるので持ち運びに便利です。

※隙間が15cm以下の移乗
介助に使用下さい。

移座えもんグローブ 介護保険レンタル対象

19×50cm


- 手袋状に縫製され体の下に差し込むことで、ベッド上での左右の移動が簡単に出来ます。ナイロン製

移座えもんグローブの中では、手のひらを広げて使用してください。つかむ介助を防ぐことができ、またグローブが抜けにくくなります。



移座えもんヒップベルト

- 移座えもんシートを使って、ベッド上の上方向移動をするときに、臀部に掛け、肘を伸ばして引くように使用します。
- 少ない力で腰を伸ばして使用できます。

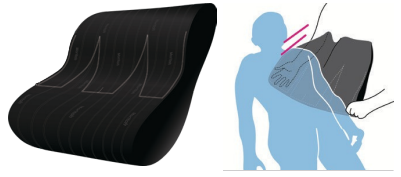

移座えもんシーグロ 介護保険レンタル対象

75×70cm

- 移座えもん「シート」と「グローブ」が一体化しました。手を入れるポケットが3ヶ所付いて使いやすく便利です。



移座えもんローラ 介護保険レンタル対象

移座えもんローラ1800 180×50×1.6cm折畳み寸法 90cm

移座えもんローラ1000 100×50×1.6cm折畳み寸法 50cm

- ベッドからストレッチャー、リクライニング車いすへの移乗ができます。
- 2つ折りができるので持ち運びに便利です。

※隙間が15cm以下の移乗
介助に使用下さい。

移座えもんボード

61.8×29cm

- ヒップラインカットにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできるので、収納時コンパクトになります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんボードブルー 介護保険レンタル対象

61.8×29cm

- ヒップラインカットにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできるので、収納時コンパクトになります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんボードホワイト 介護保険レンタル対象

61.8×29cm

- ヒップラインカットにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできるので、収納時コンパクトになります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんローラ 介護保険レンタル対象

移座えもんローラ1800 180×50×1.6cm折畳み寸法 90cm

移座えもんローラ1000 100×50×1.6cm折畳み寸法 50cm

- ベッドからストレッチャー、リクライニング車いすへの移乗ができます。
- 2つ折りができるので持ち運びに便利です。

※隙間が15cm以下の移乗
介助に使用下さい。

移座えもんグローブ 介護保険レンタル対象

19×50cm

- 手袋状に縫製され体の下に差し込むことで、ベッド上での左右の移動が簡単に出来ます。ナイロン製

移座えもんグローブの中では、手のひらを広げて使用してください。つかむ介助を防ぐことができ、またグローブが抜けにくくなります。

移座えもんグローブの中では、手のひらを広げて使用してください。つかむ介助を防ぐことができ、またグローブが抜けにくくなります。

移座えもんグローブの中では、手のひらを広げて使用してください。つかむ介助を防ぐことができ、またグローブが抜けにくくなります。

移座えもんグローブの中では、手のひらを広げて使用してください。つかむ介助を防ぐことができ、またグローブが抜けにくくなります。

移座えもんグローブの中では、手のひらを広げて使用してください。つかむ介助を防ぐことができ、またグローブが抜けにくくなります。

移座えもんグローブの中では、手のひらを広げて使用してください。つかむ介助を防ぐことができ、またグローブが抜けにくくなります。

移座えもんグローブの中では、手のひらを広げて使用してください。つかむ介助を防ぐことができ、またグローブが抜けにくくなります。



移座えもんボードブルー 介護保険レンタル対象

61.8×29cm

- ヒップラインカットにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできるので、収納時コンパクトになります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんボード 介護保険レンタル対象

ホワイト

移座えもんボードホワイト1000ES 45×100cm
（移座えもんシートBlack Lサイズ付）

移座えもんボードホワイト800（脚部用ボード）30×80cm

- 1600gと超軽量。取り回し易く片手で操作できます。
- しなやかで、曲げにも強い性質を持っています。
- 洗浄消毒は、消毒用エタノール等をご使用下さい。
- 材質は、PVC低発泡板です。
- 難燃性素材仕様です。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんパッド

50×100cm

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんパッド

50×100cm

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんパッド

50×100cm

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんパッド

50×100cm

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんパッド

50×100cm

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんパッド

50×100cm

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんパッド

50×100cm

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんパッド

50×100cm

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少人数で安全な移乗が可能になります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

移座えもんパッド

50×100cm

移座えもんパッド

製造発売元 MORITOH CORPORATION 株式会社 モリトー

「安・楽・満」
安心と楽と満足を提供し、安らぎと楽しみが
満ち溢れた社会を創造します。

■本 社／〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36 FAX (0586) 72-4555

■営業所／札幌・仙台・埼玉・中部・大阪・岡山・福岡
東京有明ショールーム
研修センター／信濃大町研修センター

お客様相談室
[24時間受付]
モリトーホームページ
Email

☎ 0120-65-2525
https://www.moritoh.co.jp
info@moritoh.co.jp

製品価格表

ホームページ

