



# SAFETY SUSPENSION SYSTEM

安全懸架裝置

TAN • POPO  
单 步 步  
LINEUP



安心で安全な、  
質の高い  
歩行練習を  
患者様に  
合わせて提供。

SAFETY SUSPENSION SYSTEM



リフトとハーネスを使い分けることで、軽症者から重症者までそれぞれに合わせた歩行練習がおこなえます。転倒リスクの高い応用練習も、安全に可能となります。

撮影協力：済生会守山市民病院 様



病院導入事例動画



撮影協力：  
熱田リハビリテーション病院 様

世界初! パラレル 前後左右の動きに対応!  
自由度の高い歩行練習・  
バランス練習を可能にします。

使用例

- ボール蹴り
  - 自転車
  - 風船バレー
  - タンDEM歩行
  - 継足歩行
  - TVゲーム etc...
- 使い方は無限大!



**TPP** 軽度者から重度者まで使い方は無限!

SS300

SS100

免荷リフト  
(SS300, SS100)  
の軽量化によって  
このパラレル  
のタイプを実現  
することができ  
ました。

TPPIはフルオーダーの据置型免荷リフトです。(工事不要\*)オーダー製作ですので、5m・10m・15mなどリハビリ室に合わせて最適な長さで製作可能です。また、1本走行と2本走行、XYレール(パラレル)も選択可能です。4機種(SS-100・SS-300・SS-450・SS-1000)全てのレール走行式リフトに対応しております。

※設置場所によっては消防法によりスプリンクラーの移設工事が必要になる場合もございます。



パラレル事例動画

## SS series

患者様の症状に合わせたリハビリテーションを可能にする5種類のラインナップをご用意しております。

※価格については、施工内容にあわせてお見積りとなります。

耐荷重  
100kg

レール走行式 追従型免荷リフト

### SS-1000



追従型免荷リフトは、ボールスプライン機構の採用で巻き取りドラムによる免荷機能とフリー駆動を実現しました。リフトの重さを感じることなく歩行開始・歩行時・停止時の動作をセンサが感知しリフトのスムーズな動きと安定した自然な歩行が可能となります。

レール走行式 免荷リフト(電動)

### SS-450



リモコン操作により免荷量(懸架範囲)を0~100kgまで調整する事が出来ます。電動昇降のため、車いすからの立ち上がりも容易に行えます。

レール走行式 免荷リフト(手動)

### SS-300



手動操作により適度に体重を免荷する事が可能です。予めスプリングハンガーを頭上にセットしておき、専用のSPベルトをハンガーに掛けます。その後、ベルトの長さ調整で容易に免荷することが可能となります。

レール走行式 セーフティタンブル(安全な転倒)

### SS-100 Safety Tumble



免荷機能は無く、練習中の転倒時にはストッパー機能とスプリングハンガーの効果で比較的安全な転倒を体感できます。使用しない時は、ハンガーは上方に巻き取られ邪魔になりません。また、天井高に合わせて定位置にセットすることができます。


## スプリングハンガー

歩行リハビリ専用に開発されたスプリングハンガーは歩行時の動作に合わせスプリングが作用する事で、より自然な歩行練習を実現します。また、転倒時の衝撃を吸収します。  
※免荷量計はオプションです。



### OPTION

SS/SPシリーズ  
免荷量計  
MHS-2600

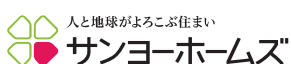

## 寄り添いロボット (転倒衝撃低減システム)

転倒を感知するとブレーキをかけ、ゆるやかに床に倒れさせる装着型のロボットです。転倒による怪我への不安を解消し、しっかりとリハビリトレーニングに励むことができます。ゆるやかに転倒するため、少し離れていても補助が可能です。



患者様・セラピストの負担を軽減しながら  
より多くの歩行量を確保。

適切に体重を免荷することで、  
疼痛や筋力低下による歩行困難を補うことができます。  
セラピストの介助量も軽減し、歩行量を増やすことができます。

撮影協力：済生会守山市民病院 様



## SP series

体重を免荷することで、楽に快適な歩行を実現します。  
用途に合わせたサイズをご用意しております。

耐荷重  
100kg



### OPTION

ワイヤレススイッチ

**HB200**

適用機種：TGシリーズ



サイドグリップ

免荷量表示体重計

### 安全懸架式リハビリテーションリフト

**TG-800** 内寸 800mm


**TG-1000** 内寸 1000mm

歩行リハビリ専用開発されたスプリングハンガー採用で自然な歩行が可能。

125φのキャスター採用で滑らかな歩行が可能。

高機能4輪キャスターの採用で直進・自在回転・停止の切替が可能。  
スイッチ操作で容易に免荷量操作が可能。

※トレッドミルは別売です。

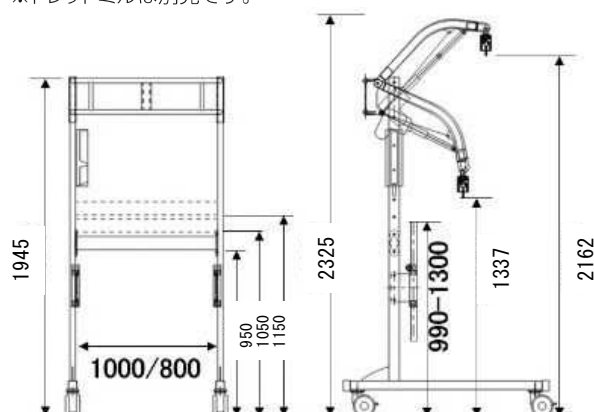

### 免荷式リハビリテーションリフト

**SP-2000** サスペンションリフト

オーバーハングの機構採用により、車いすから垂直に立ち上がることができます。2,800mmレール採用で、最適位置への移動が容易に行え、使用中の固定もできます。動作解析装置との併用に最適です。

※トレッドミルは別売です。

### リハビリテーション対応トレッドミル

**PP-Tread**

初速0.2km/hの低速走行と走行面145mmの低床型トレッドミルです。業務用モーター採用で長時間連続使用が可能です。簡単な操作パネルとシンプルなデザインで使いやすさを追求しました。操作パネルと支柱を外せば完全フラット状態としてご使用いただけます。



### OPTION

PP-Tread専用  
シリコン缶 1kg

**KF-96**





## 世界初! サスペンションアーム採用の コンパクトな免荷式リフト。

安全な立ち上がり、自然な歩行をサポート。

左右独立懸架のサスペンションで0～40kg免荷の自然な歩行ができ、その上、転倒リスクを大幅に軽減します。



施設導入事例動画

撮影協力：済生会守山市民病院 様



POPO Li LIV-100

# POPO series 体重を免荷しながら使用できるコンパクトなリフトです。

## ポポ 免荷式リフト popoLi REH-100 / LIV-100



※免荷式歩行リフトPOPOは独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業の助成により開発されました。

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 免荷式歩行リフト | POPO Li REH-100          |
| 免荷式歩行リフト | POPO Li LIV-100          |
| 免荷式歩行リフト | POPO Li REH-200(サイド手すり付) |
| 免荷式歩行リフト | POPO Li LIV-200(サイド手すり付) |

| OPTION          |
|-----------------|
| POPO REH脚部      |
| POPO LIV脚部      |
| ワイヤレススイッチ HB200 |



### OPTION



### OPTION

ワイヤレススイッチ  
**HB200**

適用機種: POPO Li



## サスペンションリフト／免荷式リフトPOPO 専用共通ハーネス



ハーネスハイブリッド 対象者:軽度～重度者向け

**HV-100(SS)** 大腿部を覆うタイプで多くの免荷重を必要とする方にも使用できます。  
**HV-110(S)** 座骨支持ベルトの採用で足の振出しをサポートします。  
**HV-120(M)** そけい部への圧迫がなく快適な装着感が得られます。  
**HV-130(L)**  
**HV-140(LL)**



ハーネスライト 対象者:軽度～中度者向け

**L-110(S)** クロッチベルトをそけい部に通すタイプで装着はとても簡単です。車いすに座った状態でも着脱が容易に行えます。  
**L-120(M)** クロッチベルトは脱着性と装着感の良い材質を採用しています。  
**L-130(L)**



ハーネススーパーライト 対象者:軽度者向け

**SL-110(S)** 懸架専用となり、転倒時のサポートとして使用します。ウエストに巻くだけのシンプル装着、後方2本ベルトは歩行の視界を妨げません。免荷機能としてはご使用頂けません。  
**SL-120(M)**  
**SL-130(L)**

※POPOではご使用頂けません。



ハーネスベスト(TSV)

**V-120(M)** 体幹部分は、肩甲骨内転、胸椎伸展、腹圧補助機能を有し、ハーネスハイブリッドとの組合せでのBWSTTでは、安定した歩行と体幹伸展・動揺軽減効果が得られます。単独歩行での使用も可能です。  
**V-130(L)**

※ハーネスベスト(TSV)は刈谷豊田総合病院・東分院(リハビリテーション科)との共同開発商品です。

ハーネス適合サイズ一覧

| サイズ | ハーネスハイブリッド         |
|-----|--------------------|
| SS  | ウエストサイズ 約55～65cm   |
| S   | ウエストサイズ 約65～75cm   |
| M   | ウエストサイズ 約75～90cm   |
| L   | ウエストサイズ 約90～100cm  |
| LL  | ウエストサイズ 約100～110cm |

| サイズ | ハーネスライト            |
|-----|--------------------|
| S   | 腸骨周りサイズ 約72～86cm   |
| M   | 腸骨周りサイズ 約86～100cm  |
| L   | 腸骨周りサイズ 約100～114cm |

| サイズ | ハーネススーパーライト       |
|-----|-------------------|
| S   | ウエストサイズ 約53～65cm  |
| M   | ウエストサイズ 約68～88cm  |
| L   | ウエストサイズ 約88～105cm |

※サイズ表記目安数字となります。

## 安全懸架装置 TAN・POPOシリーズ 製品仕様

### ■SSシリーズ 製品仕様

|                   | SS-1000                                                               | SS-450                                                                                                       | SS-300 | SS-100          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 本 体 重 量           | 25kg                                                                  | 10kg                                                                                                         | 約1.5kg | 約1.0kg          |
| 耐 荷 量             | 100kg                                                                 | 100kg                                                                                                        | 100kg  | 100kg           |
| 走 行 速 度<br>(無負荷時) | 1.0km/h                                                               | —                                                                                                            | —      | —               |
| 昇降ストローク           | 2.0m                                                                  | 2.3m                                                                                                         | —      | 580mm           |
| 平均昇降速度<br>(無負荷時)  | 55mm/秒                                                                | 45mm/秒                                                                                                       | —      | —               |
| 動 力 電 源           | DC24V (バッテリー搭載)                                                       | DC24V (バッテリー搭載)                                                                                              | —      | —               |
| 充 電 器 入 力         | AC100-120V 1.0A                                                       | AC100-120V 1.0A                                                                                              | —      | —               |
| 充 電 器 出 力         | DC24V 1.5A                                                            | DC24V 1.5A                                                                                                   | —      | —               |
| バ ッ テ リ ー         | 12V5.0A×2個<br>密閉型鉛蓄電池                                                 | 12V5.0A×2個<br>密閉型鉛蓄電池                                                                                        | —      | —               |
| 操 作 方 法           | 赤外線リモコン                                                               | 赤外線リモコン                                                                                                      | 手動操作   | 手動操作            |
| そ の 他 機 能         | 非常降下機能付き(手動)／<br>緊急停止機能付き(ひもスイッチ)／<br>高速落下時ロック機能付き／<br>下降時ベルト緩み検知機能付き | ストラップ緩み検知・乱巻き防止機能／過速度検知／<br>スロースタート・ストップ／緊急停止装置／<br>バッテリー残量(アラーム機能搭載)／自動電源OFF機能／<br>緊急降下装置(手動)／免荷量表示計(オプション) | —      | 高さ調整用<br>クリップ付き |

### ■TGシリーズ 製品仕様

|           | TG-800                                        | TG-1000                                       |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 寸法 (高さ)   | 1,960~2,420mm                                 | 1,960~2,420mm                                 |
| ( 幅 )     | 940mm (内寸800mm)                               | 1,140mm (内寸1,000mm)                           |
| (奥行)      | 1,280mm                                       | 1,280mm                                       |
| 本 体 ・ 脚 部 | 材質:鉄                                          | 材質:鉄                                          |
| 本 体 重 量   | 48kg                                          | 52kg                                          |
| 耐 荷 量     | 100kg                                         | 100kg                                         |
| 充 電 器 入 力 | AC100V-240V-50/60Hz                           | AC100V-240V-50/60Hz                           |
| 充 電 器 出 力 | DC29.4V 0.8A                                  | DC29.4V 0.8A                                  |
| バ ッ テ リ ー | リチウムイオン電池 BAL50<br>入力電源 29.4V<br>出力電源 25.2VDC | リチウムイオン電池 BAL50<br>入力電源 29.4V<br>出力電源 25.2VDC |

### ■SPシリーズ 製品仕様

|           | SP-2000                             |
|-----------|-------------------------------------|
| (高さ)      | 2,700mm                             |
| 寸法 ( 幅 )  | 1,100mm<br>(幅1,000mmまでのトレッドミルが使用可能) |
| (奥行)      | 1,310mm                             |
| 本 体 ・ 脚 部 | 材質:鉄                                |
| 本 体 重 量   | 115kg                               |
| 耐 荷 量     | 100kg                               |
| 動 力 電 源   | 使用電圧 AC100V-50/60Hz<br>消費電力 56W     |

### ■PP-Tread 製品仕様

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 寸法 (歩行高)  | 120mm                                        |
| ( 幅 )     | 740mm                                        |
| (長 さ)     | 1,600mm                                      |
| 走行面 ( 幅 ) | 510mm                                        |
| (長さ)      | 1,235mm                                      |
| 本 体 重 量   | 約60kg (手すり約16.5kg)                           |
| 速 度       | 0.2~6.4km/h                                  |
| 計 器 表 示   | 速度／距離／消費カロリー／ステップ数                           |
| 最大使用体重    | 182kg                                        |
| 使 用 電 圧   | AC100V 15A 50/60Hz ※常時1500W供給可能な単独アース付きコンセント |
| その他の機能    | 安全キー／モバイル充電用USB端子                            |

### ■POPO Li 製品仕様

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 吊り上げ質量    | 100kg                                         |
| 吊り上げ距離    | 590mm~1,360mm                                 |
| 操 作 方 法   | コントローラーボタン／介助者用手元スイッチ                         |
| 入 力 電 源   | AC100V-240V-50/60Hz                           |
| 出 力 電 源   | DC24V                                         |
| 安 全 機 能   | 緊急停止ボタン<br>非常降下スイッチ (EMERGENCY)               |
| 本 体 ・ 脚 部 | 材質:鉄                                          |
| 本 体 質 量   | 35kg                                          |
| 充 電 器 入 力 | AC100V-240V-50/60Hz                           |
| 充 電 器 出 力 | DC29.4V 0.8A                                  |
| バ ッ テ リ ー | リチウムイオン電池 BAL50<br>入力電源 29.4V<br>出力電源 25.2VDC |

製造発売元  MORITOH CORPORATION  
**株式会社 モリトー**

お客様相談室  
[24時間受付]  
モリトーホームページ  
Email

 **0120-65-2525**  
<http://www.moritoh.co.jp>  
[info@moritoh.co.jp](mailto:info@moritoh.co.jp)



■本 社／〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555

■札幌営業所／〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101

TEL (011) 708-5200 FAX (011) 708-5201

■仙台営業所／〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22

TEL (022) 302-7914 FAX (0586) 72-4555

■埼玉営業所／〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103

TEL (048) 753-9393 FAX (03) 3777-1649

■中部営業所／〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555

■大阪営業所／〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンバクトオフィスB号

TEL (06) 6785-7202 FAX (06) 6785-7203

■岡山営業所／〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉30-102

TEL (086) 259-2910 FAX (0586) 72-4555

■福岡営業所／〒811-1204 福岡県那珂川市片縄東1-12-1

TEL (092) 953-1892 FAX (092) 953-1973

■東京有明  
ジョー・ルーム／〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イースタワー9階2号室

TEL (03) 5531-5555 FAX (03) 5531-5550

■信濃大町  
研修センター／〒398-0001 長野県大町市大字平22393

TEL (0261) 23-1678



製品価格表

※取付け工事費が別途必要です。 機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承が必要です。 P/B/L/2.5

介護リフト つるべー・安全懸架 T A N－P O P O 価格一覧

| 商品名1                             | 商品名2      | 希望小売価格  | 2025年4月改定 | 税込価格    | 税   |
|----------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----|
| 介護リフトつるべーF1セット                   | ステンレスアーム付 | 611,000 | 662,600   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべーF1セット(SKK)              | ステンレスアーム付 | 684,000 | 742,900   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべーF2Rセット                  | ステンレスアーム付 | 678,000 | 736,300   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべーF2Rセット(SKK)             | ステンレスアーム付 | 742,000 | 806,700   |         | 非課税 |
|                                  |           |         |           |         |     |
| 介護リフトつるべーBセット                    | ステンレスアーム付 | 599,000 | 649,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべーBWセット(検定付)ステンレスアーム      | ステンレスアーム付 | 819,000 | 869,400   |         | 非課税 |
|                                  |           |         |           |         |     |
| 介護リフトつるべーG2Rセット                  | ステンレスアーム付 | 513,000 | 554,800   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべーU1セット                   | ステンレスアーム付 | 598,000 | 648,300   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべーU2Rセット                  | ステンレスアーム付 | 661,000 | 717,600   |         | 非課税 |
|                                  |           |         |           |         |     |
| 介護リフトつるべー Y6セット                  |           | 568,000 | 596,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6Wセット(検定付)            |           | 788,000 | 816,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6Tセット                 | 手すり付      | 666,000 | 694,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6TWセット(検定付)           | 手すり付      | 886,000 | 914,400   |         | 非課税 |
|                                  |           |         |           |         |     |
| 介護リフトつるべー Y4セット                  |           | 528,000 | 554,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4Wセット(検定付)            |           | 748,000 | 774,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4Tセット                 | 手すり付      | 626,000 | 652,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4TWセット(検定付)           | 手すり付      | 846,000 | 872,400   |         | 非課税 |
|                                  |           |         |           |         |     |
| 介護リフトつるべー Y6セット Li-PINK          |           | 657,000 | 689,800   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6Wセット(検定付) Li-PINK    |           | 877,000 | 909,800   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6Tセット Li-PINK         | 手すり付      | 755,000 | 787,800   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6TWセットLi-PINK (検定付)   | 手すり付      | 975,000 | 1,007,800 |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6 Li-PINK safety robo |           | 748,000 | 785,400   |         | 非課税 |
|                                  |           |         |           |         |     |
| 介護リフトつるべー Y4セット Li-PINK          |           | 621,000 | 652,000   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4Wセット(検定付) Li-PINK    |           | 841,000 | 872,000   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4Tセット Li-PINK         | 手すり付      | 719,000 | 750,000   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4TWセットLi-PINK (検定付)   | 手すり付      | 939,000 | 970,000   |         | 非課税 |
|                                  |           |         |           |         |     |
| 介護リフトつるべー Y4・Y6セット専用手すり          |           | 98,000  | 98,000    | 107,800 | 税込  |
|                                  |           |         |           |         |     |
| 車搭載型介護リフト V-LIFT                 |           | 680,000 | 680,000   |         | 非課税 |
|                                  |           |         |           |         |     |
| リフト用デジタル体重計 検定付                  | MHS2600   | 220,000 | 220,000   | 242,000 | 税込  |
| リフト用デジタル体重計 検定無し                 | MHS2600   | 180,000 | 180,000   | 198,000 | 税込  |
|                                  |           |         |           |         |     |
| 車椅子用つるべーベルト(黒輪・金具付セット)           |           | 22,500  | 22,500    | 24,750  | 税込  |
|                                  |           |         |           |         |     |
| Cセット用スリングシート ハーフ                 | PAO170    | 30,000  | 30,000    | 33,000  | 税込  |
| Cセット用スリングシート フル                  | PAO180    | 30,000  | 30,000    | 33,000  | 税込  |
|                                  |           |         |           |         |     |
| スリング パオハーフ                       | PAO100    | 47,000  | 47,000    | 51,700  | 税込  |
| スリング パオフル                        | PAO120    | 58,000  | 58,000    | 63,800  | 税込  |
| スリング パオロング                       | PAO130    | 61,000  | 61,000    | 67,100  | 税込  |
| スリング パオメッシュブルー ハーフ               | PAO140    | 42,000  | 42,000    | 46,200  | 税込  |
| スリング パオメッシュブルー フル                | PAO150    | 52,000  | 52,000    | 57,200  | 税込  |
| 休足スリング                           | PAO160    | 19,000  | 19,000    | 20,900  | 税込  |

介護リフト つるべー・安全懸架 T A N - P O P O 価格一覧

| 商品名1                     | 商品名2               | 希望小売価格  | 2025年4月改定 | 税込価格    | 税  |
|--------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|----|
| スリング エウアーフ中              | EVE210             | 42,000  | 42,000    | 46,200  | 税込 |
| スリング エウアーフ小              | EVE220             | 42,000  | 42,000    | 46,200  | 税込 |
| スリング エウアフル中              | EVE240             | 52,000  | 52,000    | 57,200  | 税込 |
| スリング エウアフル小              | EVE250             | 52,000  | 52,000    | 57,200  | 税込 |
| スリング エウアネックサポ-ト          | EVE260             | 13,000  | 13,000    | 14,300  | 税込 |
| スリング ハオメッシュグレー フル 中      | PAO340             | 52,000  | 52,000    | 57,200  | 税込 |
| スリング ハオメッシュグレー フル 小      | PAO350             | 52,000  | 52,000    | 57,200  | 税込 |
|                          |                    |         |           |         |    |
| ぶらん歩 S                   |                    | 43,000  | 43,000    | 47,300  | 税込 |
| ぶらん歩 M                   |                    | 43,000  | 43,000    | 47,300  | 税込 |
| ぶらん歩 L                   |                    | 43,000  | 43,000    | 47,300  | 税込 |
|                          |                    |         |           |         |    |
| 移座えもんホ-ドブルー              | 「介護の技術を変えよう！」QR付   | 16,000  | 16,000    | 17,600  | 税込 |
| 移座えもんホ-ド ホワイ1000         | 45*100             | 18,000  | 18,000    | 19,800  | 税込 |
| 移座えもんホ-ド ホワイ800 30*80    |                    | 9,000   | 9,000     | 9,900   | 税込 |
|                          |                    |         |           |         |    |
| 移座えもんグローブ                |                    | 2,000   | 2,000     | 2,200   | 税込 |
|                          |                    |         |           |         |    |
| 移座えもんシート BLACK M         |                    | 3,000   | 3,000     | 3,300   | 税込 |
| 移座えもんシート BLACK ML        |                    | 5,500   | 5,500     | 6,050   | 税込 |
| 移座えもんシート BLACK L         |                    | 7,500   | 7,500     | 8,250   | 税込 |
| 移座えもんシート BLACK S         |                    | 2,500   | 2,500     | 2,750   | 税込 |
|                          |                    |         |           |         |    |
| 移座えもんシーグロ                |                    | 4,000   | 4,000     | 4,400   | 税込 |
|                          |                    |         |           |         |    |
| 移座えもんローラ ROLA-1000       | 1000*500           | 50,000  | 50,000    | 55,000  | 税込 |
| 移座えもんローラ ROLA-1800       | 1800*500           | 79,500  | 79,500    | 87,450  | 税込 |
| 移座えもんパッド                 | 50*100(延長ストラップ2本付) | 18,000  | 18,000    | 19,800  | 税込 |
| 移座えもんヒップベルト              |                    | 12,000  | 12,000    | 13,200  | 税込 |
|                          |                    |         |           |         |    |
| 安楽キャリー AAタイプ 一体型         | ア-ムレスト付            | 142,000 | 156,200   | 171,820 | 税込 |
| 安楽キャリー Bタイプ 分離型          | ア-ムレスト付            | 218,000 | 239,800   | 263,780 | 税込 |
| 安楽キャリー-Bタイプ 穴あき座面付       |                    | 232,000 | 255,200   | 280,720 | 税込 |
|                          |                    |         |           |         |    |
| 安楽キャリー用ア-ムレスト            | 2本組A・B兼用           | 19,500  | 21,400    | 23,540  | 税込 |
| 安楽キャリーA・AAタイプ用補助ベルト      |                    | 2,400   | 2,600     | 2,860   | 税込 |
| 安楽キャリーBタイプ用補助ベルト         |                    | 2,400   | 2,600     | 2,860   | 税込 |
| 安楽キャリーBタイプ用ツルベルト(ラダータイプ) | 4本組                | 9,600   | 10,500    | 11,550  | 税込 |
| 安楽キャリーA・AAタイプ用ネックサポ-ト    |                    | 6,200   | 6,800     | 7,480   | 税込 |
| 安楽キャリーBタイプ用ネックサポ-ト       |                    | 6,200   | 6,800     | 7,480   | 税込 |
|                          |                    |         |           |         |    |
| 安楽キャリー座面シート交換用 B用        |                    | 7,500   | 8,200     | 9,020   | 税込 |
| 安楽キャリー背面シート交換用 B用        |                    | 7,500   | 8,200     | 9,020   | 税込 |
| 安楽キャリー座面シート交換用 AA用       |                    | 7,500   | 8,200     | 9,020   | 税込 |
| 安楽キャリー背面シート交換用 AA用       |                    | 7,500   | 8,200     | 9,020   | 税込 |
| 安楽キャリーB用穴あき座面シート         |                    | 19,200  | 21,100    | 23,210  | 税込 |
| 安楽キャリーB用穴あき座面用背面シート      |                    | 9,800   | 10,700    | 11,770  | 税込 |
|                          |                    |         |           |         |    |
| 安楽キャリー用安全ベルト大            |                    | 4,200   | 4,600     | 5,060   | 税込 |
| 安楽キャリー用安全ベルト小            |                    | 4,200   | 4,600     | 5,060   | 税込 |
| 延長ハ-200mm                | 2本組                | 6,500   | 7,100     | 7,810   | 税込 |

介護リフト つるべー・安全懸架 T A N－P O P O 価格一覧

| 商品名1                         | 商品名2                              | 希望小売価格    | 2025年4月改定 | 税込価格      | 税   |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 延長ハ―150mm                    | 2本組                               | 6,500     | 7,100     | 7,810     | 税込  |
|                              |                                   |           |           |           |     |
| 安楽キャリーA・AAタイプ用シートカバー         | A30                               | 3,500     | 3,800     | 4,180     | 税込  |
| 安楽キャリーBタイプ用シートカバー            | B70                               | 3,500     | 3,800     | 4,180     | 税込  |
| 安楽キャリーホ―シート                  | A・B兼用                             | 11,000    | 12,000    | 13,200    | 税込  |
| 安楽キャリー用 フレ―ムRカバー B用          | 2枚1組                              | 3,500     | 3,800     | 4,180     | 税込  |
| 安楽キャリー用 フレ―ムRカバー A用          | 2枚1組                              | 3,500     | 3,800     | 4,180     | 税込  |
| 安楽キャリーフットレストシート              |                                   | 6,000     | 6,600     | 7,260     | 税込  |
|                              |                                   |           |           |           |     |
| 介護リフト付きホ―ロ―浴槽 OCTBATH        |                                   | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,310,000 | 税込  |
| 介護リフト付きホ―ロ―浴槽 OCTBATH[Aセット]  |                                   | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,475,000 | 税込  |
| 介護リフト付きホ―ロ―浴槽 OCTBATH[Bセット]  |                                   | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,530,000 | 税込  |
|                              |                                   |           |           |           |     |
| 免荷式歩行リフト POPO Li REH-100     |                                   | 898,000   | 942,000   |           | 非課税 |
| 免荷式歩行リフト POPO Li LIV-100     |                                   | 872,000   | 915,000   |           | 非課税 |
| 免荷式歩行リフト POPO Li REH-200     | サイド手すり付                           | 997,800   | 1,047,000 |           | 非課税 |
| 免荷式歩行リフト POPO Li LIV-200     | サイド手すり付                           | 971,800   | 1,020,000 |           | 非課税 |
| POPO LIV脚部                   |                                   | 72,000    | 75,000    | 82,500    | 税込  |
| POPO REH脚部                   |                                   | 98,000    | 102,000   | 112,200   | 税込  |
| POPO サイド手すり                  |                                   | 99,800    | 105,000   | 115,500   | 税込  |
| POPO ハイ―ム                    |                                   | 66,000    | 69,000    | 75,900    | 税込  |
| ワイヤレススイッチ HB200              | ※TG,POPO Li,OCTBATH,Y6 Li-PINK使用可 | 25,000    | 25,000    | 27,500    | 税込  |
|                              |                                   |           |           |           |     |
| 免荷式リハビリテーションリフトTG-1000       |                                   | 1,480,000 | 1,628,000 | 1,790,800 | 税込  |
| 免荷式リハビリテーションリフトTG-800        |                                   | 1,359,000 | 1,490,000 | 1,639,000 | 税込  |
| 免荷式リハビリテーションリフトSP-2000       |                                   | 2,500,000 | 都度見積り     | －         | 税込  |
| TG用サイドグリップ                   |                                   | 195,000   | 195,000   | 214,500   | 税込  |
| MORITOH PP-Tread SW-1200(※1) | (パネル支柱含む)                         | 700,000   | 700,000   | 770,000   | 税込  |
| MORITOH PP-Tread 専用シリコンスプレー  | OIL-900                           | 900       | 900       | 990       | 税込  |
| MORITOH PP-Tread 専用シリコンオイル   | 1Kg                               | 6,000     | 6,000     | 6,600     | 税込  |
|                              |                                   |           |           |           |     |
| ハ―ネスス―パ―ライト S                | SL-110                            | 35,000    | 36,750    | 40,425    | 税込  |
| ハ―ネスス―パ―ライト M                | SL-120                            | 35,000    | 36,750    | 40,425    | 税込  |
| ハ―ネスス―パ―ライト L                | SL-130                            | 35,000    | 36,750    | 40,425    | 税込  |
| ハ―ネス ライト S POPO用 OR SP用      | L-110                             | 46,000    | 48,300    | 53,130    | 税込  |
| ハ―ネス ライト M POPO用 OR SP用      | L-120                             | 46,000    | 48,300    | 53,130    | 税込  |
| ハ―ネス ライト L POPO用 OR SP用      | L-130                             | 46,000    | 48,300    | 53,130    | 税込  |
| ハ―ネス ハイブリット SS POPO用 OR SP用  | HV-100                            | 58,000    | 60,900    | 66,990    | 税込  |
| ハ―ネス ハイブリット S POPO用 OR SP用   | HV-110                            | 58,000    | 60,900    | 66,990    | 税込  |
| ハ―ネス ハイブリット M POPO用 OR SP用   | HV-120                            | 58,000    | 60,900    | 66,990    | 税込  |
| ハ―ネス ハイブリット L POPO用 OR SP用   | HV-130                            | 58,000    | 60,900    | 66,990    | 税込  |
| ハ―ネス ハイブリット LL POPO用 OR SP用  | HV-140                            | 58,000    | 60,900    | 66,990    | 税込  |
| ハ―ネスベスト(TSV) M               | V-120                             | 58,000    | 60,900    | 66,990    | 税込  |
| ハ―ネスベスト(TSV) L               | V-130                             | 58,000    | 60,900    | 66,990    | 税込  |
|                              |                                   |           |           |           |     |
| じょきん娘 トリカータイプ 300ml          |                                   | 2,600     | 2,850     | 3,135     | 税込  |

(※1)商品は在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。