

リピンク

セーフティー・ロボ

3年保証※1

Y6セット Li-PINK Safety Robo

耐荷重
120kg

床走行式リフトが
ロボット化!

吊り具掛け忘れ確認装置は、センサー、制御系、駆動系の要素を有する機械システムです。

音声のお知らせで

安全・安心に

「吊り具の安全を
確認してください」

吊り具の掛け忘れ確認装置
(音声ガイド)搭載
音量調整付き

吊り具の掛け忘れ、掛け間違いを未然に防止いただけます

吊り上げ時、約20kgの重さを感じるとリフトが一旦止まり、安全確認のための音声ガイドが流れます。確認後上昇ボタンを押すことで再度上昇を開始します。モーターを最大まで上げた際も、下降時に一旦リフトが止まり、音声ガイドが流れます。吊り具の掛け忘れ、掛け間違いを自動で修正するものではありません。体重約20kg以下の方でも、リフトはご使用いただけますが、音声ガイドは機能しません。

※1 すべての保証するものではありません。詳しくは製品保証書をご確認ください。

リチウムイオン電池搭載

- 軽い
- コンパクト
- 容量・性能アップ
2倍(当社比)




押し易くなった
緊急停止ボタン




リチウムイオン電池を
充電器にセットするだけ
本体充電ではありません

専用充電器で充電。充電場所を選びません。

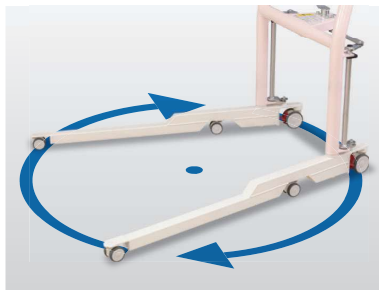

6輪キャスターで
軽々自在に小回り回転

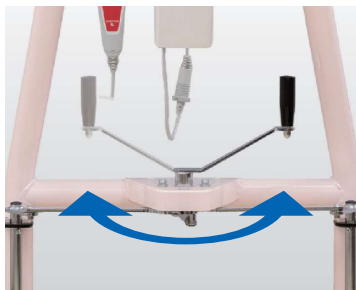

脚部は片手で軽く
2秒で開閉



広い
開放空間

身体を引きずらず
自然な動きで吊上げます

リフト用デジタル体重計 MHS-2600 (検定付)



つるべに乗ったまま体重測定が可能。
体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。
BMI(体格指数)機能があり、栄養管理にも使用されています。


- 最小単位/100g
 - 電源/アルカリ単4乾電池6本
 - 風袋除去機能付き
- ※B・BBセット、Y4・Y6セット、TENにお付けできます。



Y6セット Li-PINK Safety Robo 製品仕様

Y6セット Li-PINK Safety Robo 外観寸法図

(単位:mm)

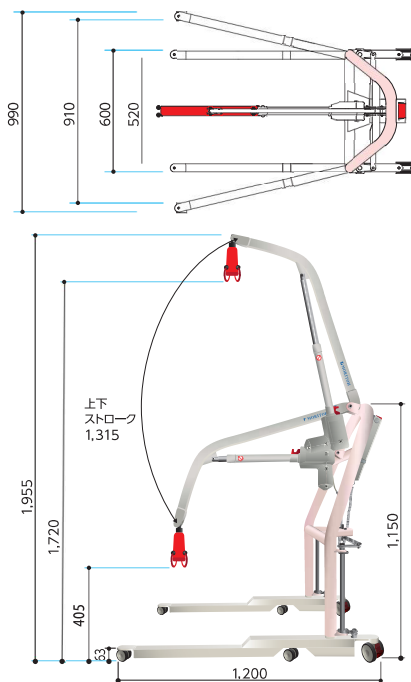

Y6セット Li-PINK Safety Robo 仕様

昇降速度 上昇	36.3mm/sec
昇降速度 下降	37.2mm/sec
耐荷重	120kg
上下ストローク	約1,315mm
吊上げ高さ (最高)	床より 1,720mm
(最低)	床より 405mm
体重計装着時(最高)	床より 1,560mm
(最低)	床より 245mm
材 質	スチール

搭載機能

緊急停止ボタン/エマージェンシースイッチ/クイックリリース/挟み込み防止/バッテリー残量表示/音量調整on/off

リチウムイオン電池仕様

型 式	BAL50
出力電源	25.2VDC
入力電源	29.4V
防水性能	IPX6
重 量	0.9kg

つるべY6セット Li-PINK Safety Robo	¥748,000 (非課税)
つるべ体重計付Y6Wセット Li-PINK Safety Robo	¥948,000 (非課税)
リチウムイオン電池	¥41,800 (税込)
リフト用体重計(単品)	¥220,000 (税込)



つるべ Y6 セット Li-PINK
¥598,000 (非課税)

製 造
発売元



■ 本 社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

お客様相談室
[24時間受付] 0120-65-2525

ホームページ モリトー で検索!

E-mail info@moritoh.co.jp

■札幌営業所 ■埼玉営業所 ■中部営業所 ■岡山営業所
■仙台営業所 ■東京営業所 ■大阪営業所 ■福岡営業所

販売店