



モリトー 介護リフトつるべー 製品仕様

■ つるべー標準仕様

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 昇降速度 上昇 (850mmアーム) | 31.7mm/sec |
| 昇降速度 下降 (850mmアーム) | 37.1mm/sec |
| 耐荷重 | 100kg |
| 上下ストローク (700/850/950mmアーム) | 955/1160/1300mm |
| ハンガーフック間距離 (外寸法)※1 | 500 (560)mm |
| 材 質 | スチール・ステンレス (SUS304) |

※1 ハンガーフック間距離は、オプション (別売) にて、380と430mm仕様があります

■ つるべーY4・Y6セット仕様

| | |
|---------|------------|
| 昇降速度 上昇 | 36.3mm/sec |
| 昇降速度 下降 | 37.2mm/sec |
| 耐荷重 | 120kg |
| 材 質 | スチール |

■ つるべーBB1セット仕様

| | |
|---------|----------|
| 昇降速度 上昇 | 21mm/sec |
| 昇降速度 下降 | 21mm/sec |
| 耐荷重 | 120kg |
| 材 質 | スチール |

■ つるべー電装品仕様

| 品目 | 形式 | 入力電源 | 出力電源 | 重量 | コード長さ | 防水性能 | 定格 | 備考 |
|-----------------|-------|-------|---------|--------|---------------|------|-----|--------------|
| モーター | LA32 | 24V | - | 3.4kg | 0.4mコイル | IPX6 | 10% | 6000N/最大電流6A |
| スイッチ | HB31 | 24V | - | 0.26kg | 0.6mコイル | IPX6 | - | - |
| コントローラー | CO71 | 100V | 24VDC | - | - | - | - | - |
| コントローラー | CB08 | 100V | 24VDC | 1.4kg | 5.1mストレート | IPX6 | 5% | AC電源設定のみ |
| コントローラー | CB12 | 100V | 24VDC | 3.5kg | 3.2mストレート | IPX6 | 10% | バッテリー内蔵型 |
| Y4・Y6専用モーター | LA34 | 24V | - | 4.2kg | 0.4 (0.2m)コイル | IPX6 | 10% | 10000N |
| Y4・Y6専用コントローラー | CBJ2 | 100V | 24VDC | 0.54kg | - | IPX4 | 10% | バッテリー残量表示 |
| Y4・Y6専用バッテリーバック | BAJ1 | - | 24VDC | 2.7kg | - | IPX4 | - | - |
| Sセットモーター | LA34 | 24V | - | 3.83kg | 0.4mコイル | IPX6 | 10% | 10000N |
| Sセットスイッチ | HB31 | 24V | - | 0.26kg | 0.4mコイル | IPX6 | - | - |
| Sセットコントローラー | CB12 | 100V | 24VDC | 2.33kg | 3.2m | IPX6 | 10% | - |
| リチウムイオン電池 | BAL50 | 29.4V | 25.2VDC | 0.9kg | - | IPX6 | - | - |

バッテリータイプ (CB12) 小型シール蓄電池NP1.2-12.12V、1.2Ahを2台使用
(CBJ2) 小型シール蓄電池ES2.9-12.12V、2.9Ahを2台使用

■ つるべーBB1・オクトバス・Y4・Y6セットLi-PINK電装品仕様

| 品目 | 型 式 | 入力電源 | 出力電源 | 防水性能 | 備 考 |
|---------|-------|-------|---------|------|--------|
| モーター | LA34 | 24V | - | IPX6 | 10000N |
| スイッチ | HB31 | 24V | - | IPX6 | - |
| チャージャー | CHL50 | 100V | 29.4VDC | IPX4 | - |
| バッテリー | BAL50 | 29.4V | 25.2VDC | IPX6 | 2.6Ah |
| コントローラー | COL50 | 100V | 29.4VDC | IPX6 | - |

■ つるべーCセット V-Lift電装品仕様

| 品目 | 入力電源 | 防水性能 | 定格 | 備考 |
|-----------------|------|------|-----|-------------------|
| モーター | 24V | IPV6 | 10% | 10000N/最大電流7.7A |
| コントローラー | 12V | - | 10% | アクセサリソケット給電 |
| ワイヤレススイッチ (2型付) | - | - | - | ボタン電池 CR2016×2個使用 |

- コントローラーの全タイプに過負荷保護回路を設定。過負荷でモーター電源を遮断
- コントローラーのバッテリータイプには、バッテリー残量警報を設定。残量50%でアラーム音作動
- コントローラーの全タイプのトランス内にヒューズの設置。1次側電源ヒューズ2A

■ つるべーTEN仕様


| | |
|-------------|--------------------|
| 走行方式 | C450 手動走行 |
| 本体重量 | 10kg |
| 積載重量 | 204kg |
| 昇降ストローク | 2030mm |
| 昇降速度 | 45mm/秒 |
| 動力電源 | DC24V (バッテリー搭載) |
| 充電器入力 | AC100-120V 1.0A |
| 充電器出力 | DC24V 1.5A |
| 充電方法 | レールの端で自動充電 |
| バッテリー | 12V5.0A×2個 密閉型鉛蓄電池 |
| バッテリー残量表示 | 液晶/LED (赤) 警告アラーム |
| 操作方法 | 上下押し続けボタン方式 |
| ペンダントスイッチ | 空気圧式 |
| 赤外線リモコン | ○ |
| ストラップ緩み検知 | ○ |
| 過速度検知 | ○ |
| スロースタートストップ | ○ |
| オートリターン機構 | ○ |
| 節約モード | ○ |
| 乱巻き防止 | ○ |
| 緊急降下装置 | ○ (電動と手動があり) |
| 緊急停止装置 | ○ |

■ つるべーCセット V-Lift仕様

| | |
|---------|-------|
| 上下ストローク | 985mm |
| 耐荷重 | 100kg |
| 材 質 | スチール |

■ オクトバス浴槽仕様


| | |
|-----------|----------------|
| サイズ (外寸法) | 1400×700×550mm |
| サイズ (内寸法) | 1280×570×470mm |
| 容 量 | 満水265ℓ |
| 本体重量 | 110kg |

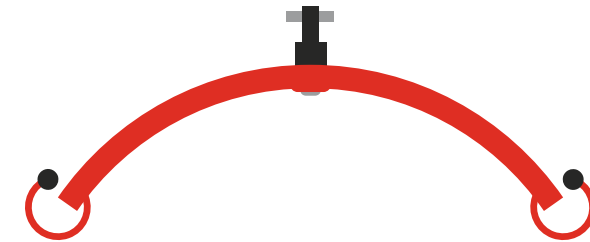

NURSING LIFT

介護リフト

つるべー
TSURUBE
LINEUP

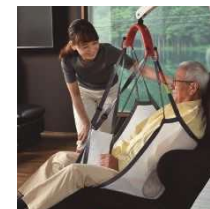

製品価格表



製造発売元

■本 社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

■札幌営業所 / 〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101
 ■仙台営業所 / 〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22
 ■埼玉営業所 / 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103
 ■中部営業所 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36
 ■大阪営業所 / 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンパウトオフィスB号
 ■岡山営業所 / 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉30-102
 ■福岡営業所 / 〒811-1204 福岡県那珂川市片縄東1-12-1
 ■東京有明 / 〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー9階2号室
 ■徳島大町 / 〒398-0001 徳島県大町市大字平22393

お客様相談室
[24時間受付]
モリトーホームページ
Email

0120-65-2525

http://www.moritoh.co.jp
info@moritoh.co.jp
TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555

TEL (011) 708-5200 FAX (011) 708-5201
 TEL (022) 302-7914 FAX (0586) 72-4555
 TEL (048) 753-9393 FAX (03) 5531-5550
 TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555
 TEL (06) 6785-7202 FAX (06) 6785-7203
 TEL (086) 259-2910 FAX (0586) 72-4555
 TEL (092) 953-1892 FAX (092) 953-1973
 TEL (03) 5531-5555 FAX (03) 5531-5550
 TEL (0261) 23-1678

販売店



耐荷重
120kg

新商品 つるべー BB1セット

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)

耐荷重120kg。超薄型ベースでスムーズ移乗



つるべー BB1セット

BWセット・BBWセットは体重計付きです。

紹介動画



外観寸法





BB1セットの特徴

- 最大使用体重は120kg、360度回転。
- ベッドを乗せるベースの高さはわずか3mmで、ベッドの高さには影響はありません。病院や施設のキャスター付きベッドの場合は、ベッドを押すだけで簡単にリフトとドッキングすることができます。
- アームの長さは950mmで、支柱(回転ポスト)は、介助の邪魔にならないようベッド四隅の端に設置できます。
- 蹴込部分を奥に配置することで足先が当たりなく設計。病院、施設、在宅介護に最適な設置型介護リフトです。



360度回転アーム

置き場所で様々な使い方が可能になります。

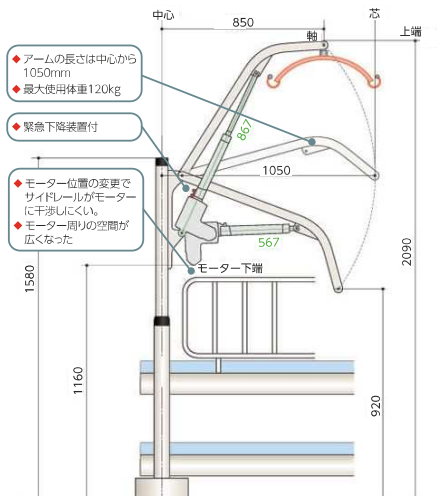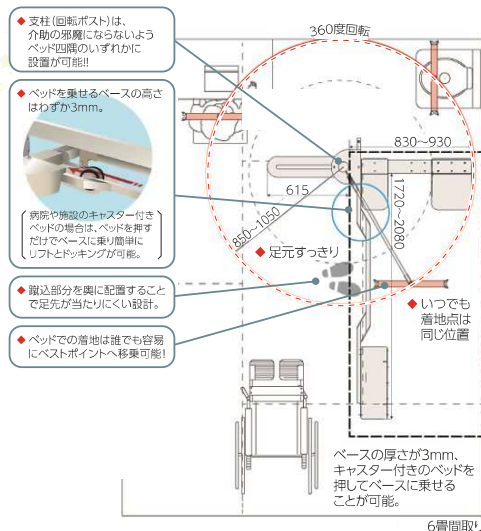

リフト用デジタル体重計 MHS-2600

つるべーに乗ったまま体重測定が可能。

体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。
BMI(体格指数)機能があり、体重管理にも使用されています。
※B-BBセット、Y4-Y6セット、TENICに取付できます。
※レンタル仕様では検定なしになります。

- 最小単位/100g
- 電源/アルカリ単4乾電池6本
- 風速引き機能付き

検定付

耐荷重
204kg

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト

つるべー TEN

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)

レールの長さで移動範囲のニーズに対応できます。



設置式(XY型)

設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。

据置式の特徴

- 工事の必要がない仕様や壁面固定の後施工も可能。据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がご用意です。



スプリングハンガーを使用したSSシリーズも設置可能です。



据置式(2ポスト)



C-450(手動走行)

コンパクトな高性能レール走行リフト

- 操作性の良い防滴ハンドスイッチ。
 - バッテリー残量やリフトの状態を見やすい液晶ディスプレイ。
 - 安全・安心設計
- オープン価格 無線リモコンタイプもございます。

耐荷重
100kg

楽しいカーライフを満喫できる車搭載型介護リフト

つるべー Cセット V-Lift

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。

紹介動画




つるべー Cセット V-Lift

Cセットの特徴

- クルマのシートに座れるため安全で、介助者の目も行き届きます。
- 助手席、後部2列目席のどのシートにも移乗可能で、座る場所が限定されません。
- 女性でも簡単に着脱可能で、コンパクトに収納できます。
- 走行時は取り外しておくことで邪魔になりません。



後部座席移乗イメージ

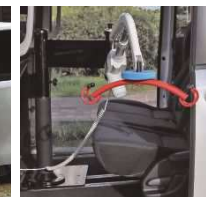

V-Lift 取付イメージ



V-Lift カバー

※つるべーCセットには、スリング(バオショート(フルタイプ))またはバオショート(ハーフタイプ)のいずれかを組み合わせた構成となっています。

足元の開放と、旋回性の向上を追求した床走行式リフト


つるべー Y4・Y6 Safety Roboセット

小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます。
床からの移乗にも適しています。

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)


つるべー Y4・Y6 Safety Roboセット 専用手すり

- 手すりの高さの位置は4段階で調整可能です。
- 動き始め等のご本人の揺れを、手すりを握ることで軽減します。

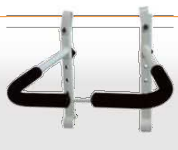


Y6セット(6輪)の特徴

- 脚部前方の高さ63mmで低床ベッドに対応。6輪自在キャスターによりその場での旋回が可能。狭いお部屋での取り回しが楽です。

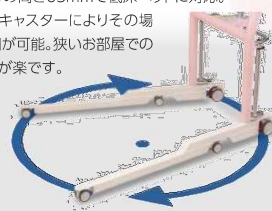

Y4セット(4輪)の特徴

- 床材の影響を受けにくい大きい(75φ)前輪キャスターを採用しているため、前進・後進がとてもスムーズ。軽く移動が行えます。

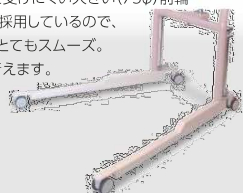

Y4、Y6セット Li-PINKの特徴

- リチウムイオンバッテリーを搭載することにより
 - バッテリー軽量化
 - 寿命UP
 - 充電忘れによる劣化が少ない
 - 充電時間が大幅短縮
 - 充電コードなしなど性能が大幅にアップしました。




Y6セット Li-PINK

Y6Tセット Li-PINK 手すり付



Y6Tセット Li-PINK 手すり付


ハーネスライトを使った端座位姿勢からの立ち上がりと歩行支援

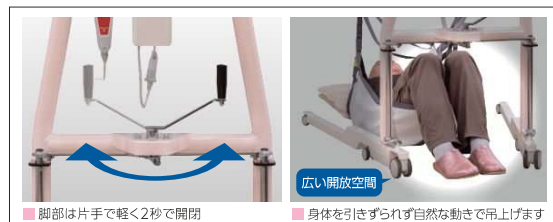


■ 脚部は片手で軽く2秒で開閉

■ 身体を引きずらず自然な動きで吊上げます

Y4セット外観寸法

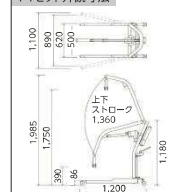

Y6セット外観寸法

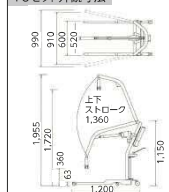

※地域により条件が異なります。
市町村窓口でご相談ください。

耐荷重
100kg

つるべーシリーズで最もコンパクトなリフト

つるべー G2Rセット U1・U2Rセット

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)

自宅の玄関が階段でも楽に外へ出ることが可能です。

紹介動画
▶▶▶



外観寸法
▶▶▶



Gシリーズ

Uシリーズ

G2Rセットの特徴

- 玄関、お風呂、トイレ、居室など様々な場所の壁に設置できます。
- 200mmの関節で可動範囲が増え、曲がり階段の段差解消にも使用できます。



つるべー G2Rセット

U1セットの特徴

- 床面に固定するリフト。壁に固定できない環境にお勧めです。支柱高1100、1350、1600mmの3種から最適な高さで設置できます。



つるべー U1セット

U2Rセットの特徴

- U1セットに関節(300mm・400mm)を追加したリフト。



車椅子用ソルベルトセット

車椅子用ソルベルトセットの特徴

- 車椅子に専用金具を付けて、車椅子に乗ったまま移動します。



車椅子用ソルベルトセット
使用可能車椅子の条件



つるべー G2Rセット

耐荷重
100kg

自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト

つるべ F1・F2Rセット

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)

ユニットバスにも設置できます。

紹介動画



外観寸法



つるべ F2Rセット

壁固定と突っ張り棒接着固定式等、様々な設置方法があり、お風呂・トイレ以外への設置も可能なリフトです。

F1セット、F1SKKセットの特徴

- コンパクトで収納性もよく、1関節アーム式なので着座位置が固定され、操作が簡単です。

F1セットとF2Rセットの違い



つるべ F1セット



つるべ F2Rセット

F2Rセット、F2RSKKセットの特徴

- 2関節アーム式なので、関節を曲げたり、伸ばしたりすることで可動範囲が広がります。脱衣場からの移乗も可能です。




つるべ F1セット



つるべ F2Rセット

F2RSKKセット外観寸法

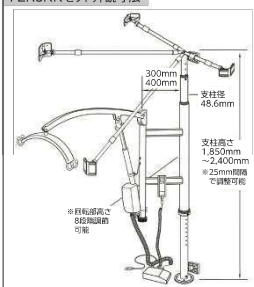

壁固定



ブラケット



受座

脱衣場から、洗い場・浴槽まで



突っ張り棒接着固定



コーナーブラケット



突っ張り棒



背面プレート



受座

介護リフト付きホーロー浴槽

OCTBATH

置くだけのオクトバス／給排水工事不要※1／電源工事不要

紹介動画



外観寸法

耐荷重
120kg
※2


※1 給湯、排水設備は必要です。 ※2 お湯を張った状態での耐荷重です。

OCTBATHの特徴

- お風呂でゆったり入浴を楽しみたい。介護者は一人でもOK。視線を合わせた優しい介助で会話も弾みます。
- 優れた熱伝導により浴槽全体で体を温められる心地よさは抜群です。表面はコインで刮っても傷が付かず湯垢やカビもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。
- ゆったり入浴できる1400×700mmの浴槽サイズにもかかわらず、内寸法1600×1600mmの浴室スペースでゆとりの入浴介助ができます。


レイアウト図一例

4,000

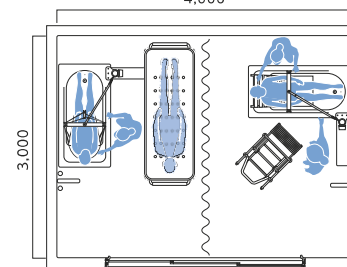

リチウムイオンバッテリー搭載

IPX6の防水リチウムイオンバッテリー搭載で煩わしい充電コードはありません。管理が簡単で、充電を忘れてもバッテリー寿命は変わりません。鉛バッテリーと比較すると、軽量で長寿命。性能は当社製品比較で2倍です。

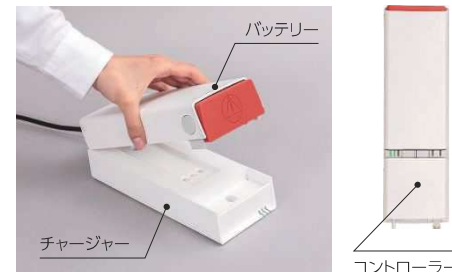

バッテリー

チャージャー

コントローラー

| | |
|--|----------------|
| 介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【一式 無料点検付き】 | ¥2,310,000(税込) |
| 介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Aセット】 無料点検付き 安楽キャリーAAタイプ+スリング2枚セット | ¥2,475,000(税込) |
| 介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Bセット】 無料点検付き 安楽キャリーBタイプ+スリング2枚セット | ¥2,530,000(税込) |

※無料点検付き：リフト動作、吊り具、浴槽設置状況のチェック、使用方法の確認(研修) 6年(1回/年)

乗りごち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

安楽キャリー

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)
※AAタイプ体型除く。縦型ハンドルで
操作しやすい紹介動画
▶▶▶外観寸法
▶▶▶


上部座部と下部台車が分離。リフトの吊り具として使用可能。※ツルベルトは同梱されます。

安楽キャリーの特徴

- シートの張りを換えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能のため小スペースでの使用も難しくなく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー(オプション)を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。



安心のフラット姿勢(AAタイプ)

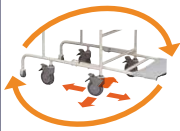補助ベルトの調整で
洗髪姿勢が容易にとれます

自由に動けます

安楽キャリーBタイプ
穴あき座面付※穴あき座面付には、オプション
延長バー(150mm/200mm)は
使用できません。

延長バー使用時



安楽キャリー専用オプション・買い替え可能消耗品

安全ベルト(大:1100mm/小:960mm)

左右の体幹バランスの不安定な方は、安全ベルトを必ずご使用ください。

背面シート(AA/B用)

座面シート(AA/B用)

補助ベルト(1本:AA/B用)

延長バー(2本組:150mm/200mm)

※穴あき座面付は使用不可

フットレストシート

ネックサポート(AA/B用)

安楽キャリーBタイプ用ツルベルト(ラダータイプ) 4本組

シートカバー(AA/B用)

フレームRカバー

穴あき座面用背面シート(B用)

穴あき座面(AA/B用)



※キャスターとアームレスト黒スポンジの買い替えにつきましては、お問合せください。

装着のしやすさと快適な乗り心地を追求した

スリング エヴァ/パオ

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)エヴァ
紹介動画
▶▶▶パオ
紹介動画
▶▶▶

エヴァ ハーフ

首や体幹の支持力が比較的高い
方に使用します。

エヴァ フル

首や体幹の支持力が比較的高い
方に使用します。頸部保持機能に
よって過屈曲を抑制。

エヴァ ネックサポート

エヴァハーフを使用されていて、
首や体幹の支持力が比較的高く
なってきた場合に使用します。※写真のエヴァフル中はなくなり次第従来のライトグレーから、アッシュグレー(少し濃いグレー)に色調を
変更いたします。エヴァハーフ中、小はアッシュグレー(少し濃いグレー)に変更しております。

エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままでも着脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水抜きが容易にできます。



パオ ハーフ

首や体幹の支持力が
比較的高い方に
使用します。

パオ フル

比較的高い首の握り方の
悪い方に使用します。

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| パオ ハーフ (PAO100) 70×100cm | 目安身長: ~180cmくらい | ¥51,700(税込) / ¥47,000(非課税) |
| パオ フル (PAO120) 70×130cm | 目安身長: ~175cmくらい | ¥63,800(税込) / ¥58,000(非課税) |
| パオ ロング (PAO130) 70×150cm | 目安身長: ~190cmくらい | ¥67,100(税込) / ¥61,000(非課税) |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 目安身長: ~180cmくらい | ¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税) |
| 目安身長: ~175cmくらい | ¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税) |
| 目安身長: ~135~150cmくらい | ¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税) |
| 目安身長: ~150~190cmくらい | ¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税) |

パオの特徴

- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能で床ずれ予防効果があります。
- ツルベルトが外せるため移乗後邪魔になりにくいです。

パオメッシュの特徴

- 編み目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも適用可能です。

休足スリング

- 水平状態でも楽に移乗できます。
- 尖足(せんそく)の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。

※スリングパオと併用して使用ください。
※スリングはリフトとセットで購入する場合はリフト
1台につき1枚が非課税になります。

パオショート

パオショートハーフ (PAO170) ¥33,000(税込) / ¥30,000(非課税)

パオショートフル (PAO180) ¥39,600(税込) / ¥36,000(非課税)



耐荷重
100kg

自立化支援と重度化防止を目的とした

スリング ハーネス

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)
※ハーネスベスト(TSV)除く。

ハーネスハイブリッド 対象者:軽度～重度者向け

大腿部を覆うタイプで多くの免荷重を必要とする方にも使用できます。座骨支持ベルトの採用で足の振出しをサポートします。そけい部への圧迫がなく快適な装着感が得られます。

| | | |
|------------|--------------------|----------------------------|
| HV-100(SS) | ウエストサイズ:約55～65cm | ¥66,990(税込) / ¥60,900(非課税) |
| HV-110(S) | ウエストサイズ:約65～75cm | ¥66,990(税込) / ¥60,900(非課税) |
| HV-120(M) | ウエストサイズ:約75～90cm | ¥66,990(税込) / ¥60,900(非課税) |
| HV-130(L) | ウエストサイズ:約90～100cm | ¥66,990(税込) / ¥60,900(非課税) |
| HV-140(LL) | ウエストサイズ:約100～110cm | ¥66,990(税込) / ¥60,900(非課税) |



ハーネスライト 対象者:軽度～中度者向け

クロッチベルトをそけい部に通すタイプで装着はとても簡単です。車いすに座った状態でも着脱が容易に行えます。クロッチベルトは脱着性と装着感の良い材質を採用しています。

| | | |
|----------|--------------------|----------------------------|
| L-110(S) | 腰骨周りサイズ:約72～86cm | ¥53,130(税込) / ¥48,300(非課税) |
| L-120(M) | 腰骨周りサイズ:約86～100cm | ¥53,130(税込) / ¥48,300(非課税) |
| L-130(L) | 腰骨周りサイズ:約100～114cm | ¥53,130(税込) / ¥48,300(非課税) |



ハーネススーパーライト 対象者:軽度者向け

※POPOでは使用できません。

懸架専用となり、転倒時のサポートとして使用します。ウエストに巻くだけのシンプル装着、後方2本ベルトは歩行の視界を妨げません。免荷機能としてはご使用頂けません。

| | | |
|-----------|-------------------|----------------------------|
| SL-110(S) | ウエストサイズ:約53～65cm | ¥40,425(税込) / ¥36,750(非課税) |
| SL-120(M) | ウエストサイズ:約68～88cm | ¥40,425(税込) / ¥36,750(非課税) |
| SL-130(L) | ウエストサイズ:約98～105cm | ¥40,425(税込) / ¥36,750(非課税) |



ハーネスベスト(TSV)

※ハーネスベスト(TSV)は刈谷豊田総合病院・東分限(リハビリテーション科)との共同開発製品です。

体幹部分は、肩甲骨内転、胸椎伸展、腹圧補助機能を有し、ハーネスハイブリッドとの組合せでのBWSTTでは、安定した歩行と体幹伸展・動揺軽減効果が得られます。単独歩行での使用も可能です。

| | |
|----------|----------------------------|
| V-120(M) | ¥66,990(税込) / ¥60,900(非課税) |
| V-130(L) | ¥66,990(税込) / ¥60,900(非課税) |

耐荷重
120kg

歩けるスリング

ぶらん歩 四角／ぶらん歩 三角

介護テクノロジー
移乗支援(非装着)紹介動画
▶▶▶


ぶらん歩でゆらゆら揺れて気分転換

ぶらん歩の特徴

- ベッド周りをアクティブな生活空間に変える!
- 1日中ベッドと車椅子で長時間過ごされている方にとっても安全な座位移動が可能で、重度者の自立化支援の第一歩となります。

| | |
|-------------|----------------------------|
| ぶらん歩 四角 | ¥47,300(税込) / ¥43,000(非課税) |
| ぶらん歩 三角 M/L | ¥47,300(税込) / ¥43,000(非課税) |

※ぶらん歩はリフトとセットで購入する場合はリフト1台に付き1枚が非課税になります。

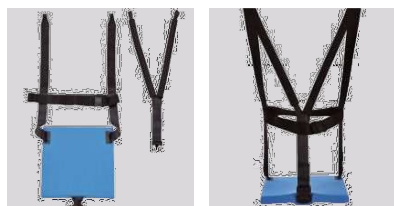


ぶらん歩 四角



ぶらん歩 三角(M)

ぶらん歩 三角(L)

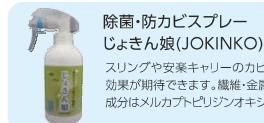除菌・防カビスプレー
じょきん娘(JOKINKO)

スリングや安楽キャリーのカビ・ウイルス対策として効果が期待できます。繊維・金属を腐食させません。成分はメルカプトピリジジオキシド系界面活性剤です。

耐荷重
100kg

シートとボードとグローブで移動・移乗


移座えもん

紹介動画
▶▶▶

移座えもんシートBLACK

介護保険レンタル対象

- 筒状に縫製され、キャタピラーのようにローリングしながら、少しの力だけでスライドし、移動・移乗を容易にします。
- ナイロンに特殊コーティングを施し、低コスト化を実現しました。
- 折りたためばポケットやハンドバックに入ります。

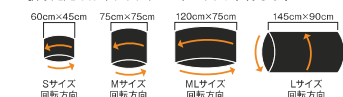

| | | |
|-------------|----------|------------|
| 移座えもんシート S | 45×60cm | ¥2,750(税込) |
| 移座えもんシート M | 75×75cm | ¥3,300(税込) |
| 移座えもんシート ML | 75×120cm | ¥6,050(税込) |
| 移座えもんシート L | 145×90cm | ¥8,250(税込) |



移座えもんグローブ

介護保険レンタル対象

- 手袋状に縫製された体の下に差し込むことで、ベッド上での左右の移動が簡単に出来ます。ナイロン製

| | | |
|----------------|---------|------------|
| 移座えもんグローブ(2枚入) | 19×50cm | ¥2,200(税込) |
|----------------|---------|------------|



移座えもんシーグロ

介護保険レンタル対象

- 移座えもん「シート」と「グローブ」が一体化しました。手を入れるポケットが3ヶ所付いて使いやすく便利です。

| | | |
|-----------|---------|------------|
| 移座えもんシーグロ | 75×70cm | ¥4,400(税込) |
|-----------|---------|------------|



移座えもんヒップベルト

- 移座えもんシートを使って、ベッド上の上方向移動をするときに、臀部に掛け、肘を伸ばして引くように使用します。
- 少ない力で腰を伸ばして使用できます。

| | |
|-------------|-------------|
| 移座えもんヒップベルト | ¥13,200(税込) |
|-------------|-------------|



移座えもんボードブルー

介護保険レンタル対象

- ヒップラインカットにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできるので、収納時コンパクトになります。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 移座えもんボードブルー 61.8×29cm | ¥17,600(税込) |
|-----------------------|-------------|

QRコードは腕デノンソーウェアの登録商標です。



移座えもんローラ

介護保険レンタル対象

- ベッドからストレッチャー、リクライニング車いすへの移乗ができます。
- 2つ折りができるので持ち運びに便利です。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

| | | |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 移座えもんローラ1800 | 180×50×1.6cm(折畳み寸法 90cm) | ¥87,450(税込) |
| 移座えもんローラ1000 | 100×50×1.6cm(折畳み寸法 50cm) | ¥55,000(税込) |

移座えもんボードホワイト

介護保険レンタル対象

移座えもんシートと
移座えもんパッドを併用

- 1600gと超軽量。取り回し易く片手で操作できます。
- しなやかで、曲げにも強い性質を持っています。
- 洗浄消毒は、消毒用エタノール等をご使用下さい。
- 材質は、PVC低発泡板です。
- 難燃性素材仕様です。

※隙間・高低差ともに10cm以下の移乗介助に使用下さい。

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 移座えもんボードホワイト1000ES | 45×100cm (移座えもんシートBlack Lサイズ付) | ¥40,480(税込) |
| 移座えもんボードホワイト800(脚部用ボード) | 30×80cm | ¥9,900(税込) |

移座えもんパッド

- 移乗の際、ご本人の体まで手が届かない無理な姿勢を解消できます。少数で安全な移乗が可能になります。



| | | |
|----------------------|----------|-------------|
| 移座えもんパッド(延長ストラップ2本付) | 50×100cm | ¥19,800(税込) |
|----------------------|----------|-------------|

介護リフト つるべー・安全懸架 T A N - P O P O 価格一覧

| 商品名1 | 商品名2 | 希望小売価格 | 税込価格 | 税 |
|---|-----------|-----------|---------|-----|
| 介護リフトつるべーF1セット | ステンレスアーム付 | 662600~ | | 非課税 |
| 介護リフトつるべーF1セット(SKK) | ステンレスアーム付 | 742900~ | | 非課税 |
| 介護リフトつるべーF2Rセット | ステンレスアーム付 | 736300~ | | 非課税 |
| 介護リフトつるべーF2Rセット(SKK) | ステンレスアーム付 | 806700~ | | 非課税 |
| | | | | |
| 介護リフトつるべーBB1セット | ステンレスアーム付 | 649,400 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべーBセット | ステンレスアーム付 | 649,400 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべーBWセット(検定付)ステンレスアーム | ステンレスアーム付 | 869,400 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべーBBセット | ステンレスアーム付 | - | | |
| 介護リフトつるべーBBWセット(検定付)ステンレスアーム | ステンレスアーム付 | - | | |
| | | | | |
| 介護リフトつるべーG2Rセット | ステンレスアーム付 | 554,800 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべーU1セット | ステンレスアーム付 | 648,300 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべーU2Rセット | ステンレスアーム付 | 717,600 | | 非課税 |
| | | | | |
| 介護リフトつるべー Y6セット | | 596,400 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6Wセット(検定付) | | 816,400 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6Tセット | 手すり付 | 694,400 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6TWセット(検定付) | 手すり付 | 914,400 | | 非課税 |
| | | | | |
| 介護リフトつるべー Y4セット | | 554,400 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4Wセット(検定付) | | 774,400 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4Tセット | 手すり付 | 652,400 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4TWセット(検定付) | 手すり付 | 872,400 | | 非課税 |
| | | | | |
| 介護リフトつるべー Y6セット Li-PINK | | 689,800 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6Wセット(検定付) Li-PINK | | 909,800 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6Tセット Li-PINK | 手すり付 | 787,800 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6TWセットLi-PINK (検定付) | 手すり付 | 1,007,800 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6 Li-PINK safety robo | | 785,400 | | 非課税 |
| | | | | |
| 介護リフトつるべー Y4セット Li-PINK | | 652,000 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4Wセット(検定付) Li-PINK | | 872,000 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4Tセット Li-PINK | 手すり付 | 750,000 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4TWセットLi-PINK (検定付) | 手すり付 | 970,000 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4 Li-PINK safety robo | | 747,600 | | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4W Li-PINK safety robo (検定付) | | 967,600 | | 非課税 |
| | | | | |
| 介護リフトつるべー Y4・Y6セット専用手すり | | 98,000 | 107,800 | 税込 |
| | | | | |
| 車搭載型介護リフト V-LIFT | | 680,000 | | 非課税 |
| | | | | |
| リフト用デジ'ル体重計 検定付 | MHS2600 | 220,000 | 242,000 | 税込 |
| リフト用デジ'ル体重計 検定無し | MHS2600 | 180,000 | 198,000 | 税込 |
| | | | | |
| 車椅子用つるべーベルト(黒輪・金具付セット) | | 22,500 | 24,750 | 税込 |
| | | | | |

介護リフト つるべー・安全懸架 T A N - P O P O 価格一覧

| 商品名1 | 商品名2 | 希望小売価格 | 税込価格 | 税 |
|--|--------------------|---------|---------|----|
| ハオショート ハーフ | PAO170 | 30,000 | 33,000 | 税込 |
| ハオショート フル | PAO180 | 36,000 | 39,600 | 税込 |
| | | | | |
| スリング ハオハーフ | PAO100 | 47,000 | 51,700 | 税込 |
| スリング ハオフル | PAO120 | 58,000 | 63,800 | 税込 |
| スリング ハオロング | PAO130 | 61,000 | 67,100 | 税込 |
| スリング ハオメッシュブルー ハーフ | PAO140 | 42,000 | 46,200 | 税込 |
| スリング ハオメッシュブルー フル | PAO150 | 52,000 | 57,200 | 税込 |
| 休足スリング | PAO160 | 19,000 | 20,900 | 税込 |
| スリング エグアハーフ中 | EVE210 | 42,000 | 46,200 | 税込 |
| スリング エグアハーフ小 | EVE220 | 42,000 | 46,200 | 税込 |
| スリング エグアフル中 | EVE240 | 52,000 | 57,200 | 税込 |
| スリング エグアフル小 | EVE250 | 52,000 | 57,200 | 税込 |
| スリング エグアネックサポート | EVE260 | 13,000 | 14,300 | 税込 |
| スリング ハオメッシュグレー フル 中 | PAO340 | 52,000 | 57,200 | 税込 |
| スリング ハオメッシュグレー フル 小 | PAO350 | 52,000 | 57,200 | 税込 |
| | | | | |
| ぶらん歩 S | | 43,000 | 47,300 | 税込 |
| ぶらん歩 M | | 43,000 | 47,300 | 税込 |
| ぶらん歩 L | | 43,000 | 47,300 | 税込 |
| | | | | |
| 移座えもんボードフルー | 「介護の技術を変えよう！」QR付 | 16,000 | 17,600 | 税込 |
| 移座えもんボード ホワイト1000ES 移座えもんシート Black Lサイズ付 | 45*100 | 36,800 | 40,480 | 税込 |
| 移座えもんボード ホワイト800 30*80 | | 9,000 | 9,900 | 税込 |
| | | | | |
| 移座えもんグローブ | | 2,000 | 2,200 | 税込 |
| | | | | |
| 移座えもんシート BLACK M | | 3,000 | 3,300 | 税込 |
| 移座えもんシート BLACK ML | | 5,500 | 6,050 | 税込 |
| 移座えもんシート BLACK L | | 7,500 | 8,250 | 税込 |
| 移座えもんシート BLACK S | | 2,500 | 2,750 | 税込 |
| | | | | |
| 移座えもんシーグロ | | 4,000 | 4,400 | 税込 |
| | | | | |
| 移座えもんローラ ROLA-1000 | 1000*500 | 50,000 | 55,000 | 税込 |
| 移座えもんローラ ROLA-1800 | 1800*500 | 79,500 | 87,450 | 税込 |
| 移座えもんパッド | 50*100(延長ストラップ2本付) | 18,000 | 19,800 | 税込 |
| 移座えもんヒップベルト | | 12,000 | 13,200 | 税込 |
| | | | | |
| 安楽キャリー AAタイプ 一体型 | アームレスト付 | 156,200 | 171,820 | 税込 |
| 安楽キャリー Bタイプ 分離型 | アームレスト付 | 239,800 | 263,780 | 税込 |
| 安楽キャリー-Bタイプ 穴あき座面付 | | 255,200 | 280,720 | 税込 |
| | | | | |
| 安楽キャリー用アームレスト | 2本組A・B兼用 | 21,400 | 23,540 | 税込 |
| 安楽キャリーA・AAタイプ用補助ベルト | | 2,600 | 2,860 | 税込 |
| 安楽キャリーBタイプ用補助ベルト | | 2,600 | 2,860 | 税込 |

介護リフト つるべ・安全懸架 TAN-POPO 価格一覧

[illegible]

介護リフト つるべー・安全懸架 T A N - P O P O 価格一覧

| 商品名1 | 商品名2 | 希望小売価格 | 税込価格 | 税 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 免荷式歩行リフト POPO Li REH-100 | | 942,000 | | 非課税 |
| 免荷式歩行リフト POPO Li LIV-100 | | 915,000 | | 非課税 |
| 免荷式歩行リフト POPO Li REH-200 | サイド手すり付 | 1,047,000 | | 非課税 |
| 免荷式歩行リフト POPO Li LIV-200 | サイド手すり付 | 1,020,000 | | 非課税 |
| POPO LIV脚部 | | 75,000 | 82,500 | 税込 |
| POPO REH脚部 | | 102,000 | 112,200 | 税込 |
| POPO サイド手すり | | 105,000 | 115,500 | 税込 |
| POPO ハイアーム | | 69,000 | 75,900 | 税込 |
| ワイヤレススイッチ HB200 | ※TGPOPO Li ,OCTBATH,Y6 Li-PINK使用可 | 25,000 | 27,500 | 税込 |
| | | | | |
| 免荷式リハビリテーションリフトTG-1000 | | 1,628,000 | 1,790,800 | 税込 |
| 免荷式リハビリテーションリフトTG-800 | | 1,490,000 | 1,639,000 | 税込 |
| 免荷式リハビリテーションリフトSP-2000 | | 都度見積り | － | 税込 |
| TG用サイドグリップ | | 195,000 | 214,500 | 税込 |
| MORITOH PP-Tread SW-1200(※1) | (パネル支柱含む) | 700,000 | 770,000 | 税込 |
| MORITOH PP-Tread 専用シリコンスプレー | OIL-900 | 900 | 990 | 税込 |
| MORITOH PP-Tread 専用シリコンオイル | 1Kg | 6,000 | 6,600 | 税込 |
| | | | | |
| ハーネススーパースライド S | SL-110 | 36,750 | 40,425 | 税込 |
| ハーネススーパースライド M | SL-120 | 36,750 | 40,425 | 税込 |
| ハーネススーパースライド L | SL-130 | 36,750 | 40,425 | 税込 |
| ハーネス ライト S POPO用 OR SP用 | L-110 | 48,300 | 53,130 | 税込 |
| ハーネス ライト M POPO用 OR SP用 | L-120 | 48,300 | 53,130 | 税込 |
| ハーネス ライト L POPO用 OR SP用 | L-130 | 48,300 | 53,130 | 税込 |
| ハーネス ハイブリット SS POPO用 OR SP用 | HV-100 | 60,900 | 66,990 | 税込 |
| ハーネス ハイブリット S POPO用 OR SP用 | HV-110 | 60,900 | 66,990 | 税込 |
| ハーネス ハイブリット M POPO用 OR SP用 | HV-120 | 60,900 | 66,990 | 税込 |
| ハーネス ハイブリット L POPO用 OR SP用 | HV-130 | 60,900 | 66,990 | 税込 |
| ハーネス ハイブリット LL POPO用 OR SP用 | HV-140 | 60,900 | 66,990 | 税込 |
| ハーネスベスト(TSV) M | V-120 | 60,900 | 66,990 | 税込 |
| ハーネスベスト(TSV) L | V-130 | 60,900 | 66,990 | 税込 |
| | | | | |
| リフト用デジタル体重計 検定無し | MHS2600 | 180,000 | 198,000 | 税込 |

(※1)商品は在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。