

# PP-Tread sw-1200

病院・施設

## リハビリテーション対応トレッドミル



- 0.2 km/h からの滑らかな初動
- 使いやすさを追求したデザイン
- 簡単な操作パネル
- 操作パネルは着脱可能で、首振り角度は 360 度自在
- DC3.0HP のハイパワーモーター採用
- 業務用で連続使用時間 2 時間、1 日 10 時間使用可能
- USB ポート付 (モバイル充電用)



~~手すりは着脱可能、高さ調整 3 段階 (900, 990, 1080mm) →~~  
~~※手すりは別途購入品となります。~~

専用ハーネス



### ハーネス ハイブリッド (HV)

型番	サイズ	メッシュ素材を使用しているため、透気性が良くムレにくくなっています。また、頑固な伸縮素材により身体にフィットしやすくなっています。姿勢支持機構の採用により脚の振り出しをアシストし歩行しやすくなっています。装着はウエスト部、大腿部に巻き付ける方式のため、発荷時のせきけい部への違和感はありません。
HV-100	S S	
HV-110	S	
HV-120	M	
HV-130	L	
HV-140	LL	



### ハーネス スーパーライト

型番	サイズ	とても簡単なハーネスです。発荷機能は無く、転倒予防として装着します。発荷時のベルトは後方装着のため、歩行の妨げにもなりません。
SL-110	S	
SL-120	M	
SL-130	L	



### ハーネス ライト

型番	サイズ	ハーネスライトは、車いすに座った状態で着脱が容易にできます。クロッチベルト (股ベルト) は伸縮素材で且つ、滑りやすい材質となっていますので発荷時でも違和感が少なく歩行できます。
L-110	S	
L-120	M	
L-130	L	

オプション



### ハーネス ベスト (TSV)

型番	サイズ	専用ハーネスと組み合わせ使用することにより、体幹支持機能を補助し歩行時の負担を軽減することが可能です。また、平地歩行訓練をはじめ様々な訓練時に単体で使用可能であり、背部の転倒予防ストラップが安全な歩行訓練をサポートします。
V-120	M	
V-130	L	


ハーネスベスト (TSV) は対応品国産品・販売店 (リハビリテーション科) での発荷販売品です。

### 製品仕様 PP-Tread SW1200

AC100V 15A 50/60Hz  
 ※常時 1500W 供給可能な単独アース付きコンセント  
 速度 : 0.2~6.4km/h  
 計器表示 : 速度 / 距離 / 消費カロリー / ステップ数  
 最大使用体重 : 182kg  
 本体サイズ : 約幅 740×長さ 1600×歩行面高 120mm  
 本体重量 : 約 60kg ~~手すり重量約 16.5kg~~  
 非常停止 : 安全キー搭載

※手すりの販売は終了いたしました。

### 製品寸法 (mm) ~~手すり高さ 900・990・1080~~

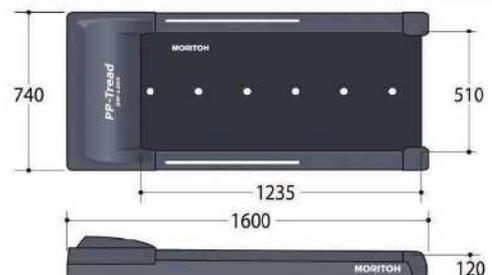

MORITOH CORPORATION  
 株式会社 モリトフ

お客様相談室

0120-65-2525

お求めは

[ホームページ] <http://www.moritoh.co.jp>



■本社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町 3-36 TEL: 0586-71-6151 FAX: 0586-72-4555

■営業所 / 札幌 / 仙台 / 埼玉 / 中部 / 大阪 / 岡山 / 福岡 / 東京有明ショールーム

0421