OCTBATH 製品仕様

■リフト仕様

昇降速度 上昇		30.1mm/sec	
昇降速度 下降		31mm/sec	
耐荷重()	易なし)	100kg	
耐荷重()	易あり)	120kg	
ハンガー幅(外寸法)		500 (560) mm	
材 質		ステンレス(SUS304)	
安全装置		挟み込み防止※	
支柱旋回範囲		360度回転	
	高さ	1500mm	
サイズ	長さ	1400mm	
912	幅	1340mm	
	アームストローク	1110mm	
アーム最上端高さ		2045mm	


※エレクトロニカルスプライン機構


■電表品任依		
	モーター	

		モーター	スイッチ	チャージャー	バッテリー	コントローラー
	型式	LA34	HB31	CHL50	BAL50	COL50
	出力電源	9	ě	29.4VDC	25.2VDC	24VDC
	入力電源	24V	24V	100V	29.4V	25.2VDC
	防水性能	IPX6	IPX6	IPX4	IPX6	IPX6
	備考	10000N				

■ 浴槽什様

サイズ (外寸法)	1400×700×550mm		
(内寸法)	1280×570×470mm		
容量	満水 265ℓ		
本体重量	110kg		

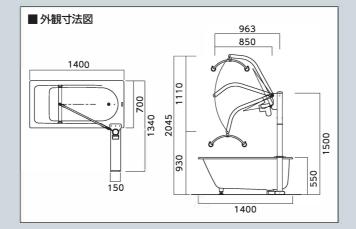

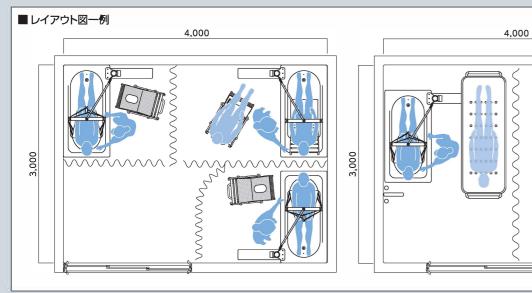

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH 【一式】

■ 無料点検内容 リフト動作、吊り具、浴槽設置状況のチェック

OCTBATH

無料点検付き 価格 ¥2,310,000 (稅込) (¥2,100,000(稅抜))

使用方法の確認(研修) 6年(1回/年)

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH 【Aセット】

安楽キャリーAAタイプ+スリング2枚 無料点検付き セット価格 ¥2,475,000(税込) (¥2,250,000(稅抜)) 介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH 【Bセット】

安楽キャリーBタイプ+スリング2枚 無料点検付き セット価格 ¥2,530,000 (税込) (¥2,300,000(稅抜))

※機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承願います。

製造発売元



お客様相談室

30 0120-65-2525 モリトー



社/〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

■札幌営業所 TEL(011)708-5200

■仙台営業所 TEL (022) 302-7914

■埼玉営業所 TEL (048) 753-9393 ■東京営業所 TEL (03) 3777-1648 TEL (0586) 71-6151

■中部営業所 TEL(06)6785-7202 ■大阪営業所 ■岡山営業所 TEL (086) 259-2910

■福岡営業所 TEL (092) 953-1892 ■信濃大町研修センター TEL(0261)23-1678 ■販売店

ホームページ

Email

設置工事不要

MORITOH

介護リフト付きホーロー浴槽

ENAMEL BATHTUB WITH NURSING LIFT







寝浴から個浴が時代の流れ

お風呂でゆったり入浴を楽しみたい。介助者は 一人でもOK。目線を合わせた優しい介助で 会話も弾みます。

仰向けになり天井を見ながらの入浴では 味わえない喜びをお届けします。




高級感あふれる 鋳物ホー□−浴槽

190年の伝統を誇る高級鋳物ホーロー浴槽 です。最高級の品質と美しい仕上がり、25年 以上贅沢な輝きが保たれます。優れた熱 伝導により浴槽全体で体を温められる心地 よさは抜群です。表面はコインで削っても傷が 付かず湯垢やカビもさっと拭くだけでお手 入れが簡単です。



コンパクト設計の リフト付き特殊浴槽

ゆったり入浴できる1400×700mmの浴槽 サイズにもかかわらず、内寸法1600×1600mm の浴室スペースでゆとりの入浴介助ができ ます。取り扱いが簡単でどなたが使用しても 着地のベストポイントを外しません。

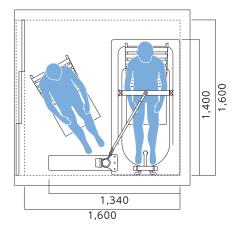

安楽キャリー

乗りごこち、使い易さを極めた シャワーキャリー



安楽キャリー B type / 分離型 安楽キャリー AA type / 一体型



スリングシート エヴァ

サイドメッシュで水はけがよく、 角度調整も自在



スリングシート エヴァ / ハーフ スリングシート エヴァ / フル



スリングシート パオメッシュ

ホ

口

41

う

バ

ス

1]

61

う

1/1

安全安心なメッシュのシート型スリングで 快適な乗り心地



パオメッシュブルー / ハーフ



パオメッシュブルー / フル



コントローラー

リチウムイオンバッテリー搭載

IPX6の防水リチウムイオンバッテリー搭載で煩わしい充電 コードはありません。管理が簡単で、充電を忘れてもバッテリー 寿命は変わりません。鉛バッテリーと比較すると、軽量で、 長寿命。容量がなくなる数回前までフルパワーで使用でき、 性能は当社製品比較で2倍です。