

安全懸架装置 TAN・POPOシリーズ 製品仕様

■SSシリーズ 製品仕様

	SS-1000	SS-450	SS-300	SS-100
本 体 重 量	25kg	10kg	約1.5kg	約1.0kg
耐 荷 量	100kg	100kg	100kg	100kg
走 行 速 度 (無負荷時)	1.0km/h	—	—	—
昇降ストローク	2.0m	2.3m	—	580mm
平均昇降速度 (無負荷時)	55mm/秒	45mm/秒	—	—
動 力 電 源	DC24V (バッテリー搭載)	DC24V (バッテリー搭載)	—	—
充電器入力	AC100-120V 1.0A	AC100-120V 1.0A	—	—
充電器出力	DC24V 1.5A	DC24V 1.5A	—	—
バッテリ	12V5.0A×2個 密閉型鉛蓄電池	12V5.0A×2個 密閉型鉛蓄電池	—	—
操 作 方 法	赤外線リモコン	赤外線リモコン	手動操作	手動操作
そ の 他 機 能	非常降下機能付き(手動)／ 緊急停止機能付き(ひもスイッチ)／ 高速度下時ロック機能付き／ 下降時ベルミ緩み検知機能付き	ストラップ緩み検知・乱巻き防止機能・過速度検知／ スロースタートストップ／緊急停止装置／ バッテリー残量(アラーム機能搭載)／自動電源OFF機能／ 緊急降下装置(手動)／免荷量表示計(オプション)	—	高さ調整用 クリップ付き

■TGシリーズ 製品仕様

	TG-800	TG-1000
寸法 (高さ)	1.960~2.420mm	1.960~2.420mm
(幅)	940mm (内寸800mm)	1.140mm (内寸1.000mm)
(奥行)	1.280mm	1.280mm
本 体・脚 部	材質:鉄	材質:鉄
本 体 重 量	48kg	52kg
耐 荷 量	100kg	100kg
充電器入力	AC100V-240V-50/60Hz	AC100V-240V-50/60Hz
充電器出力	DC29.4V 0.8A	DC29.4V 0.8A
バッテリ	リチウムイオン電池 BAL50 入力電源 29.4V 出力電源 25.2VDC	リチウムイオン電池 BAL50 入力電源 29.4V 出力電源 25.2VDC

■SPシリーズ 製品仕様

	SP-2000
(高さ)	2.700mm
寸法 (幅)	1.100mm (幅1,000mmまでのトレッドミルが使用可能)
(奥行)	1.310mm
本 体・脚 部	材質:鉄
本 体 重 量	115kg
耐 荷 量	100kg
動 力 電 源	使用電圧 AC100V-50/60Hz 消費電力 56W

■PP-Tread 製品仕様

寸法 (歩行高)	120mm
(幅)	740mm
(長 さ)	1,600mm
走行面 (幅)	510mm
(長さ)	1,235mm
本 体 重 量	約60kg (手すり約16.5kg)
速 度	0.2~6.4km/h
計 器 表 示	速度・距離・消費カロリー・ステップ数
最大使用体重	182kg
使 用 電 圧	AC100V 15A 50/60Hz ※常時1500W供給可能な単相アース付きコンセント
その他の機能	安全キー モバイル充電用USB端子

■POPO Li 製品仕様

吊り上げ質量	100kg
吊り上げ距離	590mm~1,360mm
操 作 方 法	コントローラボタン/介助者用手元スイッチ
入 力 電 源	AC100V-240V-50/60Hz
出 力 電 源	DC24V
安 全 機 能	緊急停止ボタン 非常降下スイッチ (EMERGENCY)
本 体・脚 部	材質:鉄
本 体 質 量	35kg
充電器入力	AC100V-240V-50/60Hz
充電器出力	DC29.4V 0.8A
バッテリ	リチウムイオン電池 BAL50 入力電源 29.4V 出力電源 25.2VDC



SAFETY SUSPENSION SYSTEM

安全懸架装置

TAN・POPO
単 歩 歩
LINEUP



製品価格表

製造発売元
MORITOH CORPORATION
株式会社 モリト

■本 社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

■札幌営業所 / 〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101
 ■仙台営業所 / 〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22
 ■埼玉営業所 / 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103
 ■中部営業所 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36
 ■大阪営業所 / 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンパウトオフィスB号
 ■岡山営業所 / 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉30-102
 ■福岡営業所 / 〒811-1204 福岡県那珂川市片縄東1-12-1
 ■東京有明
 ショールーム / 〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TQC有明イースタワー8階2号室
 ■総務大町
 研修センター / 〒398-0001 長野県大町市大字平22393

お客様相談室
[24時間受付]
モリトホームページ <http://www.moritoh.co.jp>
Email info@moritoh.co.jp

TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555

TEL (011) 708-5200 FAX (011) 708-5201
 TEL (022) 302-7914 FAX (0586) 72-4555
 TEL (048) 753-9393 FAX (03) 5531-5550
 TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555
 TEL (06) 6785-7202 FAX (06) 6785-7203
 TEL (086) 259-2910 FAX (0586) 72-4555
 TEL (092) 953-1892 FAX (092) 953-1973
 TEL (03) 5531-5555 FAX (03) 5531-5550
 TEL (0261) 23-1678

※取付け工事費が別途必要です。 機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 P/B/L/2.5



耐荷重
100kg

安心で安全な、
質の高い
歩行練習を
患者様に
合わせて提供。

SAFETY SUSPENSION SYSTEM



リフトとハーネスを使い分けることで、軽症者から重症者までそれぞれに合わせた歩行練習がおこなえます。

転倒リスクの高い応用練習も、安全に可能となります。

撮影協力：済生会守山市市民病院 様



病院導入事例動画



撮影協力：
熱田リハビリテーション病院 様

世界初!パラレル 前後左右の動きに対応!
自由度の高い歩行練習・
バランス練習を可能にします。



TPP 軽度者から重度者まで使い方は無限!

TPPはフルオーダーの据置型免荷リフトです。(工事不要※)オーダー製作ですので、5m・10m・15mなどリハビリ室に合わせて最適な長で製作可能です。
また、1本走行と2本走行、XYレール(パラレル)も選択可能です。4機種(SS-100・SS-300・SS-450・SS-1000)全てのレール走行式リフトに対応しております。

※設置場所によっては消防法によりスプリンクラーの移設工事が必要になる場合もございます。



パラレル事例動画

SS series

患者様の症状に合わせたリハビリテーションを可能にする5種類のラインナップをご用意しております。

※価格については、施工内容にあわせてお見積りとなります。

レール走行式 追従型免荷リフト

SS-1000



追従型免荷リフトは、ボールスプライン機構の採用で巻き取りドラムによる免荷機能とフリー駆動を実現しました。リフトの重さを感じることなく歩行開始・歩行時・停止時の動作をセンサが感知しリフトのスムーズな動きと安定した自然な歩行が可能となります。

レール走行式 免荷リフト(手動)

SS-300



手動操作により適度に体重を免荷する事が可能です。予めスプリングハンガーを頭上にセットしておき、専用のSPベルトをハンガーに掛けます。その後、ベルトの長さ調整で容易に免荷することが可能となります。

レール走行式 免荷リフト(電動)

SS-450



リモコン操作により免荷量(懸架範囲)を0~100kgまで調整する事が出来ます。電動昇降のため、車いすからの立ち上がりも容易に行えます。

レール走行式 セーフティタンブル(安全な転倒)

SS-100 Safety Tumble



免荷機能は無く、練習中の転倒時にはストッパー機能とスプリングハンガーの効果で比較的安全な転倒を体感できます。使用しない時は、ハンガーは上方に巻き取られ邪魔になりません。また、天井高に合わせて定位置にセットすることができます。

スプリングハンガー

歩行リハビリ専用開発されたスプリングハンガーは歩行時の動作に合わせてスプリングが作用する事で、より自然な歩行練習を実現します。また、転倒時の衝撃を吸収します。
※免荷量計はオプションです。



OPTION

SS / SPシリーズ
免荷量計
MHS-2600



人と地球がよろこばない
サンヨーホームズ

寄り添いロボット (転倒衝撃低減システム)

転倒を感知するとブレーキをかけ、ゆるやかに床に倒れさせる装着型のロボットです。転倒による怪我への不安を解消し、しっかりとリハビリトレーニングに励むことができます。ゆるやかに転倒するため、少し離れていても補助が可能です。

Yoriso! Robot
寄り添いロボット





患者様・セラピストの負担を軽減しながら
より多くの歩行量を確保。

適切に体重を免荷することで、
疼痛や筋力低下による歩行困難を補うことができます。
セラピストの介助量も軽減し、歩行量を増やすことができます。

撮影協力：済生会守山市民病院 様

SP series 体重を免荷することで、楽に快適な歩行を実現します。
用途に合わせたサイズをご用意しております。

耐荷重
100kg



OPTION

ワイヤレススイッチ
HB200
適用機種：TGシリーズ


サイドグリップ
免重量表示体重計

安全懸架式リハビリテーションリフト

TG-800 内寸 800mm

TG-1000 内寸 1000mm

歩行リハビリ専用開発されたスプリングハンガー採用で
自然な歩行が可能。
125φのキャスター採用で滑らかな歩行が可能。
高機能4輪キャスターの採用で直進・自在回転・停止の切替が可能。
スイッチ操作で容易に免重量操作が可能。
※トレッドミルは別売です。

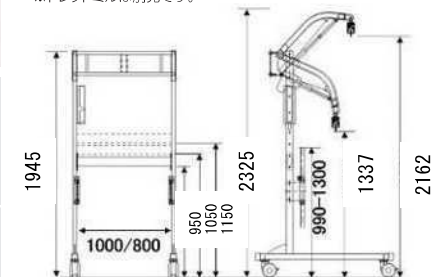

免荷式リハビリテーションリフト

SP-2000 サスペンションリフト

オーバーハングの機構採用により、車いすから垂直に立ち上がる
ことができます。2,800mmレール採用で、最適位置への移動が
容易に行え、使用中の固定もできます。動作解析装置との併用に
最適です。
※トレッドミルは別売です。

リハビリテーション対応トレッドミル

PP-Tread

初速0.2km/hの低速走行と走行面145mmの低床型トレッドミ
ルです。業務用モーター採用で長時間連続使用が可能です。
簡単な操作パネルとシンプルなデザインで使いやすさを追求
しました。操作パネルと支柱を外せば完全フラット状態として
ご使用いただけます。



OPTION

PP-Tread専用
シリコン缶 1kg
KF-96





世界初! サスペンションアーム採用のコンパクトな免荷式リフト。

安全な立ち上がり、自然な歩行をサポート。

左右独立懸架のサスペンションで0~40kg免荷の自然な歩行ができ、その上、転倒リスクを大幅に軽減します。



施設導入事例動画



POPO Li LIV-100

POPO series 体重を免荷しながら使用できるコンパクトなリフトです。

免荷式リフト popoLi REH-100 / LIV-100



※免荷式歩行リフトPOPOは独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設助成事業の助成により開発されました。

免荷式歩行リフト	POPO Li REH-100
免荷式歩行リフト	POPO Li LIV-100
免荷式歩行リフト	POPO Li REH-200 (サイド手すり付)
免荷式歩行リフト	POPO Li LIV-200 (サイド手すり付)

OPTION
POPO REH脚部
POPO LIV脚部
ワイヤレススイッチ HB200

サスペンションアームの採用
特許取得済
世界初!

OPTION



OPTION

ワイヤレススイッチ
HB200
適用機種: POPO Li

サスペンションリフト/免荷式リフトPOPO 専用共通ハーネス



ハーネスハイブリッド 対象者:軽度~重度者向け

HV-100(SS)
HV-110(S)
HV-120(M)
HV-130(L)
HV-140(LL)

大腿部を覆うタイプで多くの免荷重を必要とする方にも使用できます。座骨支持ベルトの採用で足の振出しをサポートします。そけい部への圧迫がなく快適な装着感が得られます。



ハーネスライト 対象者:軽度~中度者向け

L-110(S)
L-120(M)
L-130(L)

クロッチベルトをそけい部に通すタイプで装着はとも簡単です。車いすに座った状態でも着脱が容易に行えます。クロッチベルトは脱着性と装着性の良い材質を採用しています。



ハーネススーパースライト 対象者:軽度者向け

SL-110(S)
SL-120(M)
SL-130(L)

感度専用となり、転倒時のサポートとして使用します。ウエストに巻くだけのシンプル装着、後方2本ベルトは歩行の視界を妨げません。免荷機能としてはご使用頂けません。



※POPOではご使用頂けません。

ハーネスベスト (TSV)

V-120(M)
V-130(L)

体幹/パーツは、肩甲骨内転、胸椎伸展、腰圧補助機能を有し、ハーネスハイブリッドとの組合せでのBWSTTでは、安定した歩行と体幹伸展・動揺軽減効果が得られます。単独歩行での使用も可能です。

※ハーネスベスト (TSV)は刈谷豊田総合病院・東分科 (リハビリテーション科)との共同開発商品です。

ハーネス適合サイズ一覧

サイズ	ハーネスハイブリッド
SS	ウエストサイズ 約55~65cm
S	ウエストサイズ 約65~75cm
M	ウエストサイズ 約75~90cm
L	ウエストサイズ 約90~100cm
LL	ウエストサイズ 約100~110cm

サイズ	ハーネスライト
S	腸骨周りサイズ 約72~86cm
M	腸骨周りサイズ 約86~100cm
L	腸骨周りサイズ 約100~114cm

サイズ	ハーネススーパースライト
S	ウエストサイズ 約53~65cm
M	ウエストサイズ 約68~88cm
L	ウエストサイズ 約88~105cm

※サイズ表記目安数字となります。

[illegible]

(※1)商品は在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。