



モリトー 介護リフトつるべー 製品仕様

■つるべー標準仕様

昇降速度 上昇(850mm/アーム)	31.7mm/sec
昇降速度 下降(850mm/アーム)	37.1mm/sec
耐荷重	100kg
上下ストローク(700/850/950mmアーム)	955/1160/1300mm
ハンガーフック間距離(外寸法)*1	500(560)mm
材 質	スチール・ステンレス(SUS304)

*1 ハンガーフック間距離は、オプション(別売)にて、380と430mm仕様が有ります

■つるべーY4・Y6セット仕様

昇降速度 上昇	36.3mm/sec
昇降速度 下降	37.2mm/sec
耐荷重	120kg
材 質	スチール

■オクトバス浴槽仕様

サイズ (外寸法)	1400×700×550mm
(内寸法)	1280×570×470mm
容 量	湯水265ℓ
本体重量	110kg

■つるべー電装品仕様

品目	形式	入力電源	出力電源	重量	コード長さ	防水性能	定格	備考
モーター	LA32	24V	-	3.4kg	0.4mコイル	IPX6	10%	6000N/最大電流値6A
スイッチ	HB31	24V	-	0.26kg	0.6mコイル	IPX6	-	-
コントローラー	CB08	100V	24VDC	1.4kg	5.1mストレート	IPX6	5%	AC電源設定のみ
コントローラー	CB12	100V	24VDC	3.5kg	3.2mストレート	IPX6	10%	バッテリー内蔵型
Y4・Y6専用モーター	IA34	24V	-	4.2kg	0.4(0.2)mコイル	IPX6	10%	10000N
Y4・Y6専用コントローラー	CBJ2	100V	24VDC	0.54kg	-	IPX4	10%	バッテリー残量表示
Y4・Y6専用バッテリーバック	BAJ1	-	24VDC	2.7kg	-	IPX4	-	-
Sセットモーター	LA34	24V	-	3.83kg	0.4mコイル	IPX6	10%	10000N
Sセットスイッチ	HB31	24V	-	0.26kg	0.4mコイル	IPX6	-	-
Sセットコントローラー	CB12	100V	24VDC	2.33kg	3.2m	IPX6	10%	-
リチウムイオン電池	BA150	29.4V	25.2VDC	0.9kg	-	IPX6	-	-

バッテリータイプ (CB12) 小型シール蓄電池NP1.2-12.12V. 1.2Ahを2台使用
(CBJ2) 小型シール蓄電池E52.9-12.12V. 2.9Ahを2台使用

■オクトバス Y4・Y6セットLi-PINK電装品仕様

品目	型 式	入力電源	出力電源	防水性能	備 考
モーター	LA34	24V	-	IPX6	10000N
スイッチ	HB31	24V	-	IPX6	-
チャージャー	CHL50	100V	29.4VDC	IPX4	-
バッテリー	BA150	29.4V	25.2VDC	IPX6	2.6Ah
コントローラー	COL50	100V	29.4VDC	IPX6	-

■つるべーCセット V-Lift電装品仕様

品目	入力電源	防水性能	定格	備考
モーター	24V IPV6	10%	10000N/最大電流7.7A	-
コントローラー	12V	-	10%	アクセリレーション付新編
ワイヤレススイッチ(2駅用)	-	-	-	ボタン電池 CR2016x2個使用


- コントローラーの全タイプに過負荷保護回路を設定。過負荷でモーター電源を遮断
- コントローラーのバッテリータイプには、バッテリー残量警報を設定。残量50%でアラーム音作動
- コントローラーの全タイプのトランス内にヒューズの設置。1次保護電圧ヒューズ2A

■つるべーTEN仕様

走行方式	C450 手動走行
本体重量	10kg
積載重量	204kg
昇降ストローク	2030mm
昇降速度	45mm/秒
動力電源	DC24V(バッテリー駆動)
充電器入力	AC100-120V 1.0A
充電器出力	DC24V 1.5A
充電方法	レールの端で自動充電
バッテリー	12V5.0Ahx2個 鉛蓄電池兼充電電池
バッテリー残量表示	液晶LED表示音告アラーム
操作方法	上下押し続けボタン方式
ペンダントスイッチ	空気圧式
赤外線リモコン	○
ストラップ緩み検知	○
過速度検知	○
スロースタートストップ	○
オートリターン機構	○
節約モード	○
乱暴き防止	○
緊急降下装置	(電動と手動があり)
緊急停止装置	○

■つるべーCセット V-Lift仕様

上下ストローク	985mm
耐荷重	100kg
材 質	スチール

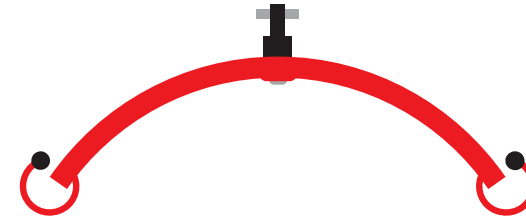

NURSING LIFT

介護リフト

つるべー
TSURUBE
LINEUP

製造発売元



■本社 社/〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

- 札幌営業所/〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101
- 仙台営業所/〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22
- 埼玉営業所/〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103
- 中部営業所/〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36
- 大阪営業所/〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンバウトオフィスB号
- 岡山営業所/〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉30-102
- 福岡営業所/〒811-1204 福岡県那珂川市片瀬東1-12-1
- 東京有明ショールーム/〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー8階2号室
- 研修センター/〒398-0001 長野県大町市大字平22393

お客様相談室
(24時間受付)
モリトーホームページ
Email

0120-65-2525
http://www.moritoh.co.jp
info@moritoh.co.jp
TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555



製品価格表



販売店



※取付け工事費が別途必要です。機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 O/F/T/S

NURSING LIFT FOR CARE TAKER & CARE RECEIVER

介護保険レンタル対象

耐荷重
100kg

ベッドの重さを利用したベッド設置式介護リフト

つるべー B・BBセット

様々な介護ベッドに使用できるよう長さ・幅の調整が可能。

紹介動画



外観寸法



つるべー BBセット

Bセットの特徴

- 支柱の設置位置は環境に合わせて、ベッドの頭側の左右、足側の左右の4か所から選べます。
- 360度回転。掃き出し窓から外の車椅子へ乗り換えなど、レイアウトで様々な使用ができます。

BBセットの特徴

- キャスター付ベッドへ設置してもベッド移動が可能。頻りにベッドを動かす方やベッド緊急搬送時にも支障がなく、病院・施設でも導入されています。
- ハーネスを使用することで、背面開放の端座位をつくり、立位姿勢・立位移乗が可能。自立化を大きくサポートします。
- 2関節アームのため、可動範囲が広がり、着座位置などの微調整が可能です。



つるべー Bセット

BWセット・BBWセットは体重計付きです。



360度回転アーム
置き場所が様々な使い方が可能になります。 [Bセット]



関節付きアーム
可動範囲が広がります。 [BBセット]



つるべー Bセット



つるべー BBセット



リフト用デジタル体重計 MHS-2600

つるべーに乗ったまま体重測定が可能。

体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。
BMI (体格指数) 機能があり、体重管理にも使用されています。
※B・BBセット、Y4・Y6セット、TENに取付できます。
※レンタル仕様では検定なしになります。

- 最小単位/100g
- 電源/アルカリ単4乾電池6本
- 風袋引き機能付き

検定付

NURSING LIFT FOR CARE TAKER & CARE RECEIVER

耐荷重
204kg

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト

つるべー TEN

レールの長さで移動範囲のニーズに対応できます。



設置式 (XY型)

設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。

据置式の特徴

- 工場の必要がない仕様や壁面固定の後施工も可能。据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がご用意です。



スプリングハンガーを使用したSSシリーズも設置可能です。



据置式 (2ポスト)



C-450 (手動走行)

コンパクトな高性能レール走行リフト

- 操作性の良い防滴ハンドスイッチ。
 - バッテリー残量やリフトの状態を見やすい液晶ディスプレイ。
 - 安全・安心設計
- オープン価格 無線リモコンタイプもご用意です。

NURSING LIFT FOR CARE TAKER & CARE RECEIVER

耐荷重
100kg

楽しいカ ライフを満喫できる車搭載型介護リフト

つるべー Cセット V-Lift

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。

紹介動画



つるべー Cセット V-Lift

Cセットの特徴

- フルマのシートに座れるため安全で、介助者の目も行き届きます。
- 助手席、後部2列目席のどのシートにも移乗可能で、座る場所が限定されません。
- 女性でも簡単に着脱可能で、コンパクトに収納できます。
- 走行時は取り外しておくことで邪魔になりません。



後部座席移乗イメージ



V-Lift 取付イメージ



V-Lift カバー

耐荷重
100kg

自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト つるべー F1・F2Rセット

ユニットバスにも設置できます。

紹介動画
▶▶▶外観寸法
▶▶▶

つるべー F2Rセット



つるべー F1セット



つるべー F2Rセット

F1セットとF2Rセットの違い



つるべー F1セット



つるべー F2Rセット

壁固定と突っ張り棒接着固定式等、様々な設置方法があり、お風呂・トイレ以外への設置も可能なリフトです。

F1セット、F1SKKセットの特徴

- コンパクトで収縮性が高く、1筒前アームで、などの着座位置が固定され、操作が簡単です。

F2Rセット、F2RSKKセットの特徴

- 2筒前アーム式なので、座席を出たり、伸ばしたりすることで着座範囲が広がります。転倒場からの移動も可能です。



壁固定

ブラケット

脱衣場から、洗い場・浴槽まで



突っ張り棒接着固定

コーナーブラケット

突っ張り棒

壁面プレート

着座

耐荷重
120kg

介護リフト付きホーロー浴槽

OCTBATH


置くだけのオクトバス／給排水工事不要※／電源工事不要

紹介動画
▶▶▶外観寸法
▶▶▶

OCTBATHの特徴

- お風呂でゆっくり入浴を楽しむのに、介護者が一人でいっしょに、自衛安全な入浴が実現します。
- 優れた熱伝導性により浴槽全体で体を温められる心地よさは特長です。暖房ファンで削っても傷が付かず、湯煎やカビもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。
- ゆったり入浴できる1400×720mmの浴槽サイズにもかかわらず、内寸法1600×1600mmの浴室スペースでゆとり入浴介助ができます。

レイアウト図一例

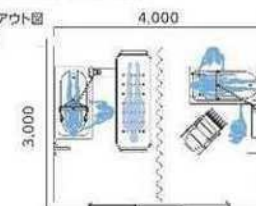

リチウムイオンバッテリー搭載

IPX6の防水リチウムイオンバッテリーを搭載し、充電コードは折りたたみ式。管理が簡単で、充電を忘れてもバッテリーは安全なため、充電コードと比較すると、軽量で長寿命、待機は約1ヶ月、充電は約2倍です。



介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【一式】 器具点検付き ¥2,310,000(税別)

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Aセット】 無料点検付き 安楽キャリーAタイプ+スリング2枚セット ¥2,475,000(税別)

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Bセット】 無料点検付き 安楽キャリーBタイプ+スリング2枚セット ¥2,530,000(税別)

※器具点検付きリフト専用、昇り足、足置き装置のチェック、使用方法の確認(研修) 6年(1回/年)

足元の開放と、旋回性の向上を追求した床走行式リフト

つるべ Y4・Y6 Safety Robotセット

小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます。
床からの移乗にも適しています。



Y6セット LI-PINK

Y6セット LI-PINK 手すり付



Y6セット LI-PINK 手すり付

ハーネスとベルトを使った固定装置から立ち上がり時に支持



※両片手で軽く2秒で解除

※安全を確認し、必ず自然に動かし、上げます

つるべ Y4・Y6 Safety Robotセット
専用手すり

- 手すりの両側の位置は、4段階で調整可能です。
- 動き始め等の本人の揺れを、手すりを握ることで軽減します。



Y6セット(6輪)の特徴

- 脚部前方の径が63mmで低床ベッドに適合。6輪でキャスターによりその場での旋回が可能。狭いお部屋の取り回しが楽です。



Y4セット(4輪)の特徴

- 床材の影響を受けにくい大きい(75φ)前輪キャスターを採用しているため、前進・後進がとてもスムーズ。軽く移動が出来ます。



Y4、Y6セット LI-PINKの特徴

- リチウムイオンバッテリーを搭載することにより
 - バッテリー軽量化
 - 有金UP
 - 充電忘れによる劣化が少ない
 - 充電時間が大幅短縮
 - 充電ケーブルなしなど性能が大幅にアップしました。



※お持ちの介護保険が適用されます。市町村窓口までご確認ください。

つるべシリーズで最もコンパクトなリフト

つるべ G2Rセット
U1・U2Rセット

自らの支那が階段でも楽に外へ出ることが可能です。



つるべ G2Rセット

紹介動画



外観寸法

耐荷重
120kg

Y6セット LI-PINK Safety Robo

- 床走行式リフトがロボット化。吊り具の掛け忘れ確認装置(音声ガイド)搭載で安全・安心に。
- 吊り上げ時、約20kgの重さを感知するとリフトが一止まり、音声ガイド(「吊り具の安全を確認してください」)が認識します。安全確認後上昇ボタンを押すことで再度上昇を完了します。

※Y6セット LI-PINK Safety Roboは、介護保険レンタルの対象ではありません。



Y6セット LI-PINK Safety Robo



吊り具の掛け忘れ確認装置

紹介動画



外観寸法

G2Rシリーズ
U1シリーズ耐荷重
100kg

G2Rセットの特徴

- 玄関、お風呂、トイレ、リビングなど様々な場所の壁に設置できます。
- 200mmの扉幅で可動軌道が導入、曲がり角での設置・移動にも使用できます。



つるべ G2Rセット

U1セットの特徴

- 床に固定するリフト。壁に固定できない場所にお勧めです。支柱高1100、1350、1600mmの3種から、最適な高さで設置できます。



つるべ U1セット

U2Rセットの特徴

- U1セットに真鍮(300mm・400mm)を追加したリフト。



つるべ U2Rセット

車椅子用ツルベルトセットの特徴

- 車椅子に専用金具を付けて、車椅子に乗ったまま移動します。



車椅子用ツルベルトセット

車椅子用ツルベルトセット
使用説明書ダウンロード

乗りごち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

安楽キャリー



安楽キャリーの特徴

- シートの張りを換えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能。なため小スペースでの使用も難しくなく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー(オプション)を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一喜乗り心地が快適になります。



安楽キャリーAAタイプ(一体型)

安楽キャリーBタイプ(分離型)

安楽キャリーBタイプ(分離型)穴あき座面付


※Bタイプはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1台が非課税となります。(オプションは課税です)



延長バー使用時



安楽キャリー専用オプション・買い替え可能消耗品

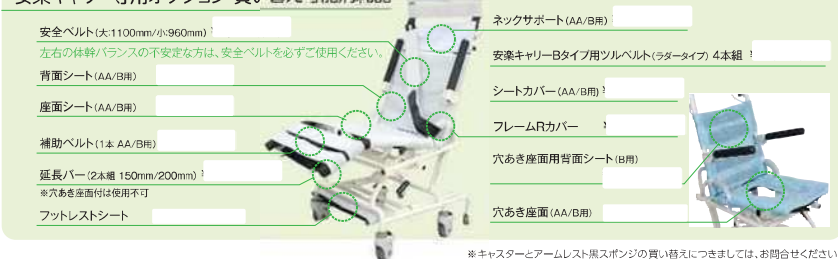

装着のしやすさと快適な乗り心地を追求した

スリング エヴァ／パオ



エヴァ ハーフ

首や体幹の支持力が比較的高い方に使用します。

エヴァ フル

首や体幹の支持力が比較的低い方に使用します。頸部保持機能により過屈曲を抑制。

エヴァ ネックサポート

エヴァハーフを使用されていて、首や体幹の支持力が比較的低くなってきた場合に使用します。

※写真はエヴァ ハーフ、エヴァ フル中でカラーはホワイト、小はライトグレーとなります。

エヴァハーフ 小 (EVE220)	目安身長: 135~150cm未満	¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税)
エヴァハーフ 中 (EVE210)	目安身長: 150~190cm未満	¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税)
エヴァフル 小 (EVE250)	目安身長: 135~150cm未満	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)
エヴァフル 中 (EVE240)	目安身長: 150~190cm未満	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)
エヴァネックサポート (EVE260)	30×19.5cm	¥14,300(税込) / ¥13,000(非課税)

エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままで着脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整が可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水抜きが容易にできます。



パオ ハーフ

首や体幹の支持力が比較的しっかりした方に使用します。



パオ フル

比較的首の廻り回りの悪い方に使用します。

パオ ハーフ (PAO100) 70×100cm	目安身長: ~180cm未満	¥51,700(税込) / ¥47,000(非課税)
パオ フル (PAO120) 70×130cm	目安身長: ~175cm未満	¥63,800(税込) / ¥58,000(非課税)
パオ ロング (PAO130) 70×150cm	目安身長: ~190cm未満	¥67,100(税込) / ¥61,000(非課税)

パオの特徴

- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能で床ずれ予防効果があります。
- ツルベルトが外れるため移乗後邪魔になりにくいです。

パオメッシュの特徴

- 編み目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも適用可能です。



パオメッシュブルー ハーフ (PAO140) 70×100cm	目安身長: ~180cm未満	¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税)
パオメッシュブルー フル (PAO150) 70×140cm	目安身長: ~175cm未満	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)
パオメッシュグレー フル 小 (PAO350)	目安身長: 135~150cm未満	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)
パオメッシュグレー フル 中 (PAO340)	目安身長: 150~190cm未満	¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税)

休足スリング

- 水平状態でも楽に移乗できます。
- 尖足(せんそく)の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。

※スリングはリフトと併用して使用ください。

休足スリング (PAO160) 40×30cm	¥20,900(税込) / ¥19,000(非課税)
-------------------------	----------------------------



※スリングはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1枚が非課税になります。

介護リフト つるべー・安全懸架 T A N - P O P O 価格一覧

商品名1	商品名2	希望小売価格	税込価格	税
介護リフトつるべーF1セット	ステンレスアーム付	662,600		非課税
介護リフトつるべーF1セット(SK K)	ステンレスアーム付	742,900		非課税
介護リフトつるべーF2Rセット	ステンレスアーム付	736,300		非課税
介護リフトつるべーF2Rセット(SK K)	ステンレスアーム付	806,700		非課税
介護リフトつるべーBセット	ステンレスアーム付	649,400		非課税
介護リフトつるべーBWセット(検定付)ステンレスアーム	ステンレスアーム付	869,400		非課税
介護リフトつるべーBBセット	ステンレスアーム付	580,000		
介護リフトつるべーBBWセット(検定付)ステンレスアーム	ステンレスアーム付	800,000		
介護リフトつるべーG2Rセット	ステンレスアーム付	554,800		非課税
介護リフトつるべーU1セット	ステンレスアーム付	648,300		非課税
介護リフトつるべーU2Rセット	ステンレスアーム付	717,600		非課税
介護リフトつるべー Y6セット		596,400		非課税
介護リフトつるべー Y6Wセット(検定付)		816,400		非課税
介護リフトつるべー Y6Tセット	手すり付	694,400		非課税
介護リフトつるべー Y6TWセット(検定付)	手すり付	914,400		非課税
介護リフトつるべー Y4セット		554,400		非課税
介護リフトつるべー Y4Wセット(検定付)		774,400		非課税
介護リフトつるべー Y4Tセット	手すり付	652,400		非課税
介護リフトつるべー Y4TWセット(検定付)	手すり付	872,400		非課税
介護リフトつるべー Y6セット Li-PINK		689,800		非課税
介護リフトつるべー Y6Wセット(検定付) Li-PINK		909,800		非課税
介護リフトつるべー Y6Tセット Li-PINK	手すり付	787,800		非課税
介護リフトつるべー Y6TWセットLi-PINK (検定付)	手すり付	1,007,800		非課税
介護リフトつるべー Y6 Li-PINK safety robo		785,400		非課税
介護リフトつるべー Y4セット Li-PINK		652,000		非課税
介護リフトつるべー Y4Wセット(検定付) Li-PINK		872,000		非課税
介護リフトつるべー Y4Tセット Li-PINK	手すり付	750,000		非課税
介護リフトつるべー Y4TWセットLi-PINK (検定付)	手すり付	970,000		非課税
介護リフトつるべー Y4 Li-PINK safety robo		747,600		非課税
介護リフトつるべー Y4W Li-PINK safety robo (検定付)		967,600		非課税
介護リフトつるべー Y4・Y6セット専用手すり		98,000	107,800	税込
車搭載型介護リフト V-LIFT		680,000		非課税
リフト用デジタル体重計 検定付	MHS2600	220,000	242,000	税込
リフト用デジタル体重計 検定無し	MHS2600	180,000	198,000	税込
車椅子用つるべルト(黒輪・金具付セット)		22,500	24,750	税込
Cセット用スリングシート ハーフ	PAO170	30,000	33,000	税込

介護リフト つるべ・安全懸架 T A N - P O P O 価格一覧

商品名1	商品名2	希望小売価格	税込価格	税
Cセット用スリングシート フル	PAO180	30,000	33,000	税込
スリング ハーフ	PAO100	47,000	51,700	税込
スリング ハーフ	PAO120	58,000	63,800	税込
スリング ハーフロング	PAO130	61,000	67,100	税込
スリング ハーフメッシュブルー ハーフ	PAO140	42,000	46,200	税込
スリング ハーフメッシュブルー フル	PAO150	52,000	57,200	税込
休足スリング	PAO160	19,000	20,900	税込
スリング エヴァーフ中	EVE210	42,000	46,200	税込
スリング エヴァーフ小	EVE220	42,000	46,200	税込
スリング エヴァフル中	EVE240	52,000	57,200	税込
スリング エヴァフル小	EVE250	52,000	57,200	税込
スリング エヴァネックサポート	EVE260	13,000	14,300	税込
スリング ハーフメッシュグレー フル 中	PAO340	52,000	57,200	税込
スリング ハーフメッシュグレー フル 小	PAO350	52,000	57,200	税込
ぶらん歩 S		43,000	47,300	税込
ぶらん歩 M		43,000	47,300	税込
ぶらん歩 L		43,000	47,300	税込
移座えもんボードブルー	「介護の技術を変えよう！」QR付	16,000	17,600	税込
移座えもんボード ホワイト1000ES 移座えもんシート Black Lサイズ付	45*100	36,800	40,480	税込
移座えもんボード ホワイト800 30*80		9,000	9,900	税込
移座えもんグローブ		2,000	2,200	税込
移座えもんシート BLACK M		3,000	3,300	税込
移座えもんシート BLACK ML		5,500	6,050	税込
移座えもんシート BLACK L		7,500	8,250	税込
移座えもんシート BLACK S		2,500	2,750	税込
移座えもんシグロ		4,000	4,400	税込
移座えもんローラ ROLA-1000	1000*500	50,000	55,000	税込
移座えもんローラ ROLA-1800	1800*500	79,500	87,450	税込
移座えもんパッド	50*100(延長ストラップ2本付)	18,000	19,800	税込
移座えもんヒップベルト		12,000	13,200	税込
安楽キャリー AAタイプ 一体型	アームレスト付	156,200	171,820	税込
安楽キャリー Bタイプ 分離型	アームレスト付	239,800	263,780	税込
安楽キャリーBタイプ 穴あき座面付		255,200	280,720	税込
安楽キャリー用アームレスト	2本組A・B兼用	21,400	23,540	税込
安楽キャリーA・AAタイプ用補助ベルト		2,600	2,860	税込
安楽キャリーBタイプ用補助ベルト		2,600	2,860	税込
安楽キャリーBタイプ用ツルベルト(ラダータイプ)	4本組	10,500	11,550	税込

[illegible][illegible]