



## モリトー 介護リフトつるべー 製品仕様

### ■ つるべー標準仕様

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 昇降速度 上昇 (850mmアーム)         | 31.7mm/sec          |
| 昇降速度 下降 (850mmアーム)         | 37.1mm/sec          |
| 耐荷重                        | 100kg               |
| 上下ストローク (700/850/950mmアーム) | 955/1160/1300mm     |
| ハンガーフック間距離 (外寸法)※1         | 500 (560) mm        |
| 材 質                        | スチール・ステンレス (SUS304) |

※1 ハンガーフック間距離は、オプション (別売) にて、380と430mm仕様があります

### ■ つるべーY4・Y6セット仕様

|         |            |
|---------|------------|
| 昇降速度 上昇 | 36.3mm/sec |
| 昇降速度 下降 | 37.2mm/sec |
| 耐荷重     | 120kg      |
| 材 質     | スチール       |

### ■ オクトバス浴槽仕様

|           |                |
|-----------|----------------|
| サイズ (外寸法) | 1400×700×550mm |
| (内寸法)     | 1280×570×470mm |
| 容 量       | 湯水265ℓ         |
| 本体重量      | 110kg          |

### ■ つるべー電装品仕様

| 品目             | 形式    | 入力電圧  | 出力電圧    | 重量     | コード長さ         | 防水性能 | 定格  | 備考           |
|----------------|-------|-------|---------|--------|---------------|------|-----|--------------|
| モーター           | LA32  | 24V   | -       | 3.4kg  | 0.4mコイル       | IPX6 | 10% | 6000N最大電流値6A |
| スイッチ           | HB31  | 24V   | -       | 0.26kg | 0.6mコイル       | IPX6 | -   | -            |
| コントローラー        | CB08  | 100V  | 24VDC   | 1.4kg  | 5.1mストレート     | IPX6 | 5%  | AC電源設定のみ     |
| コントローラー        | CB12  | 100V  | 24VDC   | 3.5kg  | 3.2mストレート     | IPX6 | 10% | バッテリー内蔵型     |
| Y4・Y6専用モーター    | LA34  | 24V   | -       | 4.2kg  | 0.4 (0.2)mコイル | IPX6 | 10% | 10000N       |
| Y4・Y6専用コントローラー | CBJ2  | 100V  | 24VDC   | 0.54kg | -             | IPX4 | 10% | バッテリー残量表示    |
| Y4・Y6専用コントローラー | BAJ1  | -     | 24VDC   | 2.7kg  | -             | IPX4 | -   | -            |
| Sセットモーター       | LA34  | 24V   | -       | 3.83kg | 0.4mコイル       | IPX6 | 10% | 10000N       |
| Sセットスイッチ       | HB31  | 24V   | -       | 0.26kg | 0.4mコイル       | IPX6 | -   | -            |
| Sセットコントローラー    | CB12  | 100V  | 24VDC   | 2.33kg | 3.2m          | IPX6 | 10% | -            |
| リチウムイオン電池      | BAL50 | 29.4V | 25.2VDC | 0.9kg  | -             | IPX6 | -   | -            |

バッテリータイプ (CB12) 小型シール蓄電池NP1.2-1.2V、1.2Ahを2台使用  
(CBJ2) 小型シール蓄電池52.9-1.2V、2.9Ahを2台使用

### ■ オクトバス Y4・Y6セットLi-PINK電装品仕様

| 品目      | 型 式   | 入力電圧  | 出力電圧    | 防水性能 | 備 考    |
|---------|-------|-------|---------|------|--------|
| モーター    | LA34  | 24V   | -       | IPX6 | 10000N |
| スイッチ    | HB31  | 24V   | -       | IPX6 | -      |
| チャージャー  | CHL50 | 100V  | 29.4VDC | IPX4 | -      |
| バッテリー   | BAL50 | 29.4V | 25.2VDC | IPX6 | 2.6Ah  |
| コントローラー | COL50 | 100V  | 29.4VDC | IPX6 | -      |

### ■ つるべーCセット V-Lift電装品仕様

| 品目              | 入力電圧 | 防水性能 | 定格  | 備考                |
|-----------------|------|------|-----|-------------------|
| モーター            | 24V  | IPV6 | 10% | 10000N/最大電流7.7A   |
| コントローラー         | 12V  | -    | 10% | アクセレーションカット機能     |
| ワイヤレススイッチ (2個付) | -    | -    | -   | ボタン電池 CR2016x2個使用 |


- コントローラーの全タイプに過負荷保護回路を配定。過負荷でモーター電源を遮断
- コントローラーのバッテリータイプには、バッテリー残量警報を設定。残量50%でアラーム音作動
- コントローラーの全タイプのトランス内にヒューズの設置。1次保護電圧ヒューズA

### ■ つるべーTEN仕様

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 走行方式        | C450 手動走行           |
| 本体重量        | 10kg                |
| 焼酎重量        | 204kg               |
| 昇降ストローク     | 2030mm              |
| 昇降速度        | 45mm/秒              |
| 動力電源        | DC24V (バッテリー駆動)     |
| 充電器入力       | AC100-120V 1.0A     |
| 充電器出力       | DC24V 1.5A          |
| 充電方法        | レールの端で自動充電          |
| バッテリー       | 12V5.0Ahx2個 密閉形鉛蓄電池 |
| バッテリー残量表示   | 液晶LED表示 (各アラーム)     |
| 操作方法        | 上下押しボタン方式           |
| ペンダントスイッチ   | 空気圧式                |
| 赤外線リモコン     | ○                   |
| ストラップ残量検知   | ○                   |
| 過速度検知       | ○                   |
| スロースタートストップ | ○                   |
| オートリターン機構   | ○                   |
| 静かなモード      | ○                   |
| 乱暴防止        | ○                   |
| 緊急停止装置      | (電動と手動があり)          |
| 緊急停止装置      | ○                   |

### ■ つるべーCセット V-Lift仕様

|         |       |
|---------|-------|
| 上下ストローク | 985mm |
| 耐荷重     | 100kg |
| 材 質     | スチール  |

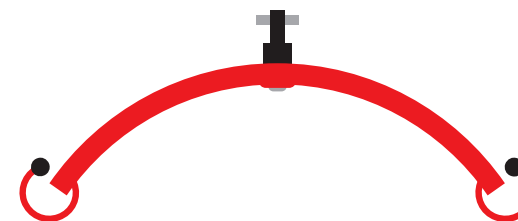

## NURSING LIFT

介護リフト

つるべー  
TSURUBE  
LINEUP

製造発売元



■本 社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

- 札幌営業所 / 〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101
- 仙台営業所 / 〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22
- 埼玉営業所 / 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103
- 中部営業所 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36
- 大阪営業所 / 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンバトオフィスB号
- 岡山営業所 / 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉30-102
- 福岡営業所 / 〒811-1204 福岡県都賀川市片縄東1-12-1
- 東京有明ショールーム / 〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー8階2号室
- 福岡大野 / 〒398-0001 長野県大町市大字平22393

お客様相談室  
(24時間受付)  
モリトーホームページ  
Email

0120-65-2525  
http://www.moritoh.co.jp  
info@moritoh.co.jp  
TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555



製品価格表



販売店

※取付け工事費が別途必要です。機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 O/F/T/3



耐荷重  
100kg

ベッドの重さを利用したベッド設置式介護リフト

## つるべー B・BBセット

様々な介護ベッドに使用できるよう長さ・幅の調整が可能。

紹介動画



外観寸法



つるべー BBセット

## Bセットの特徴

- 支柱の設置位置は環境に合わせて、ベッドの頭側の左右、足側の左右の4か所から選べます。
- 360度回転。掃き出し窓から外の車椅子へ乗り換えなど、レイアウトで様々な使用ができます。

## BBセットの特徴

- キャスター付ベッドへ設置してもベッド移動が可能。頻繁にベッドを動かす方やベッド緊急搬送時にも支障がなく、病院・施設でも導入されています。
- ハーネスを使用することで、背面開放の端座位をつくり、立位姿勢・立位移乗が可能。自立化を大きくサポートします。
- 2関節アームのため、可動範囲が広がり、着座位置などの微調整が可能です。



つるべー Bセット

BWセット・BBWセットは体重計付きです。

360度回転アーム  
置き場所が様々な使い方が可能になります。  
[Bセット]関節付きアーム  
可動範囲が広がります。  
[BBセット]

つるべー Bセット



つるべー BBセット



## リフト用デジタル体重計 MHS-2600

つるべーに乗ったまま体重測定が可能。

体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。  
BMI(体格指数)機能があり、体重管理にも使用されています。  
※B・BBセット、Y4・Y6セット、TENIに取付できます。  
※レンタル仕様では検定なしになります。

- 最小単位/100g
- 電源/アルカリ単4乾電池6本
- 風袋引き機能付き

検定付

耐荷重  
204kg

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト

## つるべー TEN

レールの長さで移動範囲のニーズに対応できます。



設置式(XY型)

## 設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。

## 据置式の特徴

- 工場の必要がない仕様や壁面固定の後施工も可能。据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がご用意です。

スプリングハンガーを使用した  
SSシリーズも設置可能です。

据置式(2ポスト)

## C-450(手動走行)

コンパクトな高性能レール走行リフト

- 操作性の良い防滴ハンドスイッチ。
  - バッテリー残量やリフトの状態を見やすい液晶ディスプレイ。
  - 安全・安心設計
- オープン価格 無線リモコンタイプもご用意です。

耐荷重  
100kg

楽しいカーライフを満喫できる車搭載型介護リフト

## つるべー Cセット V-Lift

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。



つるべー Cセット V-Lift

## Cセットの特徴

- フルマのシートに座れるため安全で、介助者の目も行き届きます。
- 助手席、後部2列目席のどこでも移乗可能で、座る場所が限定されません。
- 女性でも簡単に着脱可能で、コンパクトに収納できます。
- 走行時は取り外しておくことで邪魔になりません。



後部座席移乗イメージ



V-Lift 取付イメージ



V-Lift カバー

耐荷重  
100kg

自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト

## つるべー F1・F2Rセット

ユニットバスにも設置できます。

紹介動画



外観寸法



つるべー F2Rセット



つるべー F1セット



つるべー F2Rセット

F1セットとF2Rセットの違い



つるべー F1セット



つるべー F2Rセット

壁固定と突っ張り棒接着固定式等、様々な設置方法があり、お風呂・トイレ以外への設置も可能なリフトです。

## F1セット、F1SKKセットの特徴

- コンパクトで収容性が高く、1人用ベッドなど、様々な設置位置が固定され、操作が簡単です。

## F2Rセット、F2RSKKセットの特徴

- 2段階アーム式なので、床面を上げたり、伸ばしたりすることで、介護者が広がり、楽な姿勢での移動が可能です。



壁固定

ブラケット

安全

脱衣場から、洗い場・浴槽まで



突っ張り棒接着固定

ローラーブラケット

突っ張り棒

安全プレート

安全

耐荷重  
120kg

介護リフト付きホーロー浴槽

## OCTBATH

置くだけのアウトバス／給排水工事不要※／電源工事不要

紹介動画




外観寸法



## OCTBATHの特徴

- お風呂でゆっくり入浴を楽にしたい介護者が一人でもOK。目覚ましやけが防止機能で安全に利用できます。
- 優れた熱断熱性により浴槽全体を保温してくれる心地よさは格別です。暖房ファンで削っても音が付かず、湯船やカビもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。
- ゆったり入浴できる1400×720mmの浴槽サイズにこだわらず、内寸法1600×1600mmの浴槽スペースでのゆとり入浴が可能です。

レイアウト図一例

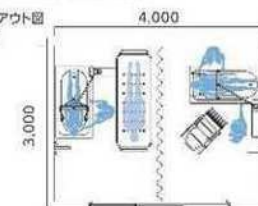

## リチウムイオンバッテリー搭載

IPX6の防水リチウムイオンバッテリー浴槽で運用し、充電コードは取り外し可能。管理が簡単で、充電を忘れてもバッテリーが安全なため、充電コードと比較すると、軽量の良方。性能は当然、製品比較で2倍です。



介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【一式】 無料点検付き ¥2,310,000(税込)

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Aセット】 無料点検付き 豪華キャリー・Aタイプ+スリング2枚セット ¥2,475,000(税込)

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Bセット】 無料点検付き 豪華キャリー・Bタイプ+スリング2枚セット ¥2,530,000(税込)

※無料点検付きリフト専用、早見見、送付設置状況のチェック、使用方法的確認(研修) 6年(1回/年)

足元の開放と、旋回性の向上を追求した床走行式リフト

## つるべ Y4・Y6 Safety Robotセット

小柄な介助者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます。  
床からの移乗にも適しています。



Y6セット LI-PINK

Y6セット LI-PINK 手すり付



Y6セット LI-PINK 手すり付

ハーネスとベルトを使った状態を車椅子からの立ち上がり時に使用



※ 昇降は片手で約2秒で完了

※ 車椅子に昇降する際は必ず足元の安全装置をONにします

つるべ Y4・Y6 Safety Robotセット  
専用手すり

- 手すりの両側の位置は、4段階で調整可能です。
- 動き始め等のご本人の手すりを、手すりを乗ることで確認します。



## Y6セット(6輪)の特徴

- 脚部前方の径は63mmで床にベタ貼り、6輪でキャスターによりその場での旋回が可能。狭いお部屋の取り回しが楽です。



## Y4セット(4輪)の特徴

- 床材の影響を受けにくい大きい(75φ)前輪キャスターを採用しているため、前進・後進がとてもスムーズ。軽く移動が出来ます。



## Y4、Y6セット LI-PINKの特徴

- リチウムイオンバッテリーを搭載することにより
  - ・バッテリー軽量化
  - ・有金UP
  - ・充電忘れによる劣化が少ない
  - ・充電時間が大幅に短縮
  - ・充電ケーブルなしなど利便性が大幅にアップしました。

※ 仕様により価格が異なります。  
市町村窓口でご確認ください。耐荷重  
100kgつるべシリーズで最もコンパクトなリフト  
つるべ G2Rセット  
U1・U2Rセット

自車の玄関が階段でも楽に外へ出ることが可能です。



つるべ G2Rセット

## G2Rセットの特徴

- 玄関、お風呂、トイレ、寝室など様々な場所の壁に設置できます。
- 200mmの扉厚で可動範囲が狭く、曲がり角での設置場所にも使用できます。



つるべ G2Rセット

## U1セットの特徴

- 床に固定するリフト。壁に固定できない応用にお勧めです。支柱高1100、1350、1600mmの3種から最適な高さで設置できます。



つるべ U1セット

## U2Rセットの特徴

- U1セットに脚部(300mm・400mm)を追加したリフト。



車椅子用ソルベットセット

## 車椅子用ソルベットセットの特徴

- 車椅子に専用金具を付けて、車椅子に乗ったまま移動します。

車椅子用ソルベットセット  
使用可能な車椅子の条件紹介動画  
▶▶▶外観寸法  
▶▶▶耐荷重  
120kg

Y6セット LI-PINK Safety Robot



吊り具の掛け忘れ確認装置

## Y6セット LI-PINK Safety Robot

- 床走行式リフトがロボット化。吊り具の掛け忘れ確認装置(音声ガイド)搭載で安全・安心に。
- 吊り上げ時、約20kgの重さを感知するとリフトが一止まり、音声ガイド(吊り具の安全を確認してください。)が流れます。安全確認後上昇ボタンを押すことで再度上昇を完了します。

※ Y6セット LI-PINK Safety Robotは介護保険レンタルの対象とはなりません。

紹介動画  
▶▶▶外観寸法  
▶▶▶耐荷重  
100kg



乗りごち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー

## 安楽キャリー



上部座部と下部台車が分離、リフトの吊り具として使用可能。※ツルベルトは同梱されます。

## 安楽キャリーの特徴

- シートの張りを換えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能。ため小スペースでの使用も難しくなく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー(オプション)を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。



安楽キャリーAAタイプ(一体型)  
安楽キャリーBタイプ(分離型)  
安楽キャリーBタイプ(分離型)穴あき座面付


※Bタイプはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1台が非課税となります。(オプションは課税です)



## 延長バー使用時



## 安楽キャリー専用オプション・買い替え可能消耗品

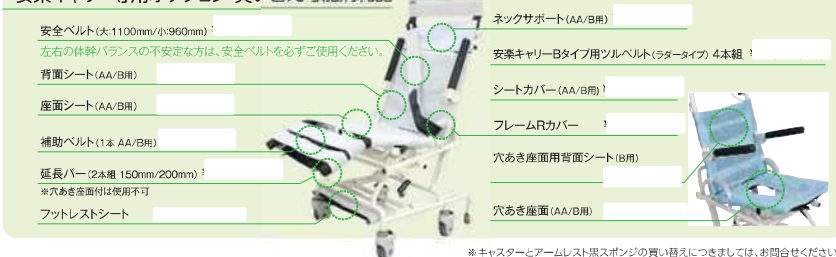

※キャスターとアームレスト黒スポンジの買い替えにつきましては、お問合せください。

装着のしやすさと快適な乗り心地を追求した

## スリング エヴァ／パオ



**エヴァ ハーフ**  
首や体幹の支持力が比較的高い方に使用します。

**エヴァ フル**  
首や体幹の支持力が比較的低い方に使用します。頸部保持機能により過屈曲を抑制。

**エヴァ ネックサポート**  
エヴァハーフを使用されていて、首や体幹の支持力が比較的低くなってきた場合に使用します。

※写真はエヴァ ハーフ、エヴァ フル中でカラーはホワイト、小はライトグレーとなります。

## エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままで滑脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水抜きが容易にできます。

|                     |                    |                            |
|---------------------|--------------------|----------------------------|
| エヴァハーフ 小 (EVE220)   | 目安身長: 135~150cmくらい | ¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税) |
| エヴァハーフ 中 (EVE210)   | 目安身長: 150~190cmくらい | ¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税) |
| エヴァフル 小 (EVE250)    | 目安身長: 135~150cmくらい | ¥67,200(税込) / ¥52,000(非課税) |
| エヴァフル 中 (EVE240)    | 目安身長: 150~190cmくらい | ¥67,200(税込) / ¥52,000(非課税) |
| エヴァネックサポート (EVE260) | 30×19.5cm          | ¥14,300(税込) / ¥13,000(非課税) |



**パオ ハーフ**  
首や体幹の支持力が比較的高い方に使用します。



**パオ フル**  
比較的首の握りやすい方に使用します。

|                 |          |                  |                            |
|-----------------|----------|------------------|----------------------------|
| パオ ハーフ (PAO100) | 70×100cm | 目安身長: 1~180cmくらい | ¥51,700(税込) / ¥47,000(非課税) |
| パオ フル (PAO120)  | 70×130cm | 目安身長: 1~175cmくらい | ¥63,800(税込) / ¥58,000(非課税) |
| パオ ロング (PAO130) | 70×150cm | 目安身長: 1~190cmくらい | ¥67,100(税込) / ¥61,000(非課税) |

## パオの特徴

- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能で床ずれ予防効果があります。
- ツルベルトが外せるため移乗後邪魔になりにくいです。

## パオメッシュの特徴

- 編み目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも適用可能です。



|                         |          |                    |                            |
|-------------------------|----------|--------------------|----------------------------|
| パオメッシュブルー ハーフ (PAO140)  | 70×100cm | 目安身長: 1~180cmくらい   | ¥46,200(税込) / ¥42,000(非課税) |
| パオメッシュブルー フル (PAO150)   | 70×140cm | 目安身長: 1~175cmくらい   | ¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税) |
| パオメッシュグレー フル 小 (PAO350) |          | 目安身長: 135~150cmくらい | ¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税) |
| パオメッシュグレー フル 中 (PAO340) |          | 目安身長: 150~190cmくらい | ¥57,200(税込) / ¥52,000(非課税) |

## 休足スリング

- 水平状態でも楽に移乗できます。
- 尖足(せんそく)の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。

※スリング/パオと併用して使用ください。

|                 |         |                            |
|-----------------|---------|----------------------------|
| 休足スリング (PAO160) | 40×30cm | ¥20,900(税込) / ¥19,000(非課税) |
|-----------------|---------|----------------------------|



※スリングはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1台が非課税になります。

## 介護リフト つるべー

## 価格一覧

| 商品名1                                    | 商品名2      | 希望小売価格    | 税込価格    | 税   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 介護リフトつるべーF1セット                          | ステンレスアーム付 | 662,600   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべーF1セット(SKK)                     | ステンレスアーム付 | 742,900   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべーF2Rセット                         | ステンレスアーム付 | 736,300   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべーF2Rセット(SKK)                    | ステンレスアーム付 | 806,700   |         | 非課税 |
|                                         |           |           |         |     |
| 介護リフトつるべーBセット                           | ステンレスアーム付 | 649,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべーBWセット(検定付)ステンレスアーム             | ステンレスアーム付 | 869,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべーBBセット                          | ステンレスアーム付 | 580,000   |         |     |
| 介護リフトつるべーBBWセット(検定付)ステンレスアーム            | ステンレスアーム付 | 800,000   |         |     |
|                                         |           |           |         |     |
| 介護リフトつるべーG2Rセット                         | ステンレスアーム付 | 554,800   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべーU1セット                          | ステンレスアーム付 | 648,300   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべーU2Rセット                         | ステンレスアーム付 | 717,600   |         | 非課税 |
|                                         |           |           |         |     |
| 介護リフトつるべー Y6セット                         |           | 596,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6Wセット(検定付)                   |           | 816,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6Tセット                        | 手すり付      | 694,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6TWセット(検定付)                  | 手すり付      | 914,400   |         | 非課税 |
|                                         |           |           |         |     |
| 介護リフトつるべー Y4セット                         |           | 554,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4Wセット(検定付)                   |           | 774,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4Tセット                        | 手すり付      | 652,400   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4TWセット(検定付)                  | 手すり付      | 872,400   |         | 非課税 |
|                                         |           |           |         |     |
| 介護リフトつるべー Y6セット Li-PINK                 |           | 689,800   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6Wセット(検定付) Li-PINK           |           | 909,800   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6Tセット Li-PINK                | 手すり付      | 787,800   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6TWセットLi-PINK (検定付)          | 手すり付      | 1,007,800 |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y6 Li-PINK safety robo        |           | 785,400   |         | 非課税 |
|                                         |           |           |         |     |
| 介護リフトつるべー Y4セット Li-PINK                 |           | 652,000   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4Wセット(検定付) Li-PINK           |           | 872,000   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4Tセット Li-PINK                | 手すり付      | 750,000   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4TWセットLi-PINK (検定付)          | 手すり付      | 970,000   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4 Li-PINK safety robo        |           | 747,600   |         | 非課税 |
| 介護リフトつるべー Y4W Li-PINK safety robo (検定付) |           | 967,600   |         | 非課税 |
|                                         |           |           |         |     |
| 介護リフトつるべー Y4・Y6セット専用手すり                 |           | 98,000    | 107,800 | 税込  |
|                                         |           |           |         |     |
| 車搭載型介護リフト V-LIFT                        |           | 680,000   |         | 非課税 |
|                                         |           |           |         |     |
| リフト用デジタル体重計 検定付                         | MHS2600   | 220,000   | 242,000 | 税込  |
| リフト用デジタル体重計 検定無し                        | MHS2600   | 180,000   | 198,000 | 税込  |
|                                         |           |           |         |     |
| 車椅子用つるべベルト(黒輪・金具付セット)                   |           | 22,500    | 24,750  | 税込  |
|                                         |           |           |         |     |
| Cセット用スリングシート ハーフ                        | PAO170    | 30,000    | 33,000  | 税込  |

## 介護リフト つるべー

## 価格一覧

| 商品名1                     | 商品名2               | 希望小売価格  | 税込価格    | 税  |
|--------------------------|--------------------|---------|---------|----|
| Cセット用スリングシート フル          | PAO180             | 30,000  | 33,000  | 税込 |
|                          |                    |         |         |    |
| スリング ハーフ                 | PAO100             | 47,000  | 51,700  | 税込 |
| スリング ハーフ                 | PAO120             | 58,000  | 63,800  | 税込 |
| スリング ハーフ                 | PAO130             | 61,000  | 67,100  | 税込 |
| スリング ハーフメッシュブルー ハーフ      | PAO140             | 42,000  | 46,200  | 税込 |
| スリング ハーフメッシュブルー フル       | PAO150             | 52,000  | 57,200  | 税込 |
| 休足スリング                   | PAO160             | 19,000  | 20,900  | 税込 |
| スリング エヴァーハーフ中            | EVE210             | 42,000  | 46,200  | 税込 |
| スリング エヴァーハーフ小            | EVE220             | 42,000  | 46,200  | 税込 |
| スリング エヴァーフル中             | EVE240             | 52,000  | 57,200  | 税込 |
| スリング エヴァーフル小             | EVE250             | 52,000  | 57,200  | 税込 |
| スリング エヴァーネックサポート         | EVE260             | 13,000  | 14,300  | 税込 |
| スリング ハーフメッシュグレー フル 中     | PAO340             | 52,000  | 57,200  | 税込 |
| スリング ハーフメッシュグレー フル 小     | PAO350             | 52,000  | 57,200  | 税込 |
|                          |                    |         |         |    |
| ぶらん歩 S                   |                    | 43,000  | 47,300  | 税込 |
| ぶらん歩 M                   |                    | 43,000  | 47,300  | 税込 |
| ぶらん歩 L                   |                    | 43,000  | 47,300  | 税込 |
|                          |                    |         |         |    |
| 移座えもんボードブルー              | 「介護の技術を変えよう！」QR付   | 16,000  | 17,600  | 税込 |
| 移座えもんボード ホワイト1000        | 45*100             | 18,000  | 19,800  | 税込 |
| 移座えもんボード ホワイト800 30*80   |                    | 9,000   | 9,900   | 税込 |
|                          |                    |         |         |    |
| 移座えもんグローブ                |                    | 2,000   | 2,200   | 税込 |
|                          |                    |         |         |    |
| 移座えもんシート BLACK M         |                    | 3,000   | 3,300   | 税込 |
| 移座えもんシート BLACK ML        |                    | 5,500   | 6,050   | 税込 |
| 移座えもんシート BLACK L         |                    | 7,500   | 8,250   | 税込 |
| 移座えもんシート BLACK S         |                    | 2,500   | 2,750   | 税込 |
|                          |                    |         |         |    |
| 移座えもんシーグロ                |                    | 4,000   | 4,400   | 税込 |
|                          |                    |         |         |    |
| 移座えもんローラ ROLA-1000       | 1000*500           | 50,000  | 55,000  | 税込 |
| 移座えもんローラ ROLA-1800       | 1800*500           | 79,500  | 87,450  | 税込 |
| 移座えもんパッド                 | 50*100(延長ストラップ2本付) | 18,000  | 19,800  | 税込 |
| 移座えもんヒップベルト              |                    | 12,000  | 13,200  | 税込 |
|                          |                    |         |         |    |
| 安楽キャリー AAタイプ 一体型         | アームレスト付            | 156,200 | 171,820 | 税込 |
| 安楽キャリー Bタイプ 分離型          | アームレスト付            | 239,800 | 263,780 | 税込 |
| 安楽キャリーBタイプ 穴あき座面付        |                    | 255,200 | 280,720 | 税込 |
|                          |                    |         |         |    |
| 安楽キャリー用アームレスト            | 2本組A・B兼用           | 21,400  | 23,540  | 税込 |
| 安楽キャリーA・AAタイプ用補助ベルト      |                    | 2,600   | 2,860   | 税込 |
| 安楽キャリーBタイプ用補助ベルト         |                    | 2,600   | 2,860   | 税込 |
| 安楽キャリーBタイプ用ツルベルト(ラダータイプ) | 4本組                | 10,500  | 11,550  | 税込 |

## 介護リフト つるべー

## 価格一覧

[illegible]