

設置工事不要

MORITOH

介護リフト付きホーロー浴槽

OCTBATH

ENAMEL BATHTUB WITH NURSING LIFT

OCTBATH 製品仕様

■リフト仕様

昇降速度 上昇	30.1mm/sec
昇降速度 下降	31mm/sec
耐荷重(湯なし)	100kg
耐荷重(湯あり)	120kg
ハンガー幅(外寸法)	500(560)mm
材質	ステンレス(SUS304)
安全装置	挟み込み防止※
支柱旋回範囲	360度回転
高さ	1500mm
長さ	1400mm
幅	1340mm
アームストローク	1110mm
アーム最上端高さ	2045mm

※エレクトロニカルスブライン機構


■電装品仕様

	モーター	スイッチ	チャージャー	バッテリー	コントローラー
型 式	LA34	HB31	CHL50	BAL50	COL50
出力電源	-	-	29.4VDC	25.2VDC	24VDC
入力電源	24V	24V	100V	29.4V	25.2VDC
防水性能	IPX6	IPX6	IPX4	IPX6	IPX6
備 考	10000N				


■浴槽仕様

サイズ (外寸法)	1400×700×550mm
サイズ (内寸法)	1280×570×470mm
容 量	満水 265 ℓ
本体重量	110kg

■外観寸法図

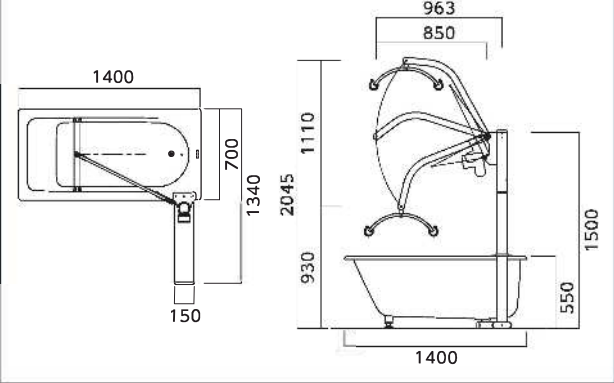

■レイアウト図一例

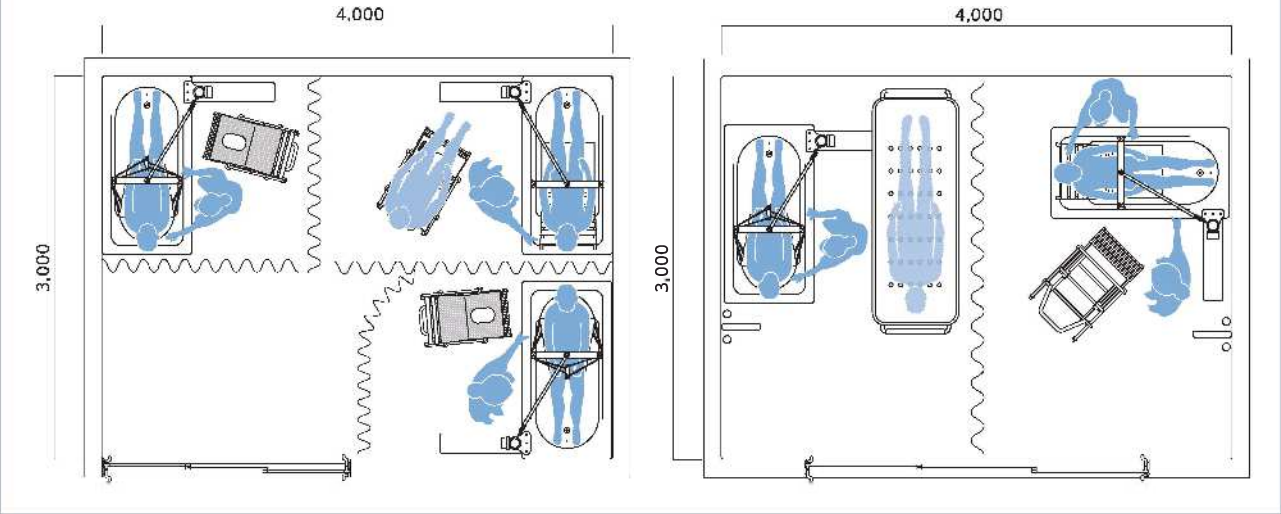

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH 【一式】

OCTBATH	無料点検付き
価格 ¥2,310,000 (税込)	
(¥2,100,000 (税抜))	

■無料点検内容 リフト動作、吊り具、浴槽設置状況のチェック
使用方法的確認(研修) 6年(1回/年)

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH 【Aセット】

安楽キャリーAAタイプ+スリング2枚 無料点検付き	
セット価格 ¥2,475,000 (税込)	
(¥2,250,000 (税抜))	

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH 【Bセット】

安楽キャリーBタイプ+スリング2枚 無料点検付き	
セット価格 ¥2,530,000 (税込)	
(¥2,300,000 (税抜))	

※機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承願います。

製造発売元



■本 社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

お客様相談室
[24時間受付]

ホームページ

Email

0120-65-2525

モリトー で検索!

info@moritoh.co.jp



- 札幌営業所 TEL(011) 708-5200
- 仙台営業所 TEL(022) 302-7914
- 埼玉営業所 TEL(048) 753-9393
- 東京有明ショールーム TEL(03)5531-5555
- 中部営業所 TEL(0586) 71-6151
- 大阪営業所 TEL(06) 6785-7202
- 岡山営業所 TEL(086) 259-2910
- 福岡営業所 TEL(092) 953-1892
- 信濃大町研修センター TEL(0261) 23-1678

■販売店



最高のバスタイム 至福の癒しを





置くだけのオクトバス

給排水工事不要※1

電源工事不要

耐荷重
120kg
※2

※1 給湯、排水設備は必要です。 ※2 お湯を張った状態での耐荷重です。

ホーロー浴槽という贅沢、バスリフトという安心。

寝浴から個浴が時代の流れ

お風呂でゆったり入浴を楽しみたい。介助者は一人でもOK。目線を合わせた優しい介助で会話が弾みます。仰向けになり天井を見ながらの入浴では味わえない喜びをお届けします。




高級感あふれる
鋳物ホーロー浴槽

190年の伝統を誇る高級鋳物ホーロー浴槽です。最高級の品質と美しい仕上がり、25年以上贅沢な輝きが保たれます。優れた熱伝導により浴槽全体で体を温められる心地よさは抜群です。表面はコインで削っても傷が付かず湯垢やカビもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。



コンパクト設計の
リフト付き特殊浴槽

ゆったり入浴できる1400×700mmの浴槽サイズにもかかわらず、内寸法1600×1600mmの浴室スペースでゆとりの入浴介助ができます。取り扱いが簡単でどなたが使用しても着地のベストポイントを外しません。

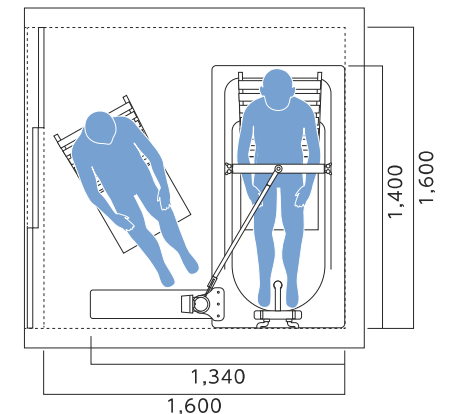

安楽キャリー

乗りごち、使い易さを極めた
シャワーキャリー

耐荷重
100kg



安楽キャリー B type／分離型 安楽キャリー AA type／一体型

スリングシート エヴァ

サイドメッシュで水はけがよく、
角度調整も自在

耐荷重
140kg



スリングシート エヴァ／ハーフ スリングシート エヴァ／フル


スリングシート パオメッシュ

安全安心なメッシュのシート型スリングで
快適な乗り心地

耐荷重
140kg



パオメッシュブルー／ハーフ パオメッシュブルー／フル

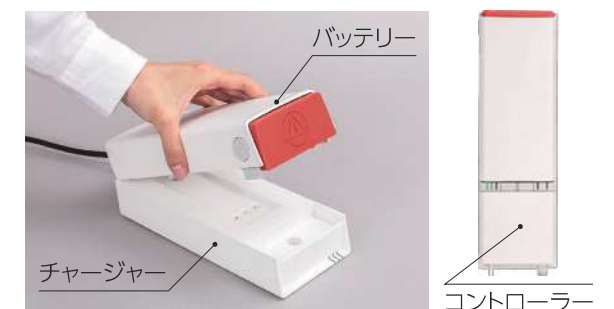

リチウムイオンバッテリー搭載

IPX6の防水リチウムイオンバッテリー搭載で煩わしい充電コードはありません。管理が簡単で、充電を忘れてもバッテリー寿命は変わりません。鉛バッテリーと比較すると、軽量で、長寿命。容量がなくなる数回前までフルパワーで使用でき、性能は当社製品比較で2倍です。