

介護リフトつるべ

(ワイシックス)

床走行式リフトY6セット



わずか
115cm

「安・楽・満」をお届けします。

介護する方にも、
介護される方にも、

コンパクト

視界もすっきり、
フレームの高さわずか115cm。
従来モデルよりも
さらにコンパクト。

大開放

下部の大空間で
リクライニング車いすでも、
足が当たりません。

回転性向上

6輪の自在キャスターで
狭い部屋でも
取り回し楽々。

※畳、絨毯、クッションフロアでは使用できません。




MORITOH CORPORATION

株式会社

モリトー



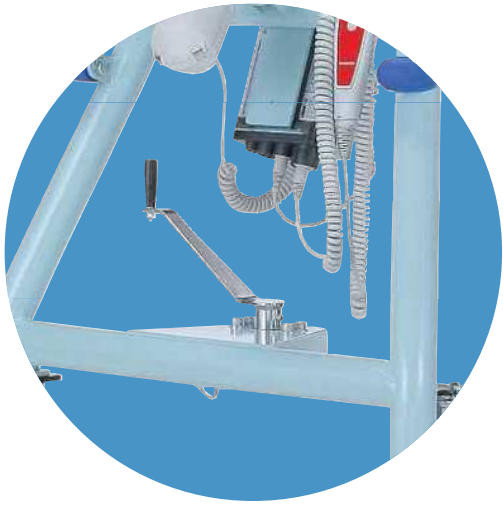

脚部は軽くレバーを
回すだけで開閉できます。




床からの移乗も楽しく。
6輪の自在キャスターで、
狭い部屋でも取り回しが簡単に。



最高級モーター使用で
安心の**3年保証**！


つるべY6セット外観寸法図

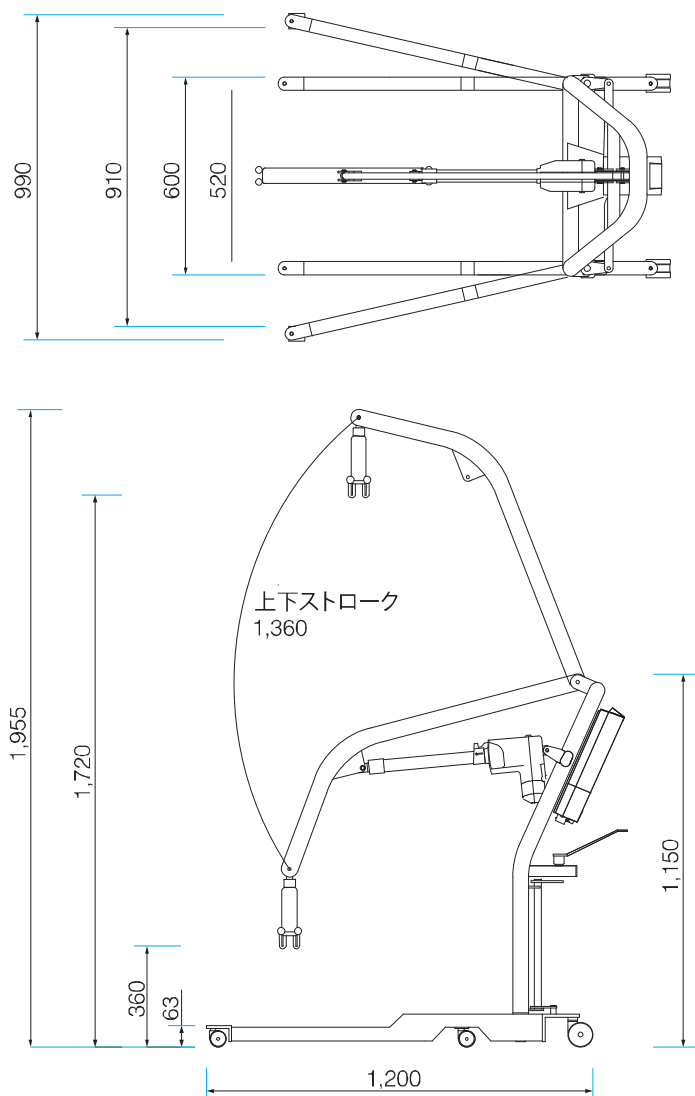

つるべY6セット仕様

上下ストローク	約1,360mm
吊上げ高さ(最高)	床より 1,720mm
(最低)	床より 360mm
体重計装着時	(最高)床より 1,560mm (最低)床より 200mm
■耐 荷 重:	120kg
■本体重量:	42kg
■バッテリー付(家庭用電源AC100Vで充電)	
■搭載機能	・緊急停止ボタン ・エマージェンシースイッチ ・クイックリリース ・挟み込み防止 ・バッテリー残量表示

リフト用デジタル体重計MHS-2600仕様

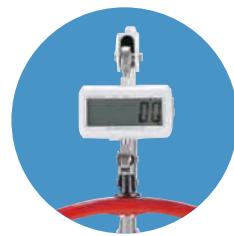

- 最大計測可能範囲／2kg～150kgまで
- 最低単位／100g
- 表示部／5.5インチ液晶ディスプレイ
- 使用可能温度／0度～40度
- 計量単位／キログラム
- 製品寸法／120×70×160mm
- 電源／アルカリ単4乾電池6本

つるべY6セット

つるべY6Wセット(体重計付)

リフト用デジタル体重計 MHS-2600

製造発売元



■本 社／〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

- 札幌営業所／〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101
- 仙台営業所／〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22
- 埼玉営業所／〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103
- 中部営業所／〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36
- 大阪営業所／〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンパクトオフィスB号
- 岡山営業所／〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉30-102
- 福岡営業所／〒811-1204 福岡県那珂川市片縄東1-12-1
- 東京有明
ショールーム／〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イースタワー9階2号室
- 信濃大町
研修センター／〒398-0001 長野県大町市大字平22393

お客様相談室
[24時間受付]

モリトーホームページ
Email

0120-65-2525

http://www.moritoh.co.jp
info@moritoh.co.jp

TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555

- TEL (011) 708-5200 FAX (011) 708-5201
- TEL (022) 302-7914 FAX (0586) 72-4555
- TEL (048) 753-9393 FAX (03) 5531-5550
- TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555
- TEL (06) 6785-7202 FAX (06) 6785-7203
- TEL (086) 259-2910 FAX (0586) 72-4555
- TEL (092) 953-1892 FAX (092) 953-1973
- TEL (03) 5531-5555 FAX (03) 5531-5550
- TEL (0261) 23-1678



製品価格表

販売店