



SAFETY SUSPENSION SYSTEM

安全懸架裝置

TAN • POPO

单 步 步

LINEUP



安心で安全な、
質の高い
歩行練習を
患者様に
合わせて提供。

SAFETY SUSPENSION SYSTEM



リフトとハーネスを使い分けることで、軽症者から重症者までそれぞれに合わせた歩行練習がおこなえます。転倒リスクの高い応用練習も、安全に可能となります。

撮影協力：済生会守山市民病院 様



病院導入事例動画



撮影協力：
熱田リハビリテーション病院 様

世界初! パラレル 前後左右の動きに対応!
自由度の高い歩行練習・
バランス練習を可能にします。

使用例

- ボール蹴り
- 自転車
- 風船バレー
- タンデム歩行
- 懸足歩行
- TVゲーム etc...

使い方は無限大!



TPP 軽度者から重度者まで使い方は無限!



免荷リフト
(SS300, SS100)
の軽量化によって
このパラレル
のタイプを実現
することができ
ました。

TPPはフルオーダーの据置型免荷リフトです。(工事不要*)オーダー製作ですので、5m・10m・15mなどリハビリ室に合わせて最適な長さで製作可能です。また、1本走行と2本走行、XYレール(パラレル)も選択可能です。4機種(SS-100・SS-300・SS-450・SS-1000)全てのレール走行式リフトに対応しております。

※設置場所によっては消防法によりスプリンクラーの移設工事が必要になる場合もございます。



パラレル事例動画

SS series

患者様の症状に合わせたリハビリテーションを可能にする5種類のラインナップをご用意しております。

※価格については、施工内容にあわせてお見積りとなります。

耐荷重
100kg

レール走行式 追従型免荷リフト

SS-1000



追従型免荷リフトは、ボールスプライン機構の採用で巻き取りドラムによる免荷機能とフリー駆動を実現しました。リフトの重さを感じることなく歩行開始・歩行時・停止時の動作をセンサが感知しリフトのスムーズな動きと安定した自然な歩行が可能となります。

レール走行式 免荷リフト(電動)

SS-450



リモコン操作により免荷量(懸架範囲)を0~100kgまで調整する事が出来ます。電動昇降のため、車いすからの立ち上がりも容易に行えます。

レール走行式 免荷リフト(手動)

SS-300



手動操作により適度に体重を免荷する事が可能です。予めスプリングハンガーを頭上にセットしておき、専用のSPベルトをハンガーに掛けます。その後、ベルトの長さ調整で容易に免荷することが可能となります。

レール走行式 セーフティタンブル(安全な転倒)

SS-100 Safety Tumble



免荷機能は無く、練習中の転倒時にはストッパー機能とスプリングハンガーの効果で比較的安全な転倒を体感できます。使用しない時は、ハンガーは上方に巻き取られ邪魔になりません。また、天井高に合わせて定位置にセットすることができます。


スプリングハンガー

歩行リハビリ専用開発されたスプリングハンガーは歩行時の動作に合わせスプリングが作用することで、より自然な歩行練習を実現します。また、転倒時の衝撃を吸収します。
※免荷量計はオプションです。



OPTION

SS/SPシリーズ
免荷量計
MHS-2600

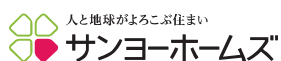

寄り添いロボット (転倒衝撃低減システム)

転倒を感知するとブレーキをかけ、ゆるやかに床に倒れさせる装着型のロボットです。転倒による怪我への不安を解消し、しっかりとリハビリトレーニングに励むことができます。ゆるやかに転倒するため、少し離れていても補助が可能です。



患者様・セラピストの負担を軽減しながら
より多くの歩行量を確保。

適切に体重を免荷することで、
疼痛や筋力低下による歩行困難を補うことができます。
セラピストの介助量も軽減し、歩行量を増やすことができます。

撮影協力：済生会守山市民病院 様



SP series

体重を免荷することで、楽に快適な歩行を実現します。
用途に合わせたサイズをご用意しております。

耐荷重
100kg



OPTION

ワイヤレススイッチ

HB200

適用機種：TGシリーズ



サイドグリップ

免荷量表示体重計

安全懸架式リハビリテーションリフト

TG-800 内寸 800mm

TG-1000 内寸 1000mm


歩行リハビリ専用開発されたスプリングハンガー採用で自然な歩行が可能。

125φのキャスター採用で滑らかな歩行が可能。

高機能4輪キャスターの採用で直進・自在回転・停止の切替が可能。

スイッチ操作で容易に免荷量操作が可能。

※トレッドミルは別売です。

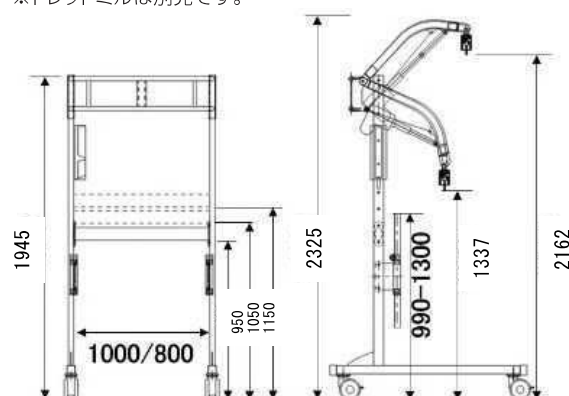

免荷式リハビリテーションリフト

SP-2000 サスペンションリフト

オーバーハングの機構採用により、車いすから垂直に立ち上がることができます。2,800mmレール採用で、最適位置への移動が容易に行え、使用中の固定もできます。動作解析装置との併用に最適です。

※トレッドミルは別売です。

リハビリテーション対応トレッドミル

PP-Tread

初速0.2km/hの低速走行と走行面145mmの低床型トレッドミルです。業務用モーター採用で長時間連続使用が可能です。簡単な操作パネルとシンプルなデザインで使いやすさを追求しました。操作パネルと支柱を外せば完全フラット状態としてご使用いただけます。



OPTION

PP-Tread専用
シリコン缶 1kg

KF-96



受付 Reception

SAFETY SUSPENSION SYSTEM

世界初! サスペンションアーム採用の コンパクトな免荷式リフト。

安全な立ち上がり、自然な歩行をサポート。

左右独立懸架のサスペンションで0~40kg免荷の自然な歩行ができ、その上、転倒リスクを大幅に軽減します。



施設導入事例動画

撮影協力: 済生会守山市民病院 様



POPO Li LIV-100

POPO series 体重を免荷しながら使用できるコンパクトなリフトです。

ポポ 免荷式リフト **popoLi REH-100 / LIV-100**

サスペンション
アームの採用

特許取得済

世界初!



※免荷式歩行リフトPOPOは独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業の助成により開発されました。

免荷式歩行リフト POPO Li REH-100

免荷式歩行リフト POPO Li LIV-100

免荷式歩行リフト POPO Li REH-200 (サイド手すり付)

免荷式歩行リフト POPO Li LIV-200 (サイド手すり付)

OPTION

POPO REH脚部

POPO LIV脚部

ワイヤレススイッチ HB200

OPTION



OPTION

ワイヤレススイッチ

HB200

適用機種: POPO Li



サスペンションリフト／免荷式リフトPOPO 専用共通ハーネス



ハーネスハイブリッド 対象者:軽度～重度者向け

HV-100(SS)**HV-110(S)****HV-120(M)****HV-130(L)****HV-140(LL)**

大腿部を覆うタイプで多くの免荷重を必要とする方にも使用できます。

座骨支持ベルトの採用で足の振出しをサポートします。そけい部への圧迫がなく快適な装着感が得られます。



ハーネスライト 対象者:軽度～中度者向け

L-110(S)**L-120(M)****L-130(L)**

クロッチベルトをそけい部に通すタイプで装着はとても簡単です。車いすに座った状態でも着脱が容易に行えます。クロッチベルトは脱着性と装着感の良い材質を採用しています。



ハーネススーパーライト 対象者:軽度者向け

SL-110(S)**SL-120(M)****SL-130(L)**

懸架専用となり、転倒時のサポートとして使用します。ウエストに巻くだけのシンプル装着、後方2本ベルトは歩行の視界を妨げません。免荷機能としてはご使用頂けません。

※POPOではご使用頂けません。



ハーネスベスト (TSV)

V-120(M)**V-130(L)**

体幹パーツは、肩甲骨内転、胸椎伸展、腹圧補助機能を有し、ハーネスハイブリッドとの組合せでのBWSTTでは、安定した歩行と体幹伸展・動揺軽減効果が得られます。単独歩行での使用も可能です。

※ハーネスベスト (TSV)は刈谷豊田総合病院・東分院 (リハビリテーション科)との共同開発商品です。

ハーネス適合サイズ一覧

サイズ	ハーネスハイブリッド
SS	ウエストサイズ 約55～65cm
S	ウエストサイズ 約65～75cm
M	ウエストサイズ 約75～90cm
L	ウエストサイズ 約90～100cm
LL	ウエストサイズ 約100～110cm

サイズ	ハーネスライト
S	腸骨周りサイズ 約72～86cm
M	腸骨周りサイズ 約86～100cm
L	腸骨周りサイズ 約100～114cm

サイズ	ハーネススーパーライト
S	ウエストサイズ 約53～65cm
M	ウエストサイズ 約68～88cm
L	ウエストサイズ 約88～105cm

※サイズ表記目安数字となります。

安全懸架装置 TAN・POPOシリーズ 製品仕様

■SSシリーズ 製品仕様

	SS-1000	SS-450	SS-300	SS-100
本 体 重 量	25kg	10kg	約1.5kg	約1.0kg
耐 荷 量	100kg	100kg	100kg	100kg
走 行 速 度 (無負荷時)	1.0km/h	—	—	—
昇降ストローク	2.0m	2.3m	—	580mm
平均昇降速度 (無負荷時)	55mm/秒	45mm/秒	—	—
動 力 電 源	DC24V (バッテリー搭載)	DC24V (バッテリー搭載)	—	—
充 電 器 入 力	AC100-120V 1.0A	AC100-120V 1.0A	—	—
充 電 器 出 力	DC24V 1.5A	DC24V 1.5A	—	—
バ ッ テ リ ー	12V5.0A×2個 密閉型鉛蓄電池	12V5.0A×2個 密閉型鉛蓄電池	—	—
操 作 方 法	赤外線リモコン	赤外線リモコン	手動操作	手動操作
そ の 他 機 能	非常降下機能付き(手動)／ 緊急停止機能付き(ひもスイッチ)／ 高速落下時ロック機能付き／ 下降時ベルト緩み検知機能付き	ストラップ緩み検知・乱巻き防止機能／過速度検知／ スロースタート・ストップ／緊急停止装置／ バッテリー残量(アラーム機能搭載)／自動電源OFF機能／ 緊急降下装置(手動)／免荷量表示計(オプション)	—	高さ調整用 クリップ付き

■TGシリーズ 製品仕様

	TG-800	TG-1000
寸法 (高さ)	1.960~2.420mm	1.960~2.420mm
(幅)	940mm (内寸800mm)	1,140mm (内寸1,000mm)
(奥行)	1,280mm	1,280mm
本 体 ・ 脚 部	材質:鉄	材質:鉄
本 体 重 量	48kg	52kg
耐 荷 量	100kg	100kg
充 電 器 入 力	AC100V-240V-50/60Hz	AC100V-240V-50/60Hz
充 電 器 出 力	DC29.4V 0.8A	DC29.4V 0.8A
バ ッ テ リ ー	リチウムイオン電池 BAL50 入力電源 29.4V 出力電源 25.2VDC	リチウムイオン電池 BAL50 入力電源 29.4V 出力電源 25.2VDC

■SPシリーズ 製品仕様

	SP-2000
(高さ)	2.700mm
寸法 (幅)	1,100mm (幅1,000mmまでのトレッドミルが使用可能)
(奥行)	1,310mm
本 体 ・ 脚 部	材質:鉄
本 体 重 量	115kg
耐 荷 量	100kg
動 力 電 源	使用電圧 AC100V-50/60Hz 消費電力 56W

■PP-Tread 製品仕様

寸法 (歩行高)	120mm
(幅)	740mm
(長 さ)	1,600mm
走行面 (幅)	510mm
(長さ)	1,235mm
本 体 重 量	約60kg (手すり約16.5kg)
速 度	0.2~6.4km/h
計 器 表 示	速度/距離/消費カロリー/ステップ数
最大使用体重	182kg
使 用 電 圧	AC100V 15A 50/60Hz ※常時1500W供給可能な単独アース付きコンセント
その他の機能	安全キー/モバイル充電用USB端子

■POPO Li 製品仕様

吊り上げ質量	100kg
吊り上げ距離	590mm~1,360mm
操 作 方 法	コントローラーボタン/介助者用手元スイッチ
入 力 電 源	AC100V-240V-50/60Hz
出 力 電 源	DC24V
安 全 機 能	緊急停止ボタン 非常降下スイッチ (EMERGENCY)
本 体 ・ 脚 部	材質:鉄
本 体 質 量	35kg
充 電 器 入 力	AC100V-240V-50/60Hz
充 電 器 出 力	DC29.4V 0.8A
バ ッ テ リ ー	リチウムイオン電池 BAL50 入力電源 29.4V 出力電源 25.2VDC

製造発売元



■本 社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

お客様相談室

[24時間受付]

モリトーホームページ

Email

☎ 0120-65-2525

http://www.moritoh.co.jp

info@moritoh.co.jp

TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555



製品価格表

■札幌営業所 / 〒063-0870

■仙台営業所 / 〒981-1102

■埼玉営業所 / 〒336-0025

■中部営業所 / 〒491-0074

■大阪営業所 / 〒577-0016

■岡山営業所 / 〒700-0954

■福岡営業所 / 〒811-1204

■東京有明

■ショールーム / 〒135-0063

■福岡大町

■研修センター / 〒398-0001

北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101

宮城県仙台市太白区袋原6-9-22

埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103

愛知県一宮市東島町3-36

大阪府東大阪市長田西2-6-2 寺西コンバクトオフィスB号

岡山県岡山市南区米倉30-102

福岡県那珂川市片縄東1-12-1

東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー9階2号室

長野県大町市大字平22393

TEL (011) 708-5200 FAX (011) 708-5201

TEL (022) 302-7914 FAX (0586) 72-4555

TEL (048) 753-9393 FAX (03) 5531-5550

TEL (0586) 71-6151 FAX (0586) 72-4555

TEL (06) 6785-7202 FAX (06) 6785-7203

TEL (086) 259-2910 FAX (0586) 72-4555

TEL (092) 953-1892 FAX (092) 953-1973

TEL (03) 5531-5555 FAX (03) 5531-5550

TEL (0261) 23-1678

※取付け工事費が別途必要です。 機器の仕様や価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 P/B/L/2.5

介護リフト つるべー・安全懸架 T A N - P O P O 価格一覧

商品名1	商品名2	希望小売価格	2025年4月改定	税込価格	税
介護リフトつるべーF1セット	ステンレスアーム付	611,000	662,600		非課税
介護リフトつるべーF1セット(SKK)	ステンレスアーム付	684,000	742,900		非課税
介護リフトつるべーF2Rセット	ステンレスアーム付	678,000	736,300		非課税
介護リフトつるべーF2Rセット(SKK)	ステンレスアーム付	742,000	806,700		非課税
介護リフトつるべーBセット	ステンレスアーム付	599,000	649,400		非課税
介護リフトつるべーBWセット(検定付)ステンレスアーム	ステンレスアーム付	819,000	869,400		非課税
介護リフトつるべーG2Rセット	ステンレスアーム付	513,000	554,800		非課税
介護リフトつるべーU1セット	ステンレスアーム付	598,000	648,300		非課税
介護リフトつるべーU2Rセット	ステンレスアーム付	661,000	717,600		非課税
介護リフトつるべー Y6セット		568,000	596,400		非課税
介護リフトつるべー Y6Wセット(検定付)		788,000	816,400		非課税
介護リフトつるべー Y6Tセット	手すり付	666,000	694,400		非課税
介護リフトつるべー Y6TWセット(検定付)	手すり付	886,000	914,400		非課税
介護リフトつるべー Y4セット		528,000	554,400		非課税
介護リフトつるべー Y4Wセット(検定付)		748,000	774,400		非課税
介護リフトつるべー Y4Tセット	手すり付	626,000	652,400		非課税
介護リフトつるべー Y4TWセット(検定付)	手すり付	846,000	872,400		非課税
介護リフトつるべー Y6セット Li-PINK		657,000	689,800		非課税
介護リフトつるべー Y6Wセット(検定付) Li-PINK		877,000	909,800		非課税
介護リフトつるべー Y6Tセット Li-PINK	手すり付	755,000	787,800		非課税
介護リフトつるべー Y6TWセットLi-PINK (検定付)	手すり付	975,000	1,007,800		非課税
介護リフトつるべー Y6 Li-PINK safety robo		748,000	785,400		非課税
介護リフトつるべー Y4セット Li-PINK		621,000	652,000		非課税
介護リフトつるべー Y4Wセット(検定付) Li-PINK		841,000	872,000		非課税
介護リフトつるべー Y4Tセット Li-PINK	手すり付	719,000	750,000		非課税
介護リフトつるべー Y4TWセットLi-PINK (検定付)	手すり付	939,000	970,000		非課税
介護リフトつるべー Y4・Y6セット専用手すり		98,000	98,000	107,800	税込
車搭載型介護リフト V-LIFT		680,000	680,000		非課税
リフト用デジタル体重計 検定付	MHS2600	220,000	220,000	242,000	税込
リフト用デジタル体重計 検定無し	MHS2600	180,000	180,000	198,000	税込
車椅子用つるべ(黒輪・金具付セット)		22,500	22,500	24,750	税込
Cセット用スリングシート ハーフ	PAO170	30,000	30,000	33,000	税込
Cセット用スリングシート フル	PAO180	30,000	30,000	33,000	税込
スリング パオハーフ	PAO100	47,000	47,000	51,700	税込
スリング パオフル	PAO120	58,000	58,000	63,800	税込
スリング パオロング	PAO130	61,000	61,000	67,100	税込
スリング パオメッシュブルー ハーフ	PAO140	42,000	42,000	46,200	税込
スリング パオメッシュブルー フル	PAO150	52,000	52,000	57,200	税込
休足スリング	PAO160	19,000	19,000	20,900	税込

介護リフト つるべー・安全懸架 T A N - P O P O 価格一覧

商品名1	商品名2	希望小売価格	2025年4月改定	税込価格	税
スリング エウアハーフ中	EVE210	42,000	42,000	46,200	税込
スリング エウアハーフ小	EVE220	42,000	42,000	46,200	税込
スリング エウアフル中	EVE240	52,000	52,000	57,200	税込
スリング エウアフル小	EVE250	52,000	52,000	57,200	税込
スリング エウアネックサポート	EVE260	13,000	13,000	14,300	税込
スリング ハオメッシュグレー フル 中	PAO340	52,000	52,000	57,200	税込
スリング ハオメッシュグレー フル 小	PAO350	52,000	52,000	57,200	税込
ぶらん歩 S		43,000	43,000	47,300	税込
ぶらん歩 M		43,000	43,000	47,300	税込
ぶらん歩 L		43,000	43,000	47,300	税込
移座えもんボードブルー	「介護の技術を変えよう！」QR付	16,000	16,000	17,600	税込
移座えもんボード ホワイト1000	45*100	18,000	18,000	19,800	税込
移座えもんボード ホワイト800 30*80		9,000	9,000	9,900	税込
移座えもんグローブ		2,000	2,000	2,200	税込
移座えもんシート BLACK M		3,000	3,000	3,300	税込
移座えもんシート BLACK ML		5,500	5,500	6,050	税込
移座えもんシート BLACK L		7,500	7,500	8,250	税込
移座えもんシート BLACK S		2,500	2,500	2,750	税込
移座えもんシーグロ		4,000	4,000	4,400	税込
移座えもんローラ ROLA-1000	1000*500	50,000	50,000	55,000	税込
移座えもんローラ ROLA-1800	1800*500	79,500	79,500	87,450	税込
移座えもんパット	50*100(延長ストラップ2本付)	18,000	18,000	19,800	税込
移座えもんヒップベルト		12,000	12,000	13,200	税込
安楽キャリー AAタイプ 一体型	アームレスト付	142,000	156,200	171,820	税込
安楽キャリー Bタイプ 分離型	アームレスト付	218,000	239,800	263,780	税込
安楽キャリー-Bタイプ 穴あき座面付		232,000	255,200	280,720	税込
安楽キャリー-用アームレスト	2本組A・B兼用	19,500	21,400	23,540	税込
安楽キャリー-A・AAタイプ用補助ベルト		2,400	2,600	2,860	税込
安楽キャリー-Bタイプ用補助ベルト		2,400	2,600	2,860	税込
安楽キャリー-Bタイプ用ツルベルト(ラダータイプ)	4本組	9,600	10,500	11,550	税込
安楽キャリー-A・AAタイプ用ネックサポート		6,200	6,800	7,480	税込
安楽キャリー-Bタイプ用ネックサポート		6,200	6,800	7,480	税込
安楽キャリー-座面シート交換用 B用		7,500	8,200	9,020	税込
安楽キャリー-背面シート交換用 B用		7,500	8,200	9,020	税込
安楽キャリー-座面シート交換用 AA用		7,500	8,200	9,020	税込
安楽キャリー-背面シート交換用 AA用		7,500	8,200	9,020	税込
安楽キャリー-B用穴あき座面シート		19,200	21,100	23,210	税込
安楽キャリー-B用穴あき座面用背面シート		9,800	10,700	11,770	税込
安楽キャリー-用安全ベルト大		4,200	4,600	5,060	税込
安楽キャリー-用安全ベルト小		4,200	4,600	5,060	税込
延長バー200mm	2本組	6,500	7,100	7,810	税込

介護リフト つるべー・安全懸架 T A N - P O P O 価格一覧

商品名1	商品名2	希望小売価格	2025年4月改定	税込価格	税
延長ハーフ150mm	2本組	6,500	7,100	7,810	税込
安楽キャリーA・AAタイプ用シートカバー	A30	3,500	3,800	4,180	税込
安楽キャリーBタイプ用シートカバー	B70	3,500	3,800	4,180	税込
安楽キャリーホースシート	A・B兼用	11,000	12,000	13,200	税込
安楽キャリー用 フレームRカバー B用	2枚1組	3,500	3,800	4,180	税込
安楽キャリー用 フレームRカバー A用	2枚1組	3,500	3,800	4,180	税込
安楽キャリーフットレストシート		6,000	6,600	7,260	税込
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH		2,100,000	2,100,000	2,310,000	税込
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH[Aセット]		2,250,000	2,250,000	2,475,000	税込
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH[Bセット]		2,300,000	2,300,000	2,530,000	税込
免荷式歩行リフト POPO Li REH-100		898,000	942,000		非課税
免荷式歩行リフト POPO Li LIV-100		872,000	915,000		非課税
免荷式歩行リフト POPO Li REH-200	サイド手すり付	997,800	1,047,000		非課税
免荷式歩行リフト POPO Li LIV-200	サイド手すり付	971,800	1,020,000		非課税
POPO LIV脚部		72,000	75,000	82,500	税込
POPO REH脚部		98,000	102,000	112,200	税込
POPO サイド手すり		99,800	105,000	115,500	税込
POPO ハイアーム		66,000	69,000	75,900	税込
ワイヤレススイッチ HB200	※TG・POPO Li・OCTBATH・Y6 Li-PINK使用可	25,000	25,000	27,500	税込
免荷式リハビリテーションリフトTG-1000		1,480,000	1,628,000	1,790,800	税込
免荷式リハビリテーションリフトTG-800		1,359,000	1,490,000	1,639,000	税込
免荷式リハビリテーションリフトSP-2000		2,500,000	都度見積り	-	税込
TG用サイドグリップ		195,000	195,000	214,500	税込
MORITOH PP-Tread SW-1200(※1)	(パネル支柱含む)	700,000	700,000	770,000	税込
MORITOH PP-Tread 専用シリコンスプレー	OIL-900	900	900	990	税込
MORITOH PP-Tread 専用シリコンオイル	1Kg	6,000	6,000	6,600	税込
ハーネススーパースライド S	SL-110	35,000	36,750	40,425	税込
ハーネススーパースライド M	SL-120	35,000	36,750	40,425	税込
ハーネススーパースライド L	SL-130	35,000	36,750	40,425	税込
ハーネス ライト S POPO用 OR SP用	L-110	46,000	48,300	53,130	税込
ハーネス ライト M POPO用 OR SP用	L-120	46,000	48,300	53,130	税込
ハーネス ライト L POPO用 OR SP用	L-130	46,000	48,300	53,130	税込
ハーネス ハイリット SS POPO用 OR SP用	HV-100	58,000	60,900	66,990	税込
ハーネス ハイリット S POPO用 OR SP用	HV-110	58,000	60,900	66,990	税込
ハーネス ハイリット M POPO用 OR SP用	HV-120	58,000	60,900	66,990	税込
ハーネス ハイリット L POPO用 OR SP用	HV-130	58,000	60,900	66,990	税込
ハーネス ハイリット LL POPO用 OR SP用	HV-140	58,000	60,900	66,990	税込
ハーネスベスト(TSV) M	V-120	58,000	60,900	66,990	税込
ハーネスベスト(TSV) L	V-130	58,000	60,900	66,990	税込
じよきん娘 トリガータイプ 300ml		2,600	2,850	3,135	税込

(※1)商品は在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。